

CGM MEDISTAR Device Connect (Middleware)

MEDISTAR xDT Konfigurationsdateien


Dateiversion: 0.9.8.4
Letzte Aktualisierung: 19.07.2019
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Software CGM MEDISTAR Device Connect, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Die **Geräteanbindungskonfiguration** muss per **GA_XDT** eingerichtet werden. Dies kann über **Vorkonfigurationsdateien** durchgeführt werden. Diese werden für jedes „anbindbare“ Geräte über die **Middleware** zur Verfügung gestellt.


Die Vorkonfigurationsdateien werden in folgendem Verzeichnis ausgeliefert:

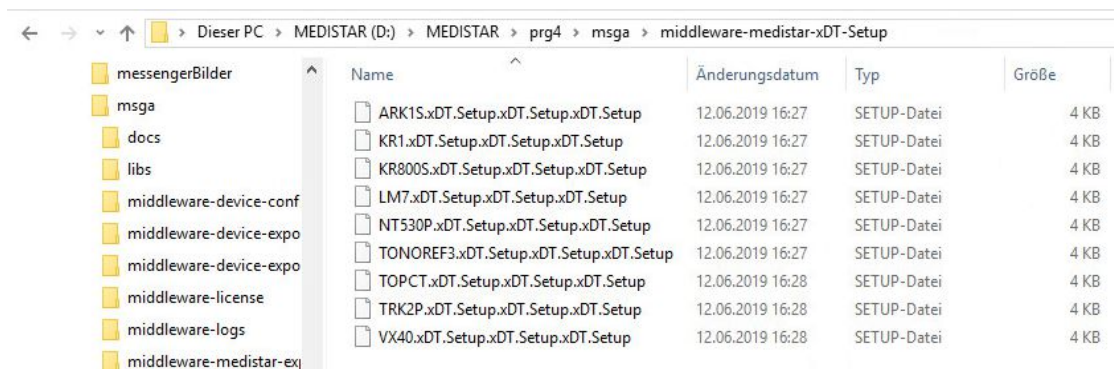

Für jedes **Gerät** wird immer auch eine xDT.Setup Datei erzeugt. Die GDT-ID wird als Präfix für den Dateinamen verwendet.

Import xDT.Setup Datei


Die Geräte xDT-Datei kann mittels CGM MEDISTAR xDT Setup importiert werden. Die manuelle Einrichtung der Geräteanbindung ist somit nicht mehr nötig.

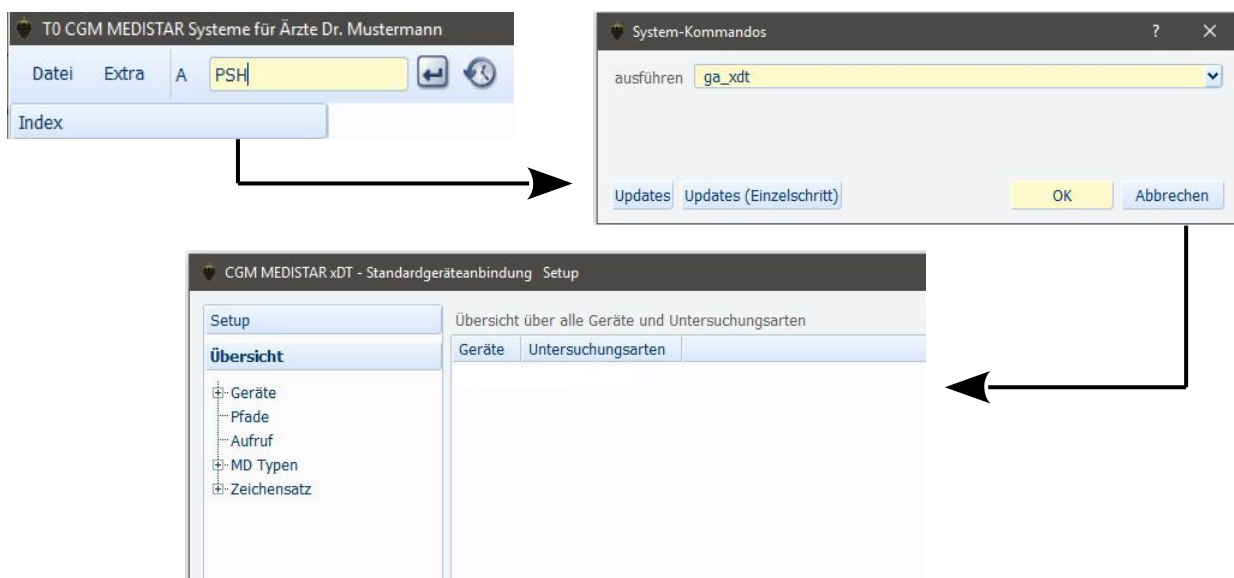


Über das xDT Setup kann nun eine Vorkonfigurationsdatei importiert werden.



Wählen Sie über „Importieren“ die neue xDT Konfigurationsdatei aus.

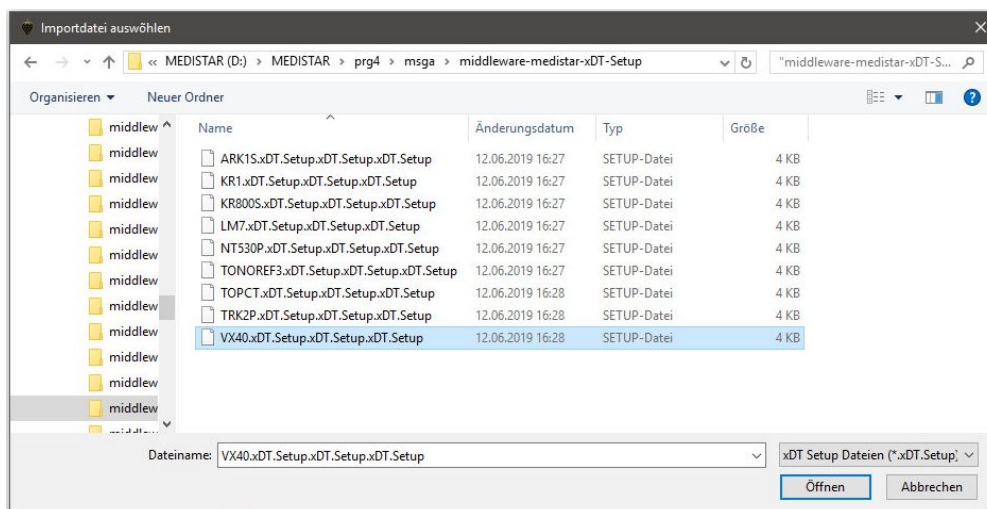

Klicken Sie auf „Öffnen“, damit die xDT Datei geladen und importiert werden kann.

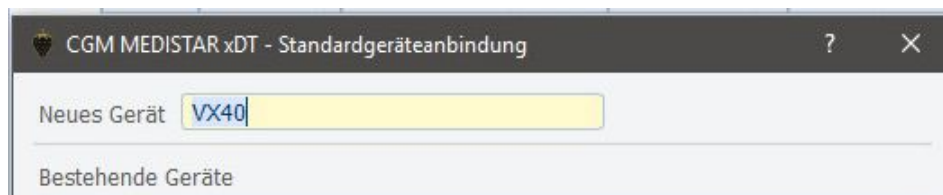

Neuen Bezeichner für das neue Gerät eingeben. Am besten verwenden Sie die GDT-ID des Gerätes. Über die „Speichern“ Schaltfläche wird das neue Gerät unter diesem Namen importiert.

Bitte prüfen Sie die Einstellungen und gleichen diese mit der Middleware Konfiguration ab.