

Essilor Vision-R 700



Dateiversion: 1.9.0.13
Erstellungsdatum: 29.08.2024
Letzte Aktualisierung: 16.01.2026
Autor: kai-oliver.zirlewagen@cgm.com

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am Gerät.....	4
Zugriff auf freigegebene Verzeichnisse	4
Bedienung des Gerätes.....	5
CGM Medistar Konfiguration.....	6
Medistar Formular Einrichtung (XDT).....	9
Middleware Einstellungen.....	10
Anpassungen, Daten an Phoropter senden.....	11
Editieren der „msga.ini“	11
Editieren der „EVR700-OPTO02.ini“	12
Übertragung SUBJ-Daten an das Gerät.....	13
Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen.....	14
Anpassung der MD-Formatierung.....	15
Messdaten auswählen.....	17
Formularaufruf.....	18
Ergebnis in Medistar.....	20
Hinweise.....	21

Technischer Ansprechpartner

Essilor Instruments
Benzstraße 6
38112 Braunschweig

instrumente@essilor.de
<https://www.essilor-instruments.com>

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten und Messwerte-Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist möglich.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt sofern eine **ID** vorhanden ist.

Zu übertragende Messdaten werden aus der Karteikarte (MD) ausgelesen und per **LAN** Schnittstelle (XML) an das Gerät gesendet. Es werden nur die aktuellen Werte, sprich die letzte Messung (aktuellste) pro MD-Zeilentyp, übertragen.

 **Hinweis:** Damit Messdaten per **GDT** exportiert werden können, muss dies explizit pro Geräteanbindung (GA_XDT: **Option Phoropter**) aktiviert werden.

Einstellungen am Gerät

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

Zugriff auf freigegebene Verzeichnisse

Aus Sicherheitsgründen sind diese freigegebenen Ordner in allen CBOX durch einen Netzwerk-Login (*essibox*) und ein Passwort (*essibox*) geschützt.

\\CBOX-XXXXXXX\Out (XXXXXXX ist die Seriennummer der CBOX). Dieser Ordner wird von EHR/PMS verwendet, um von Geräten generierte Daten abzurufen. Für jede CBOX (normalerweise eine pro Raum) muss EHR/PMS Daten in einem anderen Netzwerk finden.


\\CBOX-XXXXXXX\In (XXXXXXX ist die Seriennummer der CBOX). Dieser Ordner wird von EHR/PMS verwendet, um Daten an die Geräte zu übertragen. Natürlich müssen sich CBOX und PC zum Importieren von Daten im selben Netzwerk befinden.

Diese beiden freigegebenen Ordner sind festgelegt. Erforderliches Dateinamenformat für Dateien, die in den freigegebenen Ordner „In“ der CBOX übertragen werden: alphanumerische Zeichen plus „-“ und „_“.


Bedienung des Gerätes

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

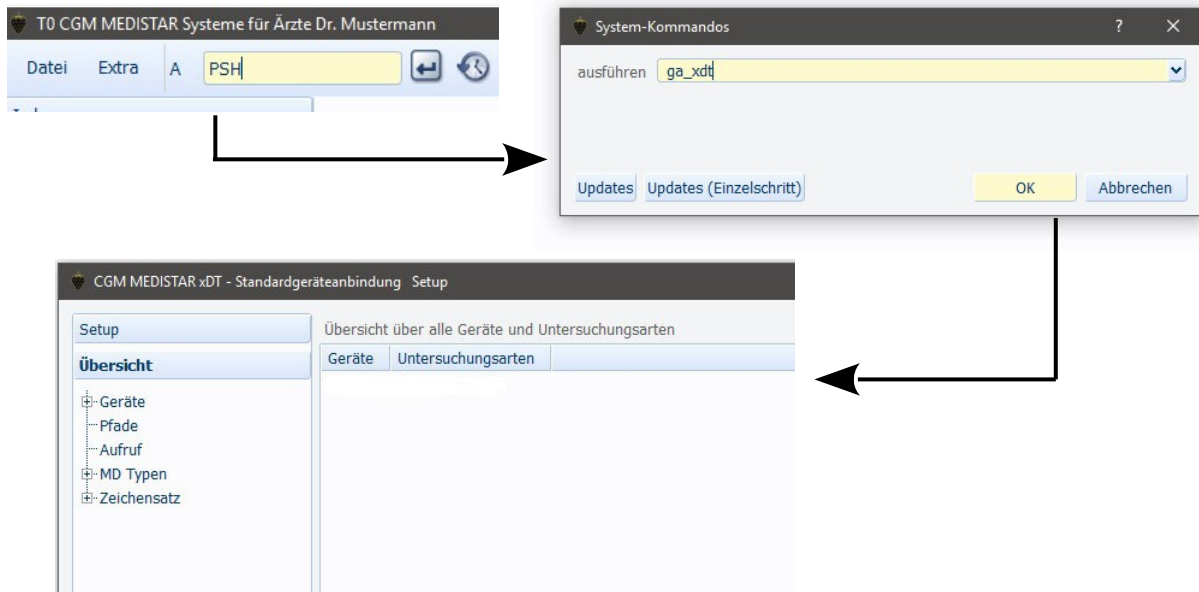

Essilor Vision-R 700 → **GDT-ID / Geräte-ID ist EVR700**

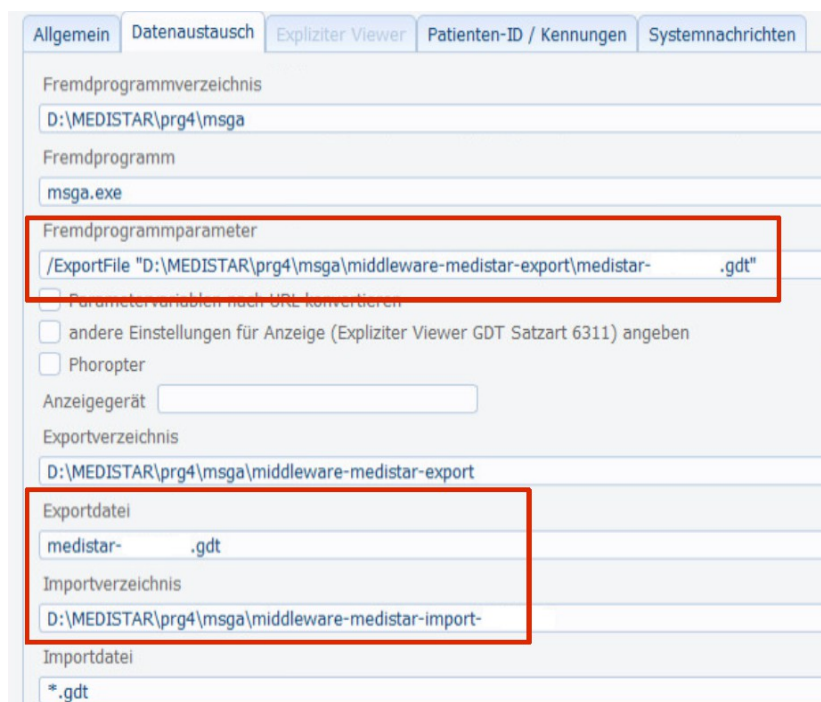

Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **EVR700**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

i **Hinweis:** Aktivieren Sie die Phoroopter Option, damit Daten (Werte) auch an den **Phoroopter** gesendet werden können.

A screenshot of a software interface showing a checkbox labeled 'Phoroopter' which is checked. Below it is a text input field labeled 'Anzeigegerät'.

A screenshot of the 'Patienten-ID / Kennungen' tab in a software interface. It contains several fields for GDT (Global Data Transfer) settings:

- Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000): Pat.Nr. "123"
- Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000): Pat.Nr. "123"
- Importformat führende Nullen unterdrücken: ☐
- Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218): 02.10
- Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316): EDV1
- Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315): [Redacted field]

Die **GDT-Empfänger-Kennung EVR700** (im markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Erstellen Sie eine neue Untersuchungsart „**OPT002**“.

Die Einstellungen für „**Export**“ und „**Import**“ unterscheiden sich nicht.

A screenshot of the 'Export' tab in a software interface. The 'Zeichensatz' dropdown menu is set to 'Windows'. Other settings include:

- Größe/Gewicht exportieren: ☐
- Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': Behandlung+Messung
- Abfrage Abrechnungskennzeichen: Nur EBM
- Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten: ☐

A screenshot of the 'Import' tab in a software interface. Two checkboxes are highlighted with red boxes:

- ☐ Untersuchungsart eintragen
- ☐ Untersuchungsdatum eintragen

 Other settings include:

- Zeitangaben in MD-Verweis: Messung vorziehen
- Zeichensatz: Windows
- Doppelte Einträge vermeiden: ☐

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

The image consists of two side-by-side screenshots of a software interface, likely for medical data management. Both screenshots have tabs at the top: 'Export', 'Import', 'MD-Eintrag', and 'Externe Verknüpfungen'.

The left screenshot shows a table with two columns: 'Feldkennung' and 'Art der Daten'. The table lists various field codes and their corresponding data types. A red box highlights the 'Befund' (V) and 'Ergebnis' (V2) rows.

Feldkennung	Art der Daten
6200/6201	Verweis
8432/8439	Verweis Messung
6302-6305	Verweis Link
6205	Diagnose
6220	Befund
6221	Fremdbefund
6227	Kommentar
6228	Ergebnis
8990	Signatur
3622/3623	Grösse/Gewicht
6330-6399	Freie Kategorien
8410-8480	Werte
	Arztkennezeichen


The right screenshot shows a list of optional settings. A red box highlights the 'Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)' and 'Gerätename in Kommentar' options.

- ☐ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Abbildung 1: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.


Medistar Formular Einrichtung (XDT)

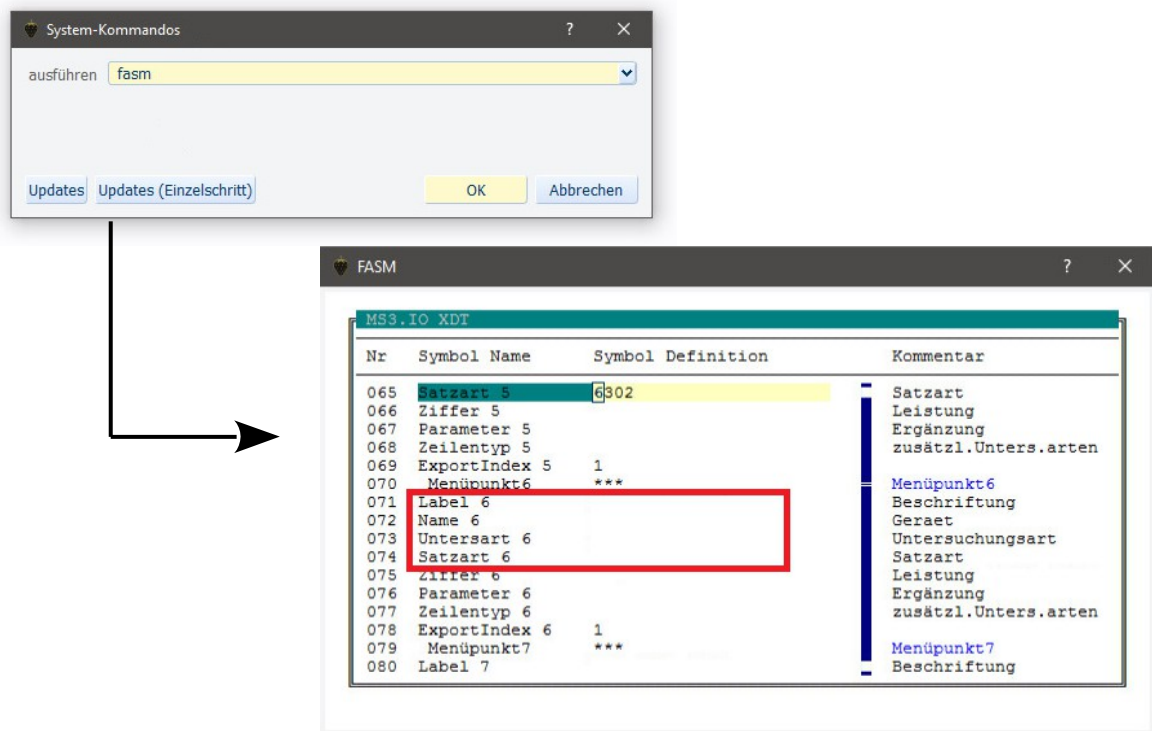

Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: Essilor Vision-R 700
Name: EVR700
Untersart: OPT002
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.

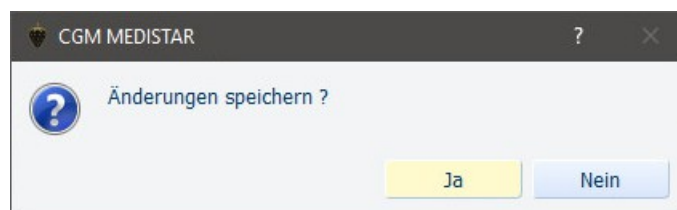

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **EVR700**

Untersuchungsart: **OPT002**

Middleware Konfiguration, Vorlagen (XML) und Skriptdateien (PSC):

EVR700-OPT002.ini

EVR700-OPT002-EXPORT-DATA.psc

EVR700-OPT002-PARSE-DATA.psc

EVR700-OPT002-SEND-TEMPLATE-*.xml

Middleware Lizenzdatei:

EVR700.crt

Ermitteln Sie über die Datei „**msga.ini**“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „EVR700-OPT002.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „EVR700-OPT002.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „EVR700.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassungen, Daten an Phoropter senden

i Wichtig: Damit Daten aus der Karteikarte (MD) verarbeitet und an den Phoropter gesendet werden können, muss festgelegt werden welcher **MD-Zeilentyp** welche **Gerätedaten** enthält.

D.h. die **Middleware** benötigt die **Zuweisung**, dass die MD-Zeile V0 z.B. Lensmeter Daten enthält. Ohne diese Zuweisung kann auf eine Kundenspezifische Konfiguration eventuell nicht reagiert werden.

Die Patientendaten (immer die aktuellste Messung pro Zeilentyp) werden per GDT 2.1 exportiert und durch die Middleware verarbeitet. Die Messdaten werden **1:1** an das Gerät übertragen. Die Messdaten werden als XML-Dateien (LM und AR) im Netzwerk abgespeichert.

28.07.2020	A	V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	A	V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
19.08.2020	A	V0 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	A	V0 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
	A	.

Abbildung 2: Beispiel MD-Einträge

Folgende Konfigurationsdateien müssen editiert werden, damit die Middleware Konfiguration mit der MEDISTAR Konfiguration übereinstimmt.

Die Konfigurationsdatei „**msga.ini**“ (Programmkonfigurationsdatei) muss den Datentrenner (Standard: PHOROPTER) für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR enthalten.

Editieren der „msga.ini“

Sektion [GDT]

NonGDTDataSeparator	Datentrenner für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR angehängt werden. Standard: PHOROPTER Schreibweise <u>beachten</u>
---------------------	--

i Editieren Sie die msga.ini und ergänzen Sie folgenden Wert in der Sektion [GDT] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Beispiel (Auszug):

```
[GDT]
Format=import
Version=2.1
Charset=3
Type=file
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\
BackupFiles=1
BackupPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export-backup\
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Editieren Sie im Anschluss die **Geräte-Konfigurationsdatei** „EVR700-OPTO02.ini“. In der Geräte-Konfigurationsdatei wird hinterlegt, welcher MD-Zeilentyp welchem Geräte-Typ entspricht. Weiterhin hat man die Möglichkeit über die Schalter „Enabled“ pro Gerät die Verarbeitung zu aktivieren oder zu deaktivieren (0 = deaktivieren, 1 = aktivieren).

Editieren der „EVR700-OPTO02.ini“

Sektion [Common]

NonGDTDataLineVisus	Zeilenkennung für „Visus“
NonGDTDataLineLensmeter	Zeilenkennung für „Lensmeter“
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Objektiv“
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Subjektiv“
NonGDTDataLinePhoropter	Zeilenkennung für „Phoropter“
NonGDTDataLineKeratometer	Zeilenkennung für „Keratometer“
NonGDTDataLineSondereintraege	Zeilenkennung für „Sondereinträge“
NonGDTDataLine ... Enabled	Mit dem Wert 1 kann die Verarbeitung für den bestimmten MD-Zeilentyp aktiviert werden, mit 0 wird sie deaktiviert.
UseOnlyLatestNonGDTDataLines	Mit dem Wert 1 werden nur die aktuellen Messdaten angezeigt, mit Wert 0 werden alle Daten angezeigt.

Editieren Sie die EVR700-OPTO02.ini und ergänzen Sie folgende Werte in der Sektion [Common] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineLensmeterEnabled=1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektivEnabled=1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLinePhoropterEnabled=1
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineVerordnungEnabled=0
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektivEnabled=0
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineVisusKorrekturEnabled=0
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineSondereintraegeEnabled=1
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineKeratometerEnabled=0
NonGDTDataLineVisus=V
NonGDTDataLineVisusEnabled=0
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Die Einstellungen aus der INI-Datei müssen mit der Konfiguration in den Skript-Dateien übereinstimmen.

Übertragung SUBJ-Daten an das Gerät

Editieren Sie die EVR700-OPTO02.ini und ändern Sie folgende Werte in der Sektion [Common] und [XML]:

```
[Common]
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLinePhoropterEnabled=1
```

```
[XML]
ClearPath=1
ClearExternalFilePath=1
```

Speichern Sie die Datei unter selben Namen und im selben Pfad wieder ab.

Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen

Die Middleware Skript Konfiguration (Datenverarbeitung) muss ebenfalls mit den im MEDISTAR verwendeten MD-Zeilentypen übereinstimmen. Weiterhin muss die Skript-Konfiguration mit der INI-Konfiguration übereinstimmen.

D.h. die INI-Daten und die Skript-Konfiguration muss identisch sein.

Entnehmen Sie die Werte für das Skript aus der Geräte-Konfigurationsdatei.

Datei „EVR700-OPT002.ini“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineVisus=V
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Diese Einstellungen bzw. Konfigurationen müssen dementsprechend auch in den Skript-Dateien „**EVR700-OPT002-EXPORT-DATA.psc**“ und „**EVR700-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ angeglichen werden.

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „**EVR700-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit der VD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,  
// benutze "False", damit der VD Wert ignoriert werden kann.  
bolAddVDValueToOutput := True;  
  
// Verwende "True", damit der WD Wert hinzugefügt wird, benutze "False",  
// damit der  
// WD Wert nicht per GDT exportiert wird.  
bolAddWDValueToOutput:= True;  
  
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er  
// vom Gerät kommt  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus  
// GDT_SIGN_SEPARATOR  
// angefügt wird,  
// benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert  
// eingefügt wird  
bolAddSignSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Achsensseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsensseparator nicht verwendet wird  
bolAddAxisSeparator:= True;
```

Passen Sie weiterhin die Einstellungen an das Gerät an (Werte aus der XML-Messungsdatei entnehmen):

```
// Setze hier, welche Werte aus welcher Messung genutzt werden sollen.  
// Wert von "<nsSBJ:TypeName>" kann sein:  
// Prescription  
// Full Correction  
// Objective Data  
// Current Spectacles  
// Subj Night High Precision  
// Subj Night Standard  
// Subj Day Standard  
// Subj Day High Precision  
  
// Werte von "<nsSBJ:Distance>" können sein:  
// 500.000  
// 40.000  
  
// 10000  
// 40  
  
default_nsSBJ_TypeName_String:= 'Full Correction';  
default_nsSBJ_Distance_String:= '10000';
```

Speichern Sie die Datei(en) unter selben Dateinamen wieder ab.

Die Auswahl der Exportdaten kann über die Konfigurationsdatei „**EVR700-OPT002-EXPORT-DATA.psc**“ bearbeitet werden.

```
// Verwende "True", damit der PD-Wert aus den AR-Daten hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit der PD-Wert aus den AR-Daten nicht hinzugefügt wird.  
bolAddPDValueFromAR:= True;  
  
// Verwende "True", damit der PD-Wert aus den FN-Daten hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit der PD-Wert aus den FN-Daten nicht hinzugefügt wird.  
bolAddPDValueFromFN:= False;  
  
// ID für den Export-Dateinamen, maximal 20 Zeichen  
ExportFileNameID:= '          ';  
  
// Verwende Dokumentation der Funktion "SysUtils.FormatDateTime"  
ExportFileNameDateTimeFormat:= 'yyyymmhhnnss';
```

Speichern Sie die Datei(en) unter selben Dateinamen wieder ab.

Messdaten auswählen

Werden für einen Patienten Messdaten ausgelesen und die **PHOROPTER** Option wurde aktiviert, werden diese Daten zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie hier die zu übertragenden Daten aus. Alle selektierten Werte werden an das Gerät per LAN-Schnittstelle (XML-Dateien) gesendet.

Category	Item	Date	Value
V0 = Linsmeter	☒	01.08.2020	R.:S= +0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	☒	01.08.2020	L.:S= +1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
V1 = Refraktometer Objektiv	☒	28.07.2020	R.:S= -4.50 Z=-0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	☒	28.07.2020	L.:S= -3.25 Z=-1.00*110
V2 = Phoropter	☒	03.08.2020	R.:S= -3.00 Z=-2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50
	☒	03.08.2020	L.:S= -4.00 Z=-3.75*115 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75
V5 = Visus mit Korrektur	☒	28.07.2020	RA CC:1.25 LA CC:1.25
V6 = Sondereinträge	☒	03.08.2020	WD= 40
V7 = Keratometer	☒	28.07.2020	R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
	☒	28.07.2020	R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50

Über die Schaltfläche **„Auswahl bestätigen“** werden die Messdaten selektiert und an das Gerät übertragen. Soll eine Messung durchgeführt werden, ohne Messdaten ans Gerät zu übertragen, dann kann mittels **„Überspringen“** Schaltfläche dies getan werden.



Wird die Auswahl der Daten **übersprungen**, werden keine Messdaten **gesendet** aber es kann eine Messung am Gerät durchgeführt werden. Empfangene Daten werden verarbeitet und importiert. Ein Klick auf die Schaltfläche **„Auswahl bestätigen“** sendet die Daten an das Gerät.


Weitere Informationen dazu siehe auch [#13.Hinweise|outline](#)

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.




Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Essilor Vision-R 700**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per LAN-Schnittstelle, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

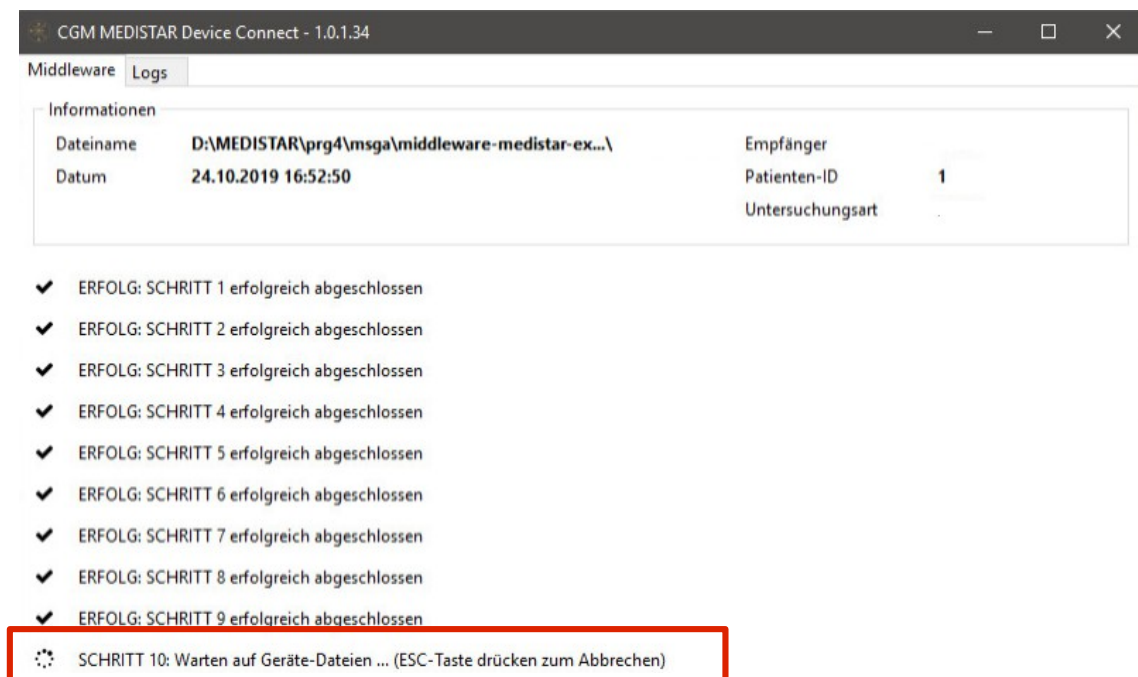

Wenn das Gerät als **Phoropter** konfiguriert ist, werden die Messdaten auch an das Gerät gesendet. Ohne die Phoropter Option können Daten nicht exportiert werden.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet. Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

Die Messdaten, welche über die LAN-Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.

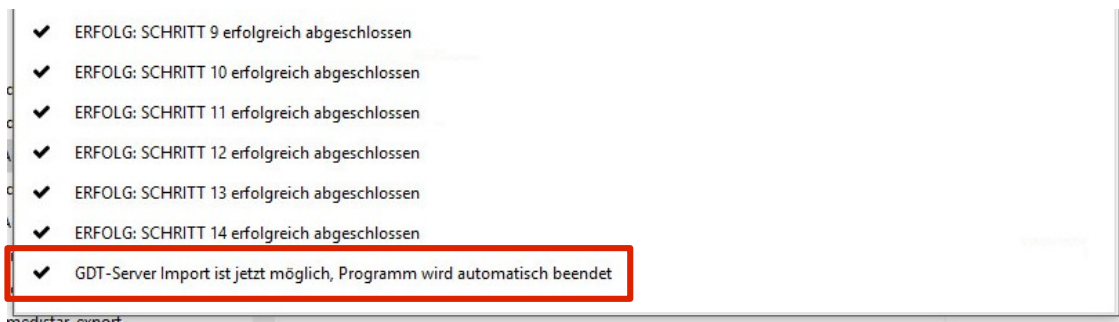

Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V6 WD= 40

V2 R.:S=- 3.00 Z=- 2.75*145 PD= 32.0

V2 L.:S=- 4.00 Z=- 3.75* 15 PD= 32.0

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.

Hinweise

Wichtige Informationen zum Update auf Version 1.5.41.90

Manuelle Änderungen der „msga.ini“ - Hinzufügen der neuen Sektion:

```
[Update]
Enabled=1
Path=middleware-update\
```

```
[Application]
SkipPhoropterConfirmationDialog=0
```

Man hat ab dieser Version die Möglichkeit den Bestätigungsdialog zum Senden der Daten an den z.B. Phoropter „auszublenden“. Wird diese Option aktiviert, werden die Daten im Hintergrund direkt an den z.B. Phoropter gesendet, aber der Dialog bleibt „unsichtbar“.

 **Hinweis:** Eine Kontrolle der Daten ist dann nicht mehr möglich. Es wird empfohlen den Dialog zu nutzen, Standard-Einstellung; der Dialog ist eingeblendet.

Messdaten auswählen

V0 =	Lensmeter		
☒	04.06.2019	R.:S=+ 0.25 Z=- 0.75*178 P= 0.00 B=	A=+1.25
☒	04.06.2019	L.:S=+ 0.00 Z=- 0.50* 4 P= 0.00	A=+1.25
V1 =	Refraktometer Objektiv		
☒	01.06.2023	F R.:S=+ 0.25 Z=- 0.50*175 PD=62	
☒	01.06.2023	F L.:S=- 0.25 Z=- 0.00* 0	
V2 =	Phoropter		
☒	29.10.2018	R.:S=+ 0.50 Z=- 0.75*177	A=+ 1.00 PD= 62
☒	29.10.2018	L.:S=+ 0.50 Z=- 0.50*165	A=+ 1.00

Folgende Optionen sind hier möglich:

SkipPhoropterConfirmationDialog=0

Standard-Einstellung ist 0, der Dialog ist sichtbar und muss bestätigt werden.

SkipPhoropterConfirmationDialog=1

Benutzt man den Wert 1, wird der Dialog nicht angezeigt und die Daten werden im Hintergrund ans Gerät gesendet.