


Geräteanbindung Heidelberg EYE EXPLORER HEYEX 2

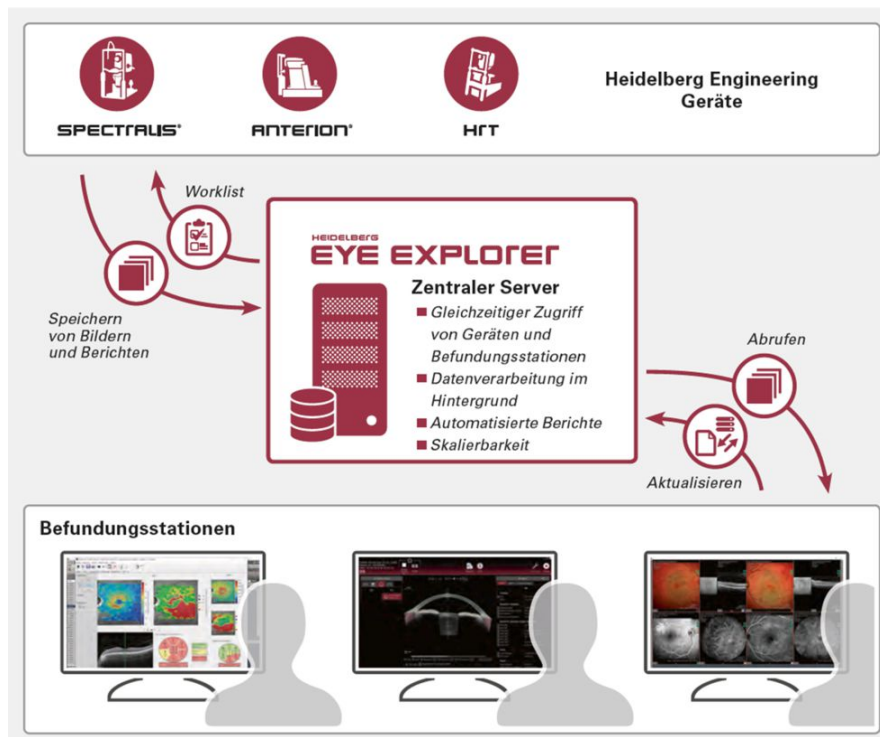

<https://business-lounge.heidelbergengineering.com>

Dateiversion: 1.9.0.17
Erstellungsdatum: 10.05.2022
Letzte Aktualisierung: 09.10.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Heidelberg Engineering GmbH
Max-Jarecki-Straße 8
69115 Heidelberg

Tel : +49 (0) 6221 / 64 63 0
Fax : +49 (0) 6221 / 64 63 64

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Heidelberg EYE EXPLORER) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten

Übertragung zum Gerät per Programmaufruf (INI-Datei). Alle notwendigen Daten werden durch GDT 2.1 (6302) an das Gerät übermittelt. Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Die Untersuchungsart **OPTO14** übergibt die Patientendaten an die Heidelberg EYE EXPLORER - HEYEX 2, als Untersuchungsart zur Betrachtung kann **OPTO00** verwendet werden.

 Hinweis: Nur bei der Untersuchungsart OPTO14 wird eine GDT Rückgabedatei geschrieben.


Einstellungen

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.


Die Software **Heidelberg EYE EXPLORER** muss auf dem PC installiert sein. Die Steuersoftware „C:\Heyex\heyexc.exe“ wird für die Patientendatenübermittlung benötigt.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

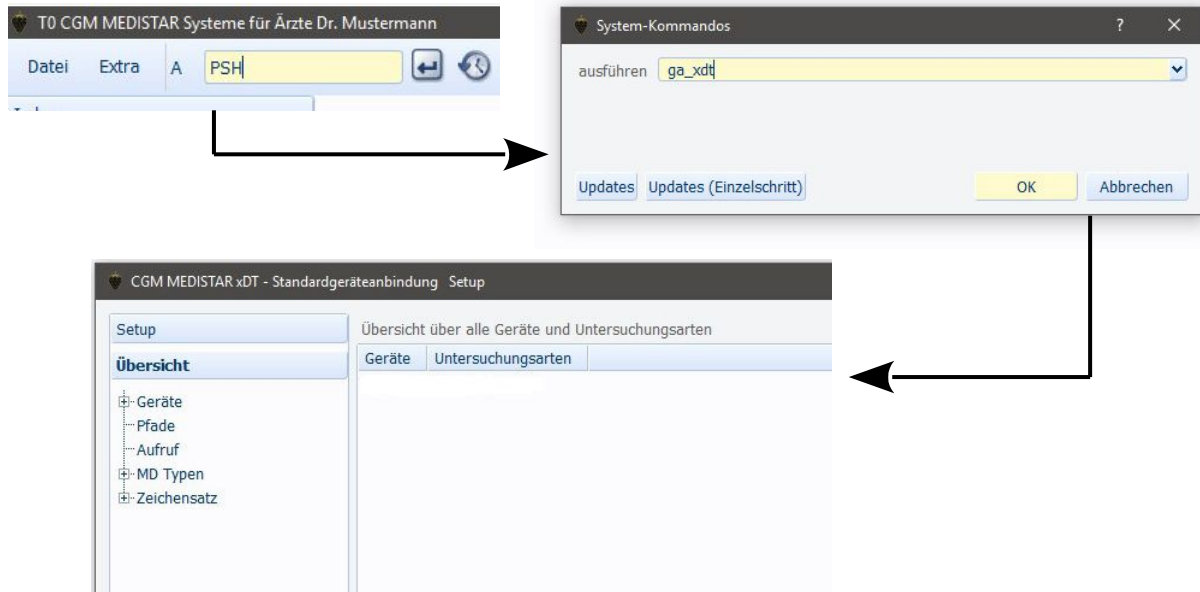

Heidelberg EYE EXPLORER - HEYEX 2 → **GDT-ID / Geräte-ID ist HEYEX2**

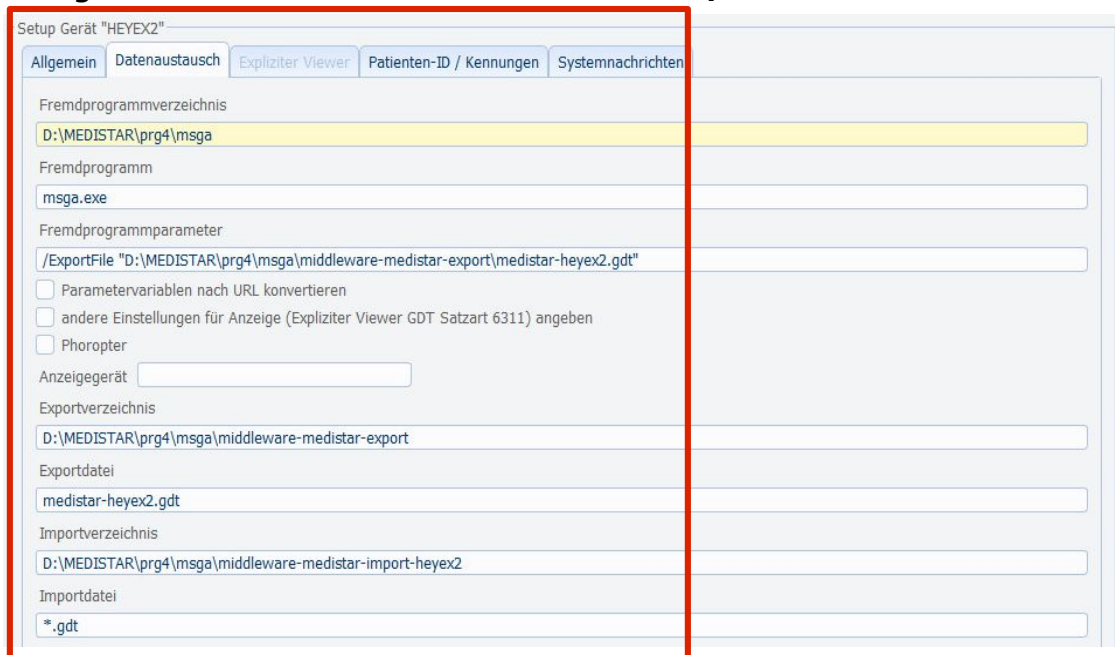

Der Gerätenamen (hier **HEYEX2**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. BMP Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. BMP Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.**

Setup Gerät "HEYEX2"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer Patienten-ID / Kennungen Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) HEYEX2

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V9
8432/8439	Verweis Messung	V9
6302-6305	Verweis Link	V9
6205	Diagnose	V9
6220	Befund	V9
6221	Fremdbefund	V9
6227	Kommentar	V9
6228	Ergebnis	V9
8990	Signatur	V9
3622/3623	Grösse/Gewicht	V9
6330-6399	Freie Kategorien	V9
8410-8480	Werte	V9

ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätenamen in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDatei verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird z.B. als **V9** eingegeben. Als Untersuchungsart wird **OPTO14** (generische Bilddaten) für die Messung verwendet.

Die Untersuchungsart **OPTO14** übergibt die Patientendaten an die Heidelberg EYE EXPLORER - HEYEX 2, als Untersuchungsart zur Betrachtung kann **OPTO00** verwendet werden.


Untersuchungsart	
Export	Import
Standard	Standard
OPTO00	OPTO00
OPTO14	OPTO14

Nur bei der Untersuchungsart OPTO14 wird eine GDT-Rückgabedatei geschrieben.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

Untersuchungsart **OPTO14** erstellt die INI-Konfigurationsdatei für den Heidelberg Eye Explorer mit Übergabe der Patientendaten.

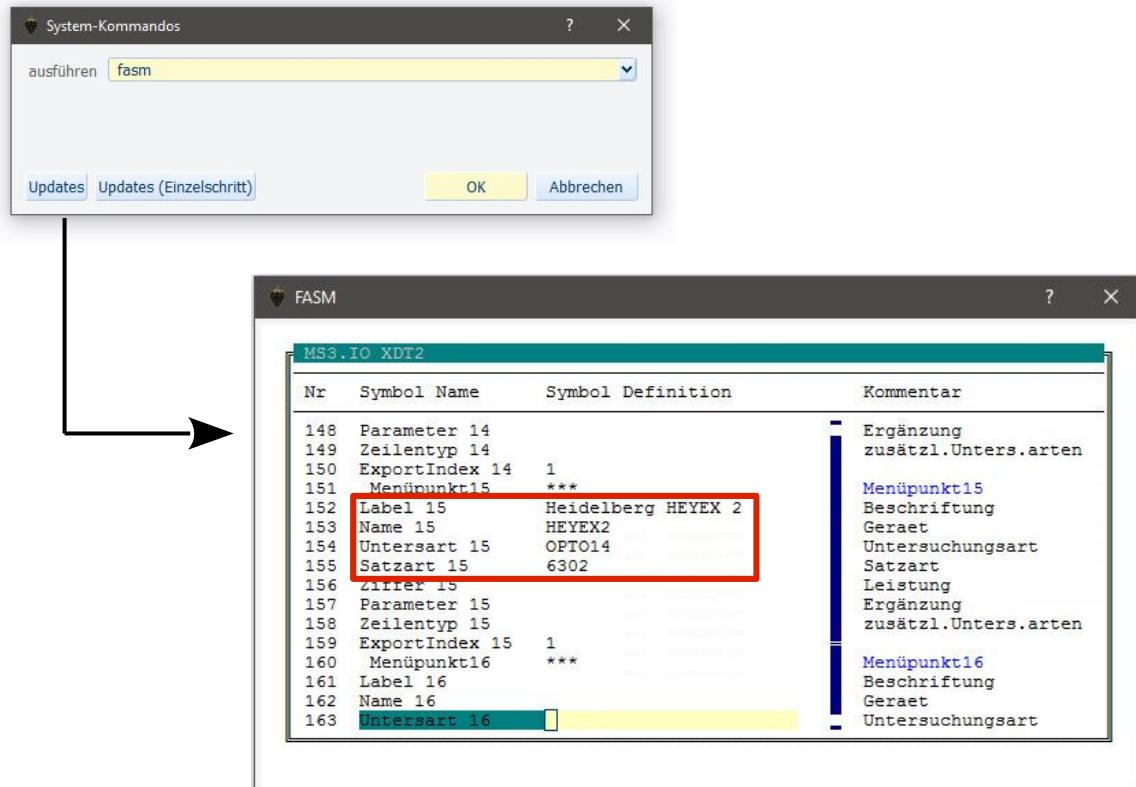

Die Untersuchungsart **OPTO00** erstellt die INI-Konfigurationsdatei für den Betrachtungsmodus, bzw. für die Suche nach dem Patienten. Nur die Patienten ID wird übergeben.

151	Menüpunkt15	***	Menüpunkt15
152	Label 15	Heidelberg HEYEX 2	Beschriftung
153	Name 15	HEYEX2	Geraet
154	Untersart 15	OPTO00	Untersuchungsart
155	Satzart 15	6311	Satzart
156	Ziffer 15		Leistung
157	Parameter 15		Ergänzung
158	Zeilentyp 15		zusätzl. Unters.arten

Nur bei der Untersuchungsart OPTO14 wird eine GDT-Rückgabedatei geschrieben.

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **HEYEX2**

Untersuchungsarten: **OPTO14** und **OPTO00**

Middleware Konfigurationen:

HEYEX2-OPTO14.ini

HEYEX2-OPTO00.ini

HEYEX2-OPTO14-gdt-data.txt

Middleware Lizenzdatei:

HEYEX2.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdateien** „HEYEX2-OPTO14.ini“ und „HEYEX2-OPTO00.ini“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdateien „HEYEX2-OPTO14.ini“ und „HEYEX2-OPTO00.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin den Pfad zum Heidelberg Eye Explorer Executable an:

```
ExecutablePath=C:\Heyex\  
ExecutableFileName=heyexrc.exe
```

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „HEYEX2.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Kopieren und editieren Sie die zusätzliche Konfigurationsdatei „HEYEX2-OPTO14-gdt-data.txt“. Über diese Datei kann der Standardtext geändert werden, welcher automatisch nach dem Starten einer Messung importiert wird.

Soll kein MD Eintrag generiert werden, bitte folgende Anpassung vornehmen:

1. Öffnen der Datei „HEYEX2-OPTO14.ini“
2. Editieren der Sektion

```
[Format]  
Import=NDD  
Export=GDT
```

Entfernen des „GDT“ Wertes.

3. Speichern der Datei



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass der Common Block der Geräte-INI-Datei unverändert bleibt. Bezeichner der Parameter „Name“ und „Model“ sind für die Art der Anbindung wichtig.

```
[Common]  
Name=Heidelberg  
Model=EYE EXPLORER HEYEX 2
```

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, für den gewählten Patient wird die Canon Software gestartet und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 10.05.22
15 Heidelberg HEYEX 2		
16		
17		
18		
19		
20		

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.26.74

Middleware Logs

Informationen

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medi...\medistar-heyex2.gdt
Datum	10.05.2022 10:13:47

Empfänger	HEYEX2
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	OPT014

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** die Patientendaten an die Heidelberg EYE EXPLORER - HEYEX 2 übergeben.

Die INI-Datei wird im angegebenen Pfad erstellt. Siehe „HEYEX2-OPT014.ini“.

Wird eine gültige Rückgabedatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten nun erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig. Der **GDT-Server** kann nun automatisch (sofern gestartet) die GDT-Importdatei einlesen und verarbeiten.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V9 XD:HEYEX2

V9 Aufnahme Heidelberg Eye Explorer HEYEX 2



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.