

Geräteanbindung

Huvitz HTR-1A



Dateiversion: 1.9.8.14
Erstellungsdatum: 20.03.2024
Letzte Aktualisierung: 06.05.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Deutsche Augenoptik AG
Ziegeleistraße 18-24
75417 Mühlacker
Deutschland

Telefonische Hotline
MO-FR 09:00 - 18:00 Uhr
Telefon + 49 (0) 7041/884-105

www.dao-ag.de
mail@dao-ag.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird per serieller Schnittstelle realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Hinweis: Alle Werte werden vom Gerät mit „führenden Nullen“ ausgegeben. Leider ist es nicht möglich, das Format auf nur eine Null zu ändern. In der Software des Gerätes dient dieser wohl als Platzhalter für höhere Werte wie z.B. -10,25dpt.

Einstellungen am Huvitz HTR-1A


Das Gerät muss per serieller Schnittstelle an den PC angeschlossen werden.

Per Default ist in der Geräte-Konfigurationsdatei eingestellt: 9600 / 8 / N / 1.


Für HRK-Daten gibt es zwei Protokolltypen. Wir nennen sie V1-Protokoll und V2-Protokoll. Wir verwenden hier das **V1-Protokoll**.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.

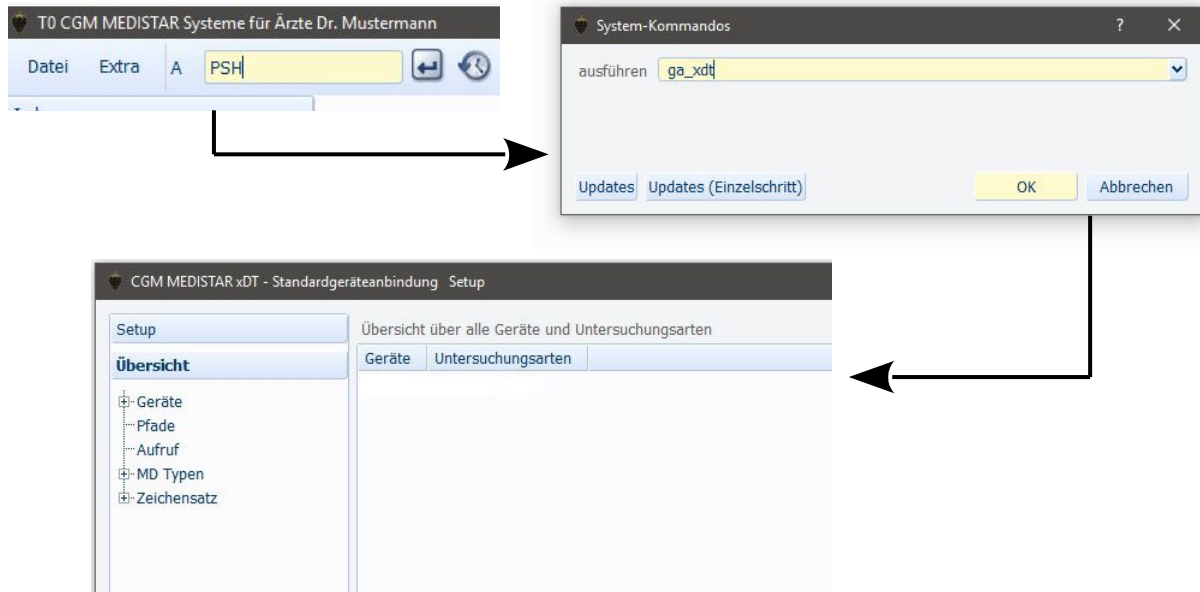

Huvitz HTR-1A → **GDT-ID / Geräte-ID ist HUHTR1A**

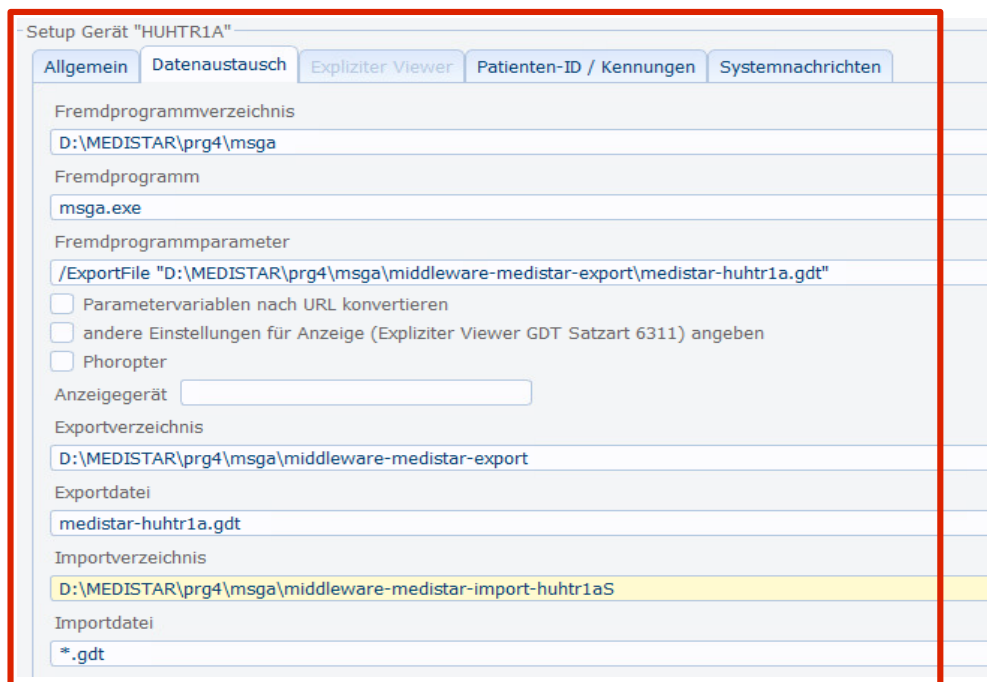

Der Gerätenamen (hier **HUHTR1A**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)" konfiguriert ist**, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "HUHTR1A"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | Patienten-ID / Kennungen | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218)

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316)

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät ist ein **Autorefraktometer**. Somit muss für das Gerät nur eine Untersuchungsart angelegt werden.

Erstellt werden muss „**OPT001**“ für **Autorefraktometer**.

Untersuchungsart

Export	Import
Standard	Standard
OPT001	OPT001

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:':

Abfrage Abrechnungskennzeichen

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis

Zeichensatz

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ GeräteName in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	☐
8432/8439	Verweis Messung	☐
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	Y
6220	Befund	☐
6221	Fremdbefund	☐
6227	Kommentar	V1
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	P
3622/3623	Grösse/Gewicht	☐
6330-6399	Freie Kategorien	☐
8410-8480	Werte	☐
	Arztkennezeichen	☐

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

MS3.IO XDT3

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
078	ExportIndex 6	1	
079	Menüpunkt7	***	Menüpunkt7
080	Label 7	Huwitz HTR-1A	Beschriftung
081	Name 7	HUHTR1A	Geraet
082	Untersart 7	OPT001	Untersuchungsart
083	Satzart 7	6302	Satzart
084	Ziffer 7		Leistung
085	Parameter 7		Ergänzung
086	Zeilentyp 7		zusätzl.Unters.arten
087	ExportIndex 7	1	
088	Menüpunkt8	***	Menüpunkt8
089	Label 8		Beschriftung
090	Name 8		Geraet
091	Untersart 8		Untersuchungsart
092	Satzart 8		Satzart
093	Ziffer 8		Leistung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **HUHTR1A**

Untersuchungsart: **OPT001**

Middleware Konfiguration und Schemadatei oder Skriptdatei:

HUHTR1A-OPT001.ini

HUHTR1A-OPT001-COM.psc

HUHTR1A-OPT001-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

HUHTR1A.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „HUHTR1A-OPT001.ini“ und „HUHTR1A-*.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „HUHTR1A-OPT001.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die Standard ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=  
COMEndMarker=
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen oder auf 0 setzen zum deaktivieren. Standard Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der **Timeout** erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „HUHTR1A.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled "Groth-Tonberg, Dr. Hans- 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there's a section labeled "XDT" with a yellow background. It contains a table with three columns: "XDT-Anbindung", "Version", and "Datum". The values are "7", "1.4", and "20.03.24" respectively. Below the table, there's a label "Auswahl:" followed by a dropdown menu. At the bottom, there are four buttons: "Eingabe", "Druckauftrag", "Drucken", and "Ende".

XDT-Anbindung	Version	Datum
7	1.4	20.03.24

Auswahl:

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.39.87". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a table with patient information. Below the table, there's a list of log entries, each starting with a checkmark and the text "ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen" through "ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen". The last entry is highlighted with a red box.

Informationen			
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-med...\medistar-huhr1a.gdt	Empfänger	HUHR1A
Datum	20.03.2024 11:30:30	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	OPT001

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Huvitz HTR-1A**“ warten. Das Gerät überträgt die **Messdatei** per serieller Schnittstelle, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei (Übertragung) gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V1 R.:S=- 4.75 Z=- 0.75* 3 PD= 68
V1 L.:S=- 3.75 Z=- 0.75* 14



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schema-/ Skriptdateien verwendet werden.