

# **Luneautech VX40 – Visionix**

## **Lensmeter**



<https://luneautech.de/>

|                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dateiversion:          | 1.9.0.29                                                                                                                                                      |
| Erstellungsdatum:      | 11.06.2019                                                                                                                                                    |
| Letzte Aktualisierung: | 27.11.2020                                                                                                                                                    |
| Autor:                 | <a href="mailto:kai.zirlewagen@team2work.de">kai.zirlewagen@team2work.de</a> / <a href="mailto:jochen.bittmann@team2work.de">jochen.bittmann@team2work.de</a> |

# Technischer Ansprechpartner

Luneau Technology Deutschland GmbH  
An der Pönt 62  
40885 Ratingen

T: +49 (0) 2102 / 48 277 0

E: [info@luneautech.de](mailto:info@luneautech.de)

W: <https://luneautech.de>

## Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA\_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird benötigt.

**Patientendaten** Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.


Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.




Abbildung 1: Bilder Copyright 2019 Luneau Technology Deutschland

# Einstellungen am Luneatech VX40 – Visionix


Verbindung kann auf das Gerät per RDP oder einer „Fernwartungssoftware“ hergestellt werden.

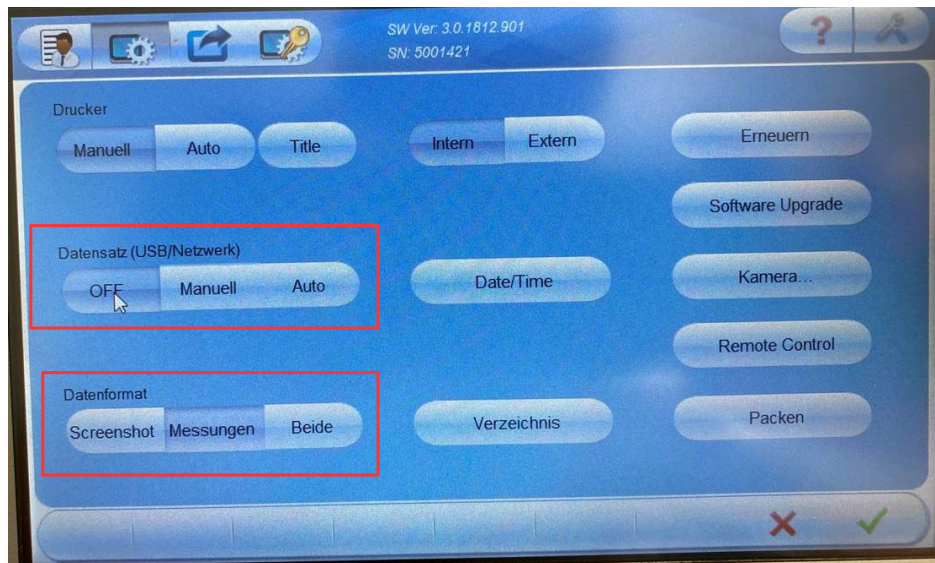


Für die Einstellungen „Datensatz“ gab es je nach Firmware und Gerätetyp unterschiedliche Einstellungen. Falls hier keine XML-Daten exportiert werden, folgende Einstellung versuchen.

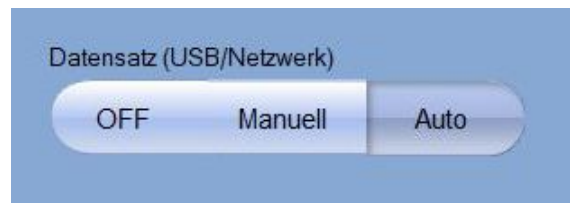

Über die „Protocol“ Einstellungen kann die Datenausgabe eingestellt werden.

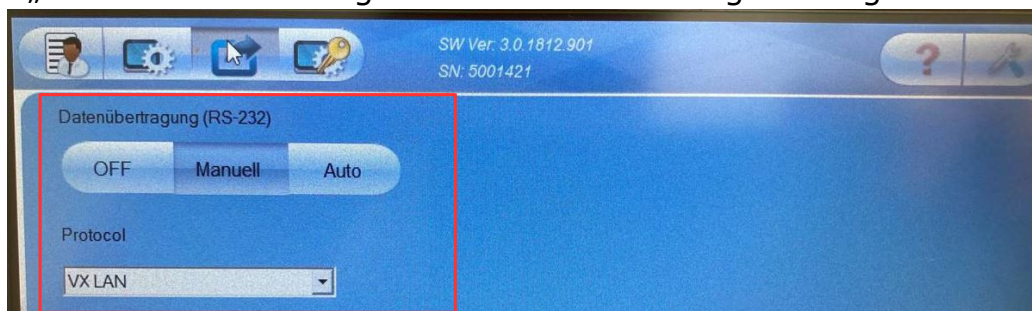

**i** Hinweis: Die Anbindung kann nur durchgeführt werden, wenn das Gerät in der Lage ist die Messung als \*.xml Datei abzuspeichern (Export). Werden die Messdaten wie folgt exportiert, müssen die Einstellungen angepasst werden.

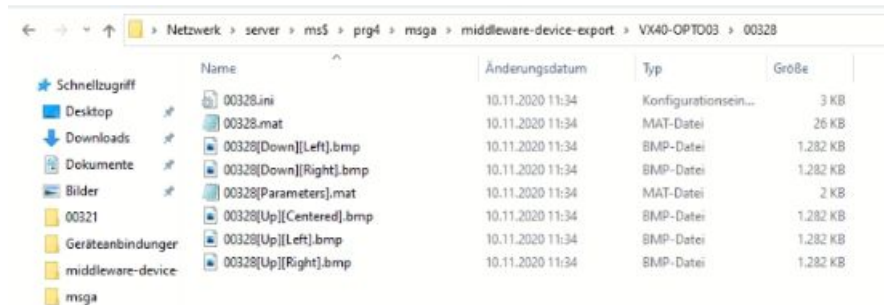


The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar path: Netzwerkk > server > ms\$ > prg4 > msga > middleware-device-export > VX40-OPTD03 > 00328. The left sidebar shows the folder structure, and the main pane displays a list of files with columns for Name, Änderungsdatum, Typ, and Größe.

| Name                    | Änderungsdatum   | Typ                  | Größe    |
|-------------------------|------------------|----------------------|----------|
| 00328.ini               | 10.11.2020 11:34 | Konfigurationsein... | 3 KB     |
| 00328.mat               | 10.11.2020 11:34 | MAT-Datei            | 26 KB    |
| 00328[Down][Left].bmp   | 10.11.2020 11:34 | BMP-Datei            | 1.282 KB |
| 00328[Down][Right].bmp  | 10.11.2020 11:34 | BMP-Datei            | 1.282 KB |
| 00328[Parameters].mat   | 10.11.2020 11:34 | MAT-Datei            | 2 KB     |
| 00328[Up][Centered].bmp | 10.11.2020 11:34 | BMP-Datei            | 1.282 KB |
| 00328[Up][Left].bmp     | 10.11.2020 11:34 | BMP-Datei            | 1.282 KB |
| 00328[Up][Right].bmp    | 10.11.2020 11:34 | BMP-Datei            | 1.282 KB |


Abbildung 2:

Sollte das Datenausgabeformat nicht passen, kann dies über die „Protocol“ Einstellung beeinflusst werden.

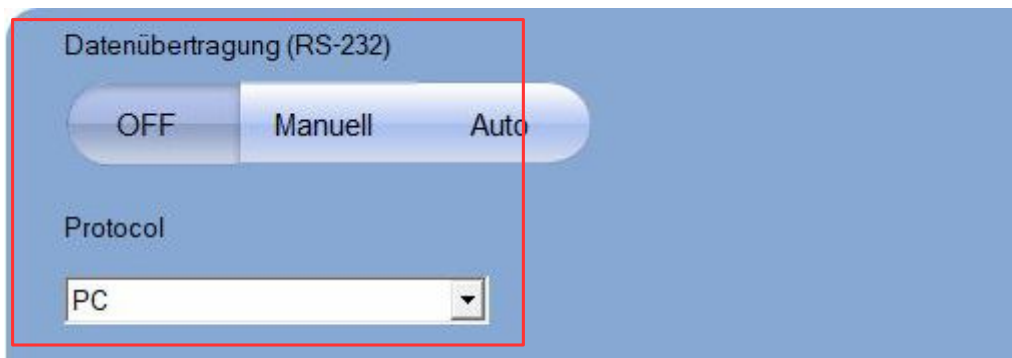


# CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga\_xdt**.

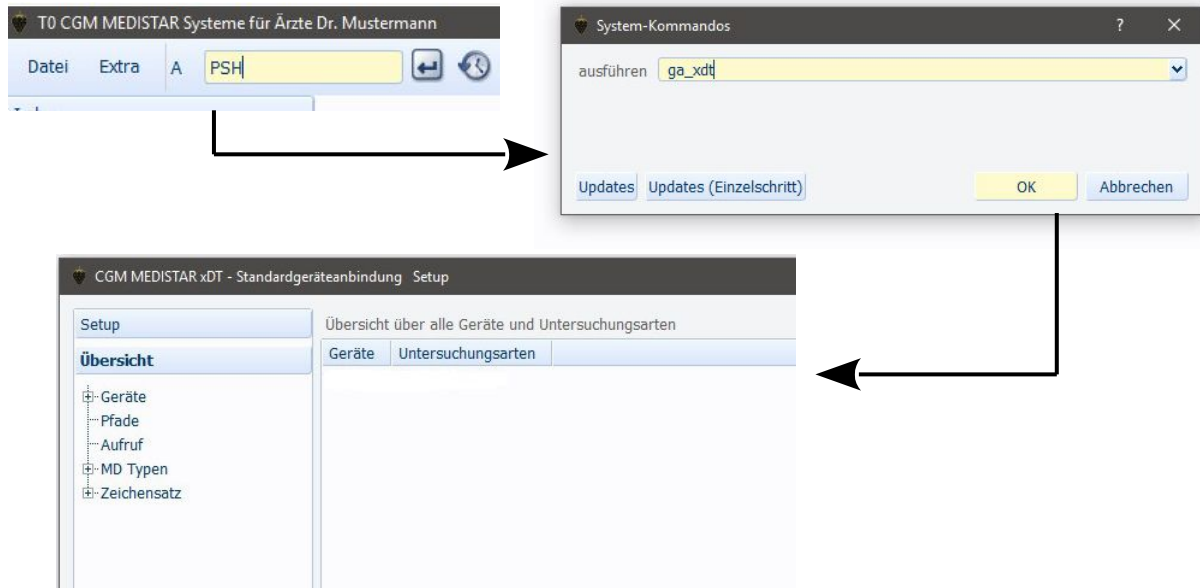

**VX40** → Luneatech VX40 (Visionix) → **GDT-ID / Geräte-ID ist VX40**

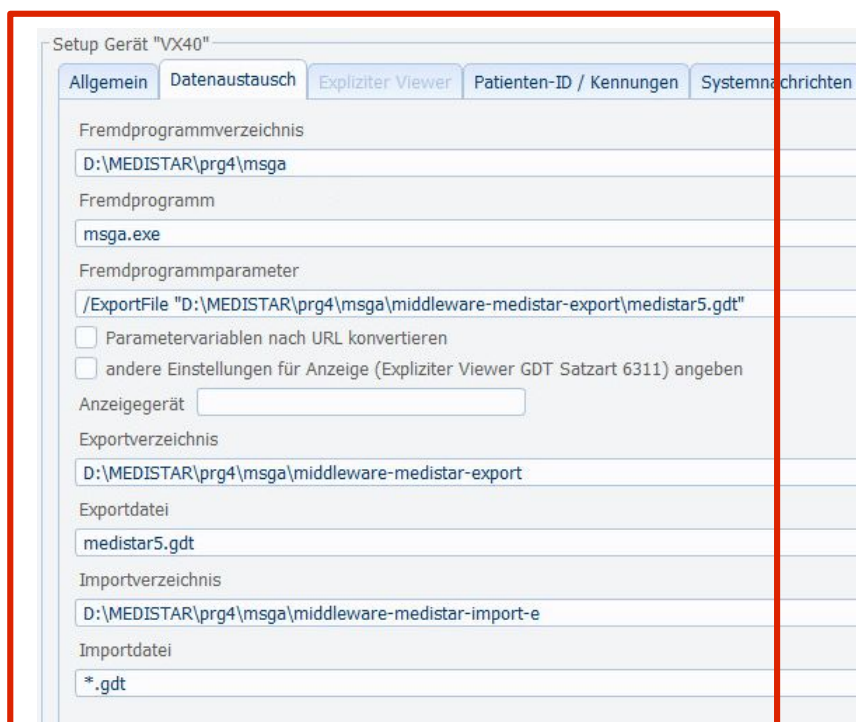

Der Gerätenamen (hier **VX40**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.



Setup Gerät "VX40"

Allgemein   Datenaustausch   Expliziter Viewer   **Patienten-ID / Kennungen**   Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)  Pat.Nr. "123"   
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)  Pat.Nr. "123"   
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**   
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1   
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **VX40**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Setup Gerät "VX40" Untersuchungsart "LM01"

Export   **Import**   MD-Eintrag   Externe Verknüpfungen   Zusatzeinträge   Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**   
☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung   
 Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM   
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "VX40" Untersuchungsart "LM01"

Export   Import   **MD-Eintrag**   Externe Verknüpfungen   Zusatzeinträge   Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen  
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen   
 Zeichensatz **Windows**   
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

**Zeichensatz** der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Setup Gerät "VX40" Untersuchungsart "LM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

| Feldkennung     | Art der Daten    |    |
|-----------------|------------------|----|
| 6200/6201       | Verweis          | V0 |
| 8432/8439       | Verweis Messung  | V0 |
| 6302-6305       | Verweis Link     | V0 |
| 6205            | Diagnose         | V0 |
| 6220            | Befund           | V0 |
| 6221            | Fremdbefund      | V0 |
| 6227            | Kommentar        | V0 |
| 6228            | Ergebnis         | V0 |
| 8990            | Signatur         | V0 |
| 3622/3623       | Grösse/Gewicht   | V0 |
| 6330-6399       | Freie Kategorien | V0 |
| 8410-8480       | Werte            | V0 |
| Arztkennzeichen |                  |    |

Setup Gerät "VX40" Untersuchungsart "LM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätenamen in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPT003** oder alternativ nicht GDT Standard LM01

## Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

| Nr  | Symbol Name   | Symbol Definition | Kommentar             |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|
| 065 | Satzart 5     | 6302              | Satzart               |
| 066 | Ziffer 5      |                   | Leistung              |
| 067 | Parameter 5   |                   | Ergänzung             |
| 068 | Zeilentyp 5   |                   | zusätzl. Unters.arten |
| 069 | ExportIndex 5 | 1                 |                       |
| 070 | Menüpunkt 6   | ***               | Menüpunkt 6           |
| 071 | Label 6       | Luneatech VX40    | Beschriftung          |
| 072 | Name 6        | VX40              | Gerät                 |
| 073 | Untersart 6   | OPT003            | Untersuchungsart      |
| 074 | Satzart 6     | 6302              | Satzart               |
| 075 | Ziffer 6      |                   | Leistung              |
| 076 | Parameter 6   |                   | Ergänzung             |
| 077 | Zeilentyp 6   |                   | zusätzl. Unters.arten |
| 078 | ExportIndex 6 | 1                 |                       |
| 079 | Menüpunkt 7   | ***               | Menüpunkt 7           |
| 080 | Label 7       | Nidek NT-530P     | Beschriftung          |

# Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **VX40**

Untersuchungsart: **OPT003**

## Middleware Konfiguration und PascalScript-Datei (PSC):

VX40-OPT003.ini

VX40-OPT003-PARSE-DATA.psc

## Middleware Lizenzdatei:

VX40.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „VX40-OPT003.ini“ und „VX40-OPT003-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „VX40-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „VX40.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.



## Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. Inside, there's a yellow box labeled 'XDT' containing a table with the following data:

|               |             |                 |
|---------------|-------------|-----------------|
| XDT-Anbindung | Version 1.4 | Datum: 11.06.19 |
|---------------|-------------|-----------------|

Below the table, the text '6 Luneatech VX40' is displayed and highlighted with a red rectangle.

The screenshot shows the 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.1.34' application. It has two tabs: 'Middleware' and 'Logs'. The 'Middleware' tab is active, showing a table with the following information:

|           |                                                               |                  |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Dateiname | D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-ex...\medistar5.gdt | Empfänger        | VX40 |
| Datum     | 24.10.2019 16:52:50                                           | Patienten-ID     | 1    |
|           |                                                               | Untersuchungsart | LM01 |

Below the table, there is a list of status messages, each preceded by a checkmark, indicating successful completion of steps 1 through 9. The final step, 'SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)', is highlighted with a red rectangle.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „Luneatech VX40 - Visionix“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die **Messung** des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden.


Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

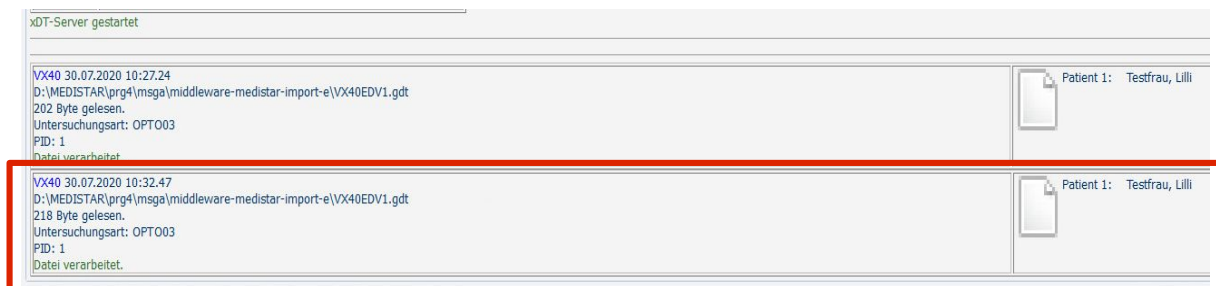

# Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V0 XD:VX40
V0 R.:S=+ 0.75 Z=+ 0.00* 0          A=+ 2.50
V0 L.:S=+ 0.75 Z=+ 0.00* 0          A=+ 2.50 P= 1.75 B= 263
```

## Anpassung des MD-Rückeintrag

Verwende "True", damit der A Wert an die V0 Zeile angehängt wird, auch wenn kein Wert in der Messung vorhanden ist  
In diesem Fall wird der A Wert mit "A=" eingetragen  
benutze "False", damit der A Wert nur dann an die V0 Zeile angehängt wird, wenn auch tatsächlich ein Wert in der messung vorhanden ist  
`bolAddAValueToOutputIfEmpty := False;`

Verwende "True", damit jeder GDT Zeile das Prefix aus GDT\_LINE\_PREFIX vorangestellt wird,  
benutze "False", damit das GDT-Zeilen-Prefix ignoriert wird  
`bolAddGDTLinePrefix:= False;`

Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er vom Gerät kommt  
`bolAddSign:= True;`

Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus GDT\_SIGN\_SEPARATOR angefügt wird,  
benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert eingefügt wird  
`bolAddSignSeparator:= True;`

Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,  
benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird  
`bolAddAxisSeparator:= True;`

Verwende "True", damit das A-Prefix angefügt wird,  
benutze "False", damit das A-Prefix nicht verwendet wird  
`bolAddAPrefix:= True;`

Verwende "True", damit das Prisma (P- und B-Werte) angefügt wird,  
benutze "False", damit das Prisma (P- und B-Werte) nicht verwendet wird  
`bolAddPrism:= True;`

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.