

Geräteanbindung OCULUS/NIDEK NT-1



Dateiversion: 1.9.8.14
Erstellungsdatum: 29.06.2023
Letzte Aktualisierung: 30.06.2023
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am Gerät

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.


3.1 Device Settings

3.1.1 Setting the device transmission

Set the communication and connection settings of the device based on the information of "2.3.3 Confirming items necessary for other settings" (page 29).

◆ Displaying settings screen

- 1 Press  on the home screen.
- 2 Press the desired button from the menu.

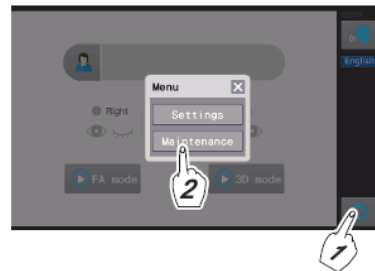

Button	Description
[Settings]	The settings screen is displayed. The parameters for measurement, printing, communication (data), and such are set. "3.1.2 Parameter items" (page 40)
[Maintenance]	The maintenance screen is displayed. The connection with external devices, time setting, and such are set. "3.1.3 Maintenance menu" (page 42)


3.1.2 Parameter items

Some items are not displayed depending on the type of the device.

Press the button for each item to change the setting.


Communication is set here.

Underlined options indicate factory settings.

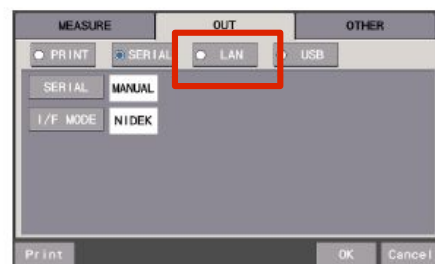


CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.

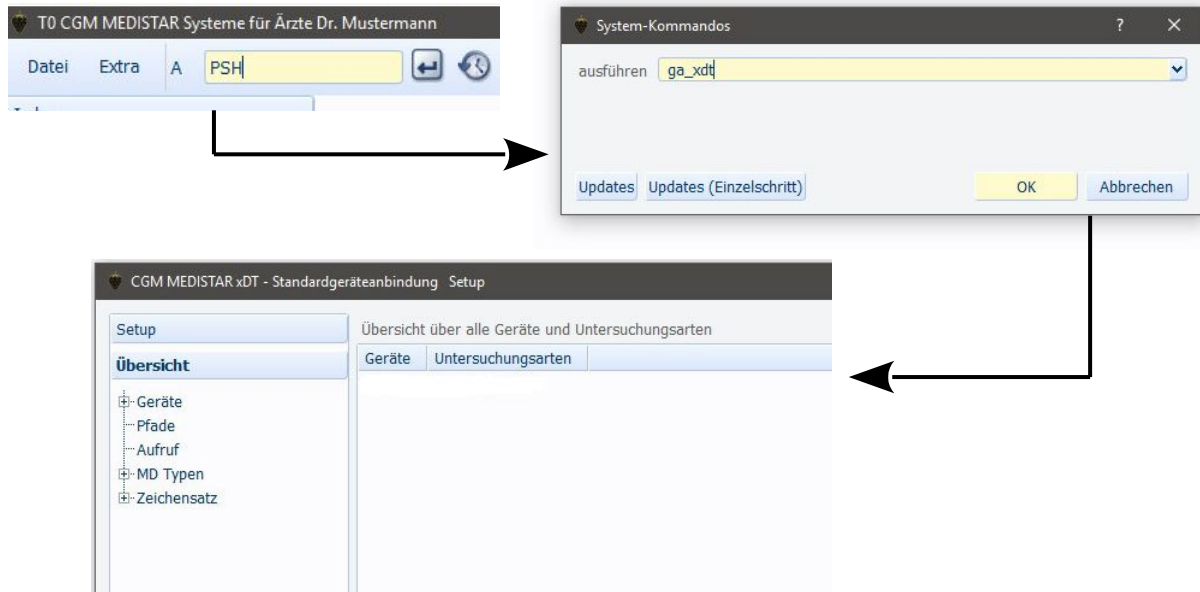

OCULUS/NIDEK NT-1 → **GDT-ID / Geräte-ID ist NT1**

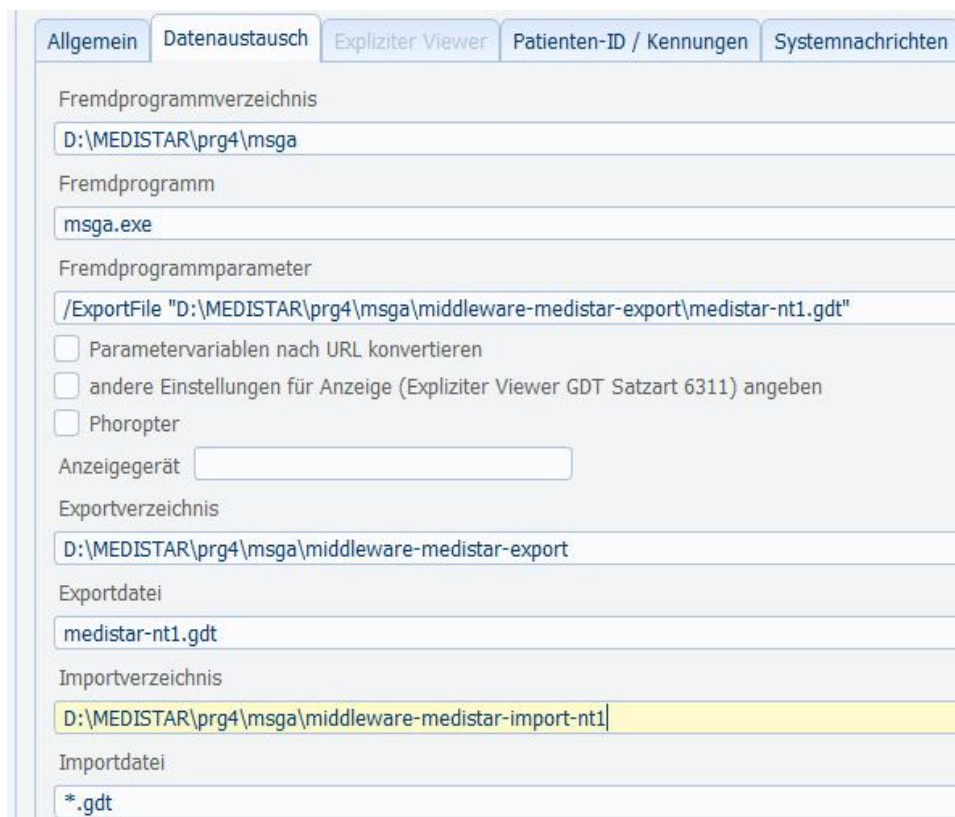

Der Gerätenamen wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

The screenshot shows the 'Patienten-ID / Kennungen' tab. The 'Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)' field is highlighted with a red box and contains the value 'NT1'. Other fields include 'Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)', 'Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)', 'Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218)' with value '02.10', 'Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316)' with value 'EDV1', and 'Importformat führende Nullen unterdrücken' checkbox.

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart: OPT006

Die Einstellungen für „Export“ und „Import“ unterscheiden sich nicht.

The screenshot shows the 'Export' tab. The 'Zeichensatz' dropdown is highlighted with a red box and contains the value 'Windows'. Other fields include 'Größe/Gewicht exportieren' checkbox, 'Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:'' with value 'Behandlung+Messung', 'Abfrage Abrechnungskennzeichen' with value 'Nur EBM', and 'Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten' checkbox.

The screenshot shows the 'Import' tab. The 'Untersuchungsart eintragen' and 'Untersuchungsdatum eintragen' checkboxes are highlighted with a red box. Other fields include 'Zeitangaben in MD-Verweis' with value 'Messung vorziehen', 'Zeichensatz' with value 'Windows', 'Doppelte Einträge vermeiden' checkbox, 'Reihenfolge der Einträge' text box, and 'Sonderzeichenumwandlung' text box.

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen. Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6228, 6227 und 6302 – 6305** eingetragen werden.

The image contains two screenshots of a software interface. The left screenshot shows a table with two columns: 'Feldkennung' and 'Art der Daten'. A red box highlights the 'Art der Daten' column for field numbers 6200-6201, 8432-8439, 6302-6305, 6205, 6220, 6221, 6227, 6228, 8990, 3622-3623, 6330-6399, and 8410-8480. The values in this column are 'Verweis', 'Verweis Messung', 'Verweis Link', 'Diagnose', 'Befund', 'Fremdbefund', 'Kommentar', 'Ergebnis', 'Signatur', 'Grösse/Gewicht', 'Freie Kategorien', and 'Werte' respectively. The right screenshot shows a list of checkboxes under the 'Externe Verknüpfungen' tab. A red box highlights the first six checkboxes, which are all checked: 'Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)', 'Gerätename in Kommentar', 'Untersuchungsart in Kommentar', 'Linkangaben in Kommentar (6303/6304)', 'Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)', and 'Dateien nach PDaten verschieben'. The seventh checkbox, 'Relative Pfadangabe', is unchecked.


Feldkennung	Art der Daten
6200/6201	Verweis
8432/8439	Verweis Messung
6302-6305	Verweis Link
6205	Diagnose
6220	Befund
6221	Fremdbefund
6227	Kommentar
6228	Ergebnis
8990	Signatur
3622/3623	Grösse/Gewicht
6330-6399	Freie Kategorien
8410-8480	Werte
	Arztkennzeichen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **P** (Tonometer) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N** (**oder alternativ Y**) wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

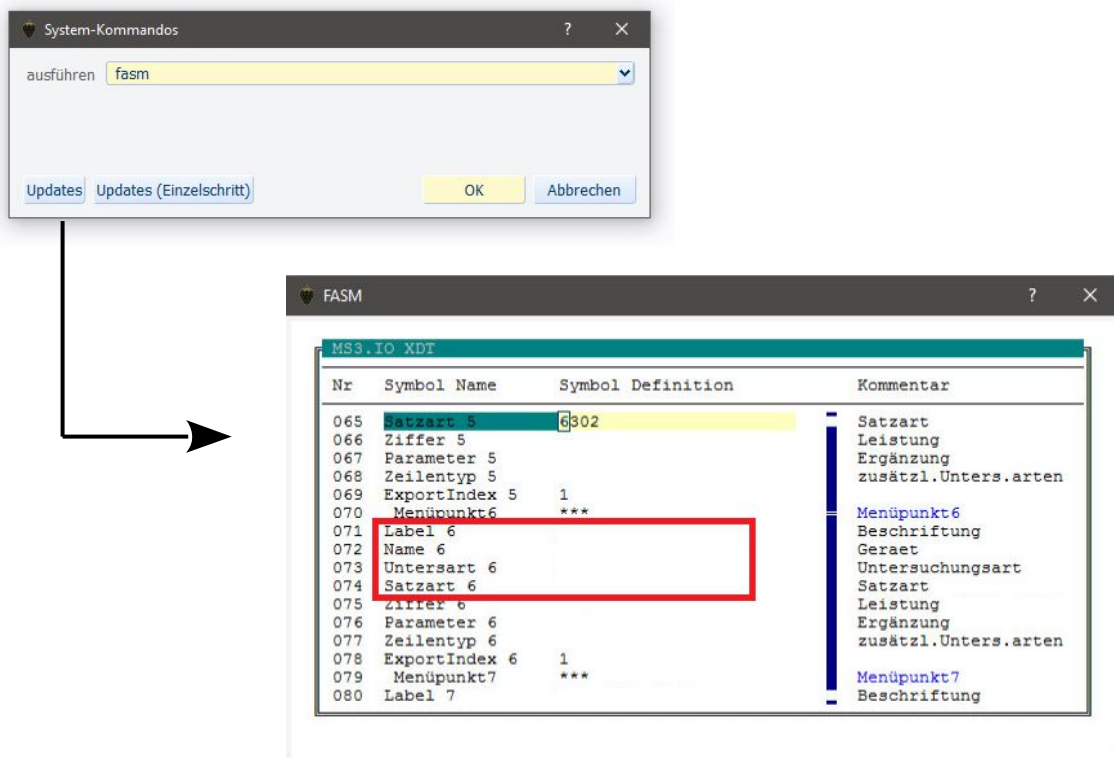

Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: NIDEK NT-1
Name: NT1
Untersart: OPTO06
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **NT1**

Untersuchungsart: **OPT006**

Middleware Konfigurationsdateien:

NT1-OPT006.ini

NT1-OPT006-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

NT1.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „NT1-OPT006.ini“ und „NT1-OPT006-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „NT1-OPT006.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „NT1.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden (je nach Geräteoption).

siehe „NT1-OPT006.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\NT1-OPT006\TXT\  
ExternalFilePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\NT1-OPT006\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\RKT\TXT\“

ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis„..\RKT\JPG\“

 **Hinweis:** Bitte darauf achten, dass die Pfade mit „\“ (Backslash) abschließen. Die Verzeichnisüberwachung benötigt den „letzten“ Backslash.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The image shows two overlapping application windows. The top window, titled 'XDT', has a yellow background and contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum:
2 NIDEK NT-	1.4	24.06.20

The bottom window, titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.7.54 - DEBUG', has a dark header and a light body. It features a 'Middleware' tab and a 'Logs' section. The 'Informationen' section displays the following details:


Informationen	Empfänger
Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-e...	Patienten-ID: 1
Datum: 24.06.2020 11:45:20	Untersuchungsart: OPT006

Below this, a list of status messages shows steps 1 through 9 as 'ERFOLG: SCHRITT [X] erfolgreich abgeschlossen'. The final entry, 'SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)', is highlighted with a red box.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messungsdatei (Netzwerk) gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

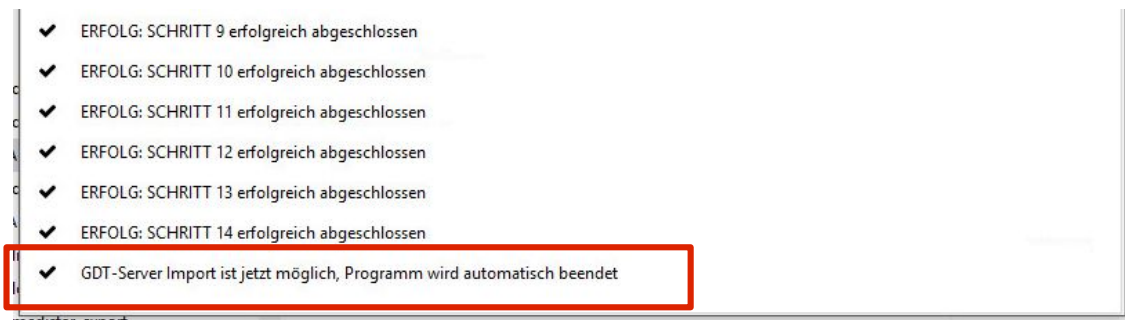

Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell ausgewählten Patient zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

N PL: 553 554 552 [553] mm

N PR: 551 551 552 [551] mm

P R = 17 16 16 [16.3] // L = 17 16 16 [16.3] mmHg 10:12

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xsl). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGA\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000060}NT1 OPT006 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist. Kann dies nicht sichergestellt werden, sollte dieses Feature ausgeschaltet werden.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Verarbeitungsdateien verwendet werden.