

Geräteanbindung OCULUS/NIDEK NT-1P



Dateiversion: 1.9.8.16
Erstellungsdatum: 29.06.2023
Letzte Aktualisierung: 30.04.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am Gerät

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.


3.1 Device Settings

3.1.1 Setting the device transmission

Set the communication and connection settings of the device based on the information of "2.3.3 Confirming items necessary for other settings" (page 29).

◆ **Displaying settings screen**

- 1 Press  on the home screen.
- 2 Press the desired button from the menu.

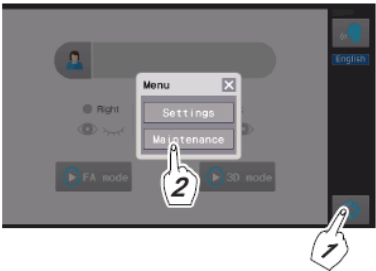

Button	Description
[Settings]	The settings screen is displayed. The parameters for measurement, printing, communication (data), and such are set. "3.1.2 Parameter items" (page 40)
[Maintenance]	The maintenance screen is displayed. The connection with external devices, time setting, and such are set. "3.1.3 Maintenance menu" (page 42)


3.1.2 Parameter items

Some items are not displayed depending on the type of the device.

Press the button for each item to change the setting.


Communication is set here.

Underlined options indicate factory settings.

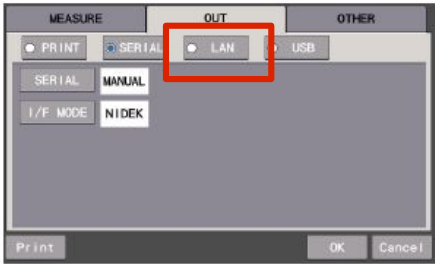

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.

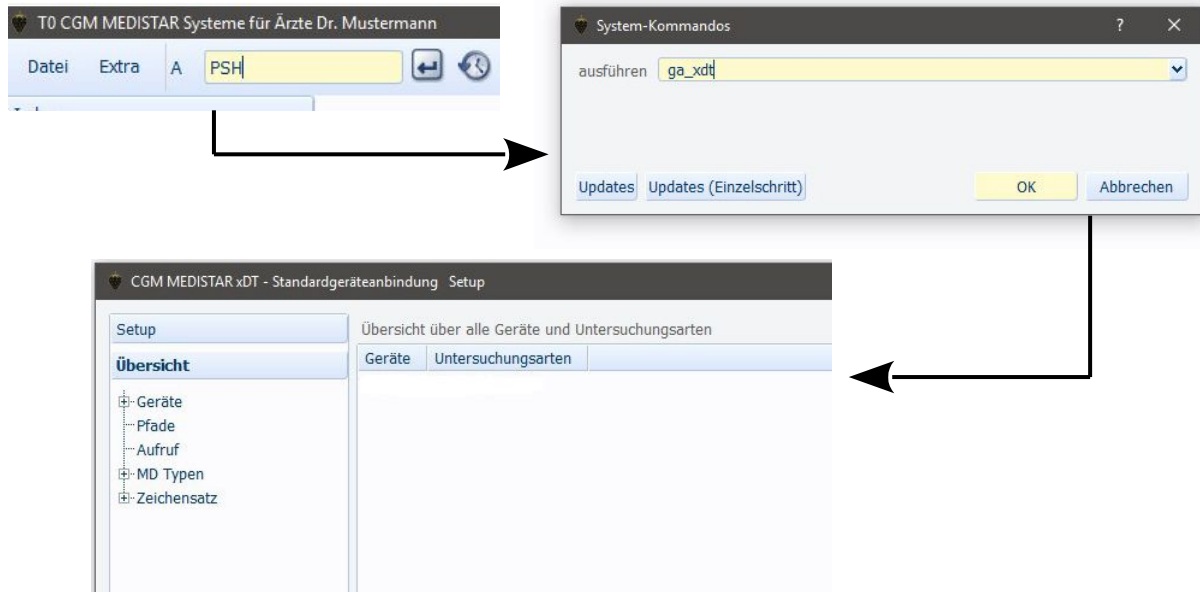

OCULUS/NIDEK NT-1P → **GDT-ID / Geräte-ID ist NT1P**

The screenshot shows the 'Setup Gerät "NT1P"' configuration window. The 'Allgemein' tab is selected. The configuration fields are as follows:

- Fremdprogrammverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm: msga.exe
- Fremdprogrammparameter: /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-nt1p.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- ☐ Phoropter
- Anzeigegerät: [Empty text box]
- Exportverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei: medistar-nt1p.gdt
- Importverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-nt1p
- Importdatei: *.gdt

Der Gerätenamen wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

Setup Gerät "NT1P"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) NT1P

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart: OPT006

Die Einstellungen für „Export“ und „Import“ unterscheiden sich nicht.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen ▼

Zeichensatz Windows ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen. Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6228, 6227 und 6302 – 6305** eingetragen werden.

The left screenshot shows the 'MD-Eintrag' tab with a table of field mappings. The right screenshot shows the 'Externe Verknüpfungen' tab with a list of checkboxes.

Feldkennung	Art der Daten
6200/6201	Verweis
8432/8439	Verweis Messung
6302-6305	Verweis Link
6205	Diagnose
6220	Befund
6221	Fremdbefund
6227	Kommentar
6228	Ergebnis
8990	Signatur
3622/3623	Grösse/Gewicht
6330-6399	Freie Kategorien
8410-8480	Werte
	Arztkennzeichen


The right screenshot shows the 'Externe Verknüpfungen' tab with a list of checkboxes:

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätenamen in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDate verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **P** (Tonometer) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N** (oder alternativ **Y**) wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

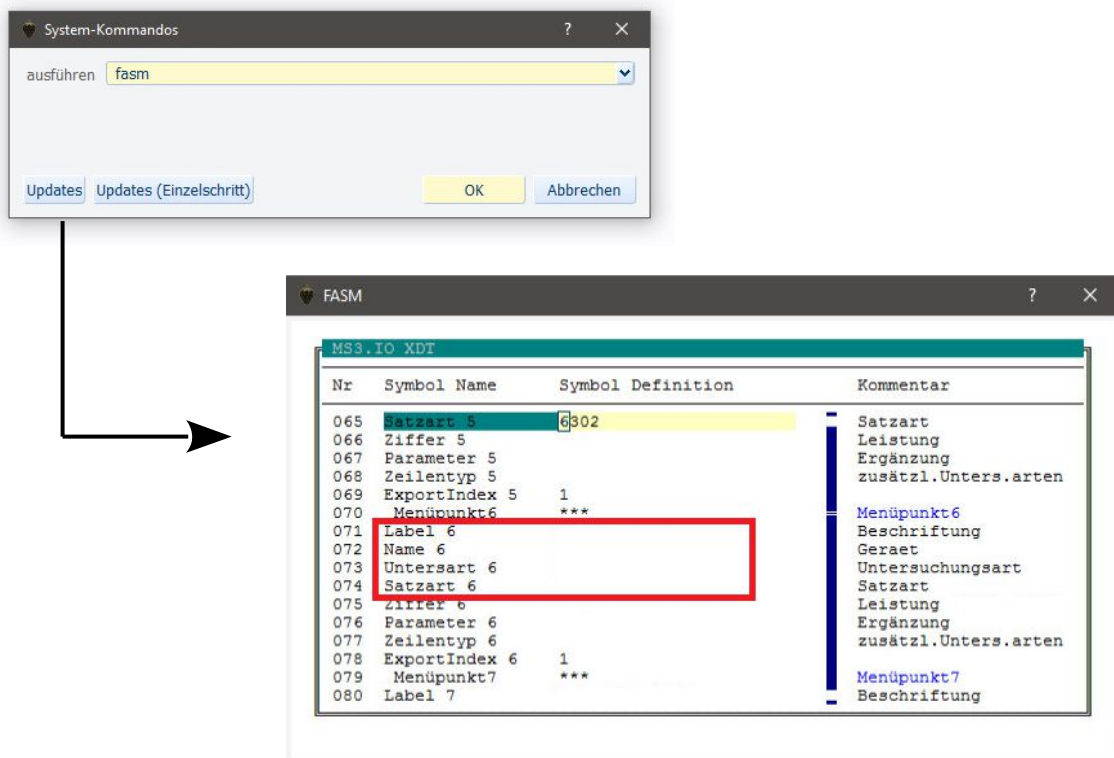

Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: NIDEK NT-1P
Name: NT1P
Untersart: OPTO06
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **NT1P**

Untersuchungsart: **OPT006**

Middleware Konfigurationsdateien:

NT1P-OPT006.ini

NT1P-OPT006-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

NT1P.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „NT1P-OPT006.ini“ und „NT1P-OPT006-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „NT1P-OPT006.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „NT1P.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden (je nach Geräteoption).

siehe „NT1P-OPT006.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\NT1P-OPT006\TXT\  
ExternalFilePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\NT1P-  
OPT006\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\RKT\TXT\“

ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis „..\RKT\JPG\“

 **Hinweis:** Bitte darauf achten, dass die Pfade mit „\“ (Backslash) abschließen. Die Verzeichnisüberwachung benötigt den „letzten“ Backslash.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The image shows two overlapping application windows. The top window, titled 'XDT', has a yellow background and contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum:
2 NIDEK NT-	1.4	24.06.20

The bottom window, titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.7.54 - DEBUG', has a dark header and a light body. It features a 'Middleware' tab and a 'Logs' section. The 'Informationen' section displays the following details:


Informationen	Empfänger
Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-e...	Patienten-ID: 1
Datum: 24.06.2020 11:45:20	Untersuchungsart: OPT006

Below this, a list of logs shows steps 1 through 9 as 'ERFOLG: SCHRITT [X] erfolgreich abgeschlossen'. Step 10 is currently active and highlighted with a red box, showing a status icon and the text: 'SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)'.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messungsdatei (Netzwerk) gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

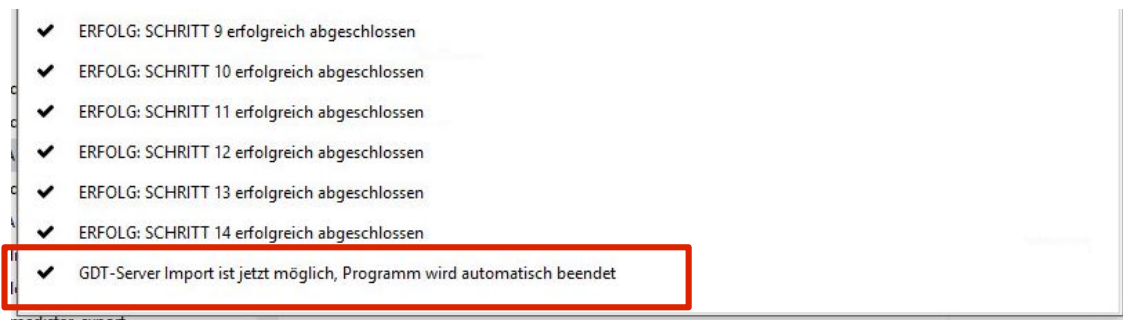

Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell ausgewählten Patient zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

N PR: 631 628 627 [629] mm
N PL: 614 611 [613] mm
P R = 12 [12.0] // L = 15 [15.0] mmHg 11:06
Y PR: Gemessen = 12.0 mmHg; Korrigiert = 08.8 mmHg
Y PR: Param1 = 550um; Param2 = 0.0400; CCT = 629um
Y PL: Gemessen = 15.0 mmHg; Korrigiert = 12.5 mmHg
Y PL: Param1 = 550um; Param2 = 0.0400; CCT = 613um

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xsl). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1  
AddMeasureFileStyleSheet=1  
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1  
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGA\  
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000060}NT1P OPT006 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist. Kann dies nicht sichergestellt werden, sollte dieses Feature ausgeschaltet werden.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Verarbeitungsdateien verwendet werden.