

Geräteanbindung

Reichert LensChek Plus

Lensmeter



Dateiversion: 1.9.8.12
Erstellungsdatum: 30.01.2020
Letzte Aktualisierung: 04.02.2020
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

AMETEK GmbH
Reichert Business Unit
Carl-von-Linde-Strasse 42
85716 Unterschleissheim / München
Germany

Tel: +49 (89) 315 8911 0
Fax: +49 (89) 315 891 99
e-mail: info@ametek.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über die serielle Schnittstelle und z.B. der Reichert Capture Software realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am Reichert LensChek Plus

Damit das Gerät die Messung auch nur einmal überträgt muss die Einstellung **AutoComm** auf AUS gestellt werden. Sonst wird die Messung dauerhaft an den PC geschickt.

Konfig 2 / 4

Prisma	Aus	X-Y	P-B
Prisma (mm)	Aus	Ein	
Abbe	20	30	40 50 60
Ray	e	d	
Ausgabemed	Drucker	RS232C	Beide
Auto Comm	Aus	Ein	
Baudrate	115200	38400	9600
Prog. Graph	Aus	Ein	
Graph druck.	Aus	Ein	

↓ ↑ ← → ✓



Installation Reichert Software

Für die Anbindung des Gerätes wird benötigt die [ReichertCapture EMR Interface Software](#). Download über die Geräte-Produktseite [Reichert LensChek Plus](#).

Das Gerät wird per serieller Schnittstelle an einen Windows PC angeschlossen. Installieren Sie die ReichertCapture EMR Interface Software auf diesem PC. Die Software muss ständig gestartet sein, damit Messungen verarbeitet werden können.


Installation

Ausführen der Datei

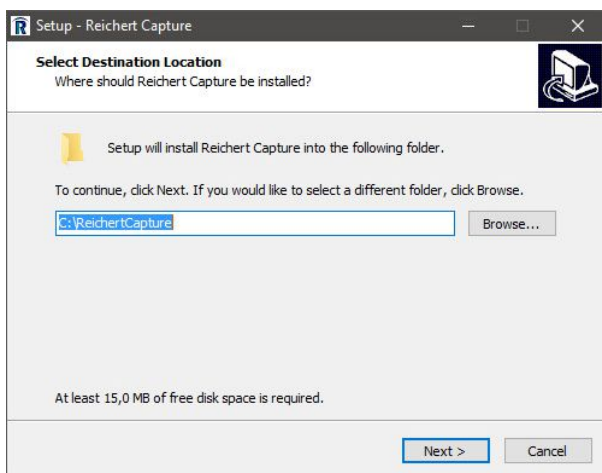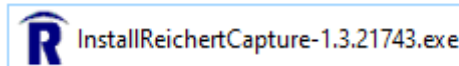


Installieren Sie die Anwendung mit allen Standardangaben. Weiterhin platzieren Sie die Programmverknüpfung in den Windows Autostart. Die Anwendung muss dauerhaft gestartet sein, sonst können die Daten nicht weiterverarbeitet werden.

Starten Sie die Anwendung „Reichert Capture“.

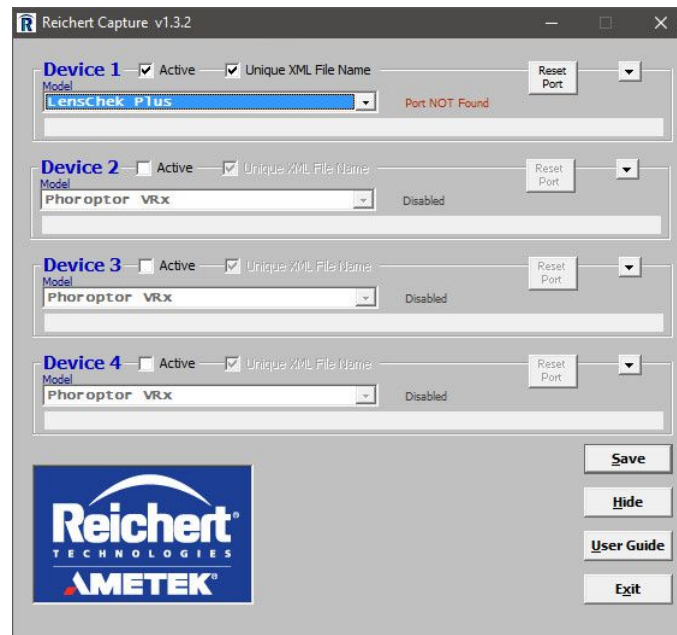

Die Anwendung muss nun auf das anzubindende Gerät eingestellt werden. Wählen Sie das Gerät „LensCheck Plus“ aus und konfigurieren Sie die notwendigen Parameter. Hier rot markiert.

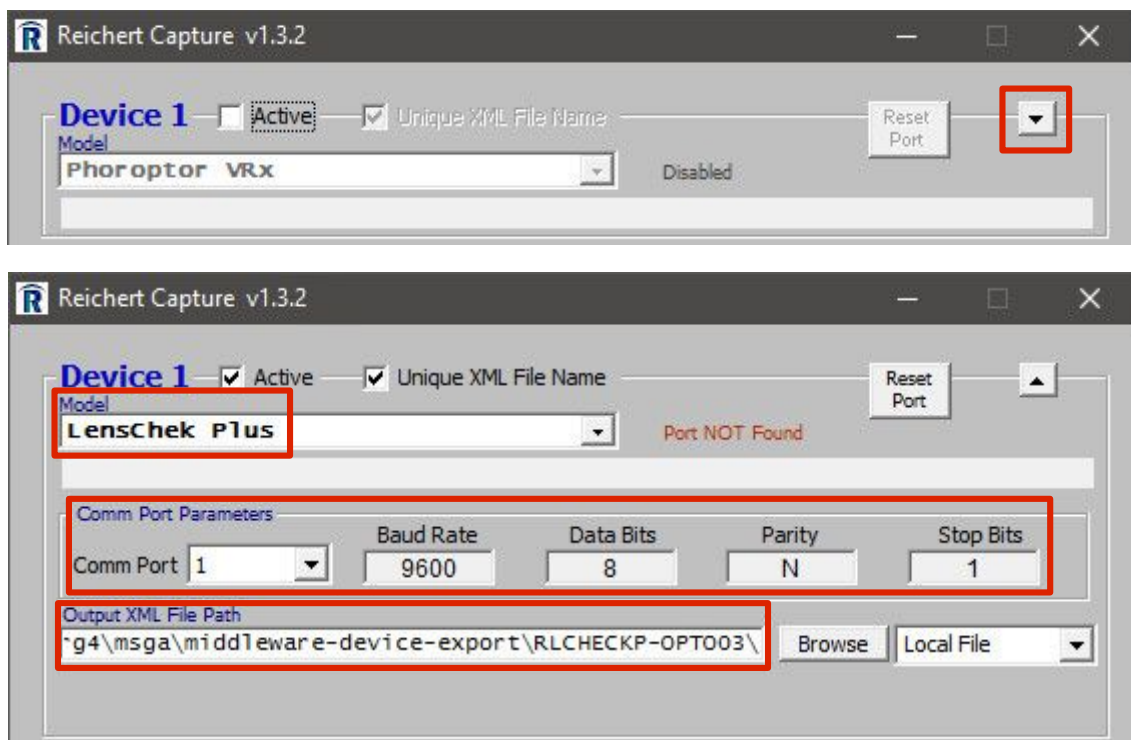


vollständiger Pfad (Ordner muss manuell erstellt werden):

D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\RLCHECKP-OPT003\


Der „Output XML File Path“ muss sich mit dem Import XML Pfad der Middleware Anwendung decken. Anschließend über die Schaltfläche „Save“ die Einstellungen speichern.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.

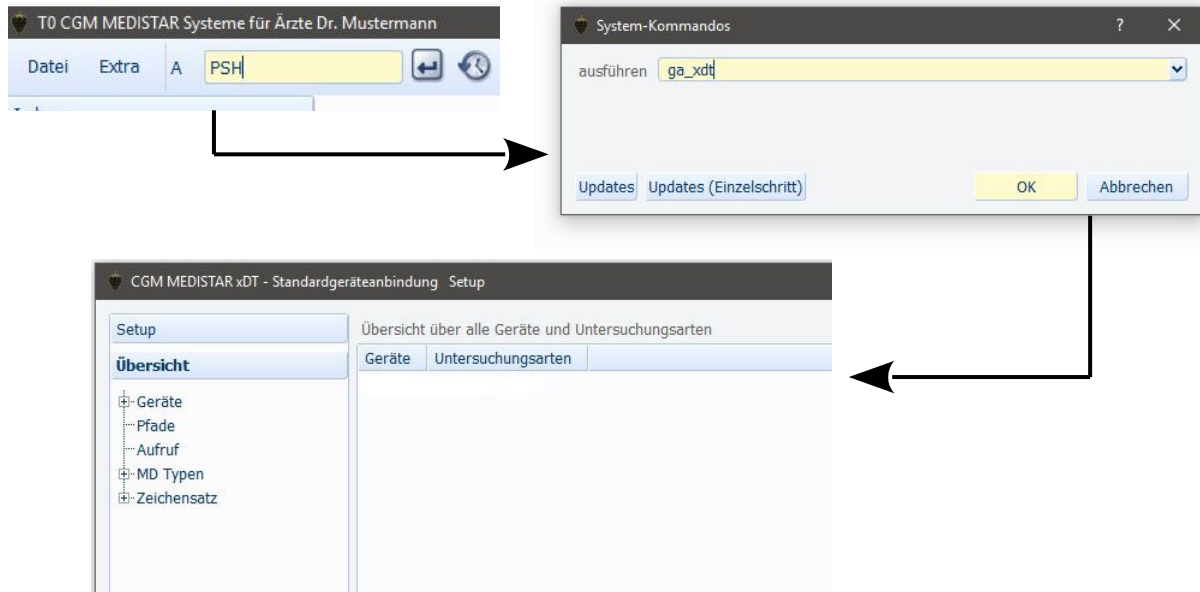

Reichert LensChek Plus → **GDT-ID / Geräte-ID ist RLCHECKP**

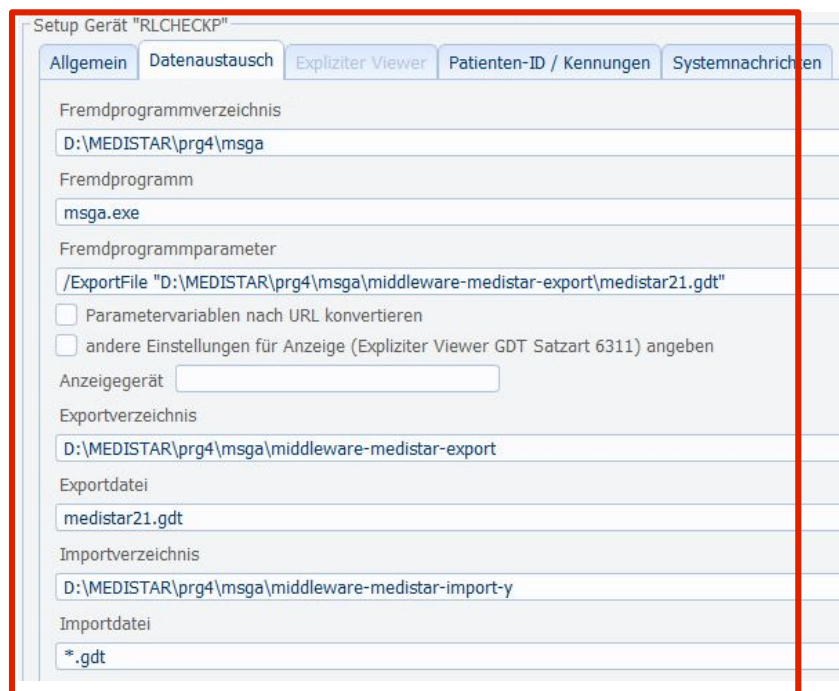

Der Gerätenamen (hier **RLCHECKP**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den Austausch-verzeichnissen. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "RLCHECKP"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer Patienten-ID / Kennungen Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) RLCHECKP

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPTO03, alternativ **LENSM01** (nicht GDT-Standard).

Setup Gerät "RLCHECKP" Untersuchungsart "OPTO03"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:.' Behandlung+Messung ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "RLCHECKP" Untersuchungsart "OPTO03"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen ▼

Zeichensatz Windows ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Setup Gerät "RLCHECKP" Untersuchungsart "OPT003"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	☐
8432/8439	Verweis Messung	☐
6302-6305	Verweis Link	☐
6205	Diagnose	☐
6220	Befund	☐
6221	Fremdbefund	☐
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	V0
8990	Signatur	☐
3622/3623	Grösse/Gewicht	☐
6330-6399	Freie Kategorien	☐
8410-8480	Werte	☐
	Arztkennzeichen	☐

Setup Gerät "RLCHECKP" Untersuchungsart "OPT003"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ GeräteName in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
175	Parameter 17		Ergänzung
176	Zeilentyp 17		zusätzl. Unters. arten
177	ExportIndex 17	1	
178	Menüpunkt18	***	Menüpunkt18
179	Label 18	Reichert LensCheck Plus	Beschriftung
180	Name 18	RLCHECKP	Geraet
181	Untersart 18	OPT003	Untersuchungsart
182	Satzart 18	6302	Satzart
183	Ziffer 18		Leistung
184	Parameter 18		Ergänzung
185	Zeilentyp 18		zusätzl. Unters. arten
186	ExportIndex 18	1	
187	Menüpunkt19	***	Menüpunkt19
188	Label 19		Beschriftung
189	Name 19		Geraet
190	Untersart 19		Untersuchungsart

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **RLCHECKP**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

RLCHECKP-OPT003.ini

RLCHECKP-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

RLCHECKP.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „RLCHECKP-OPT003.ini“ und „RLCHECKP-OPT003-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „RLCHECKP-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „RLCHECKP.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The image shows two overlapping application windows. The top window, titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse', is the 'XDT' application. It has a yellow background and contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum
	1.4	30.01.20

Below the table, there is a red-bordered box containing the text 'Reichert LensCheck Plus' on line 18, with lines 19 and 20 empty. At the bottom of the window, there is an 'Auswahl:' label and a small input field. The bottom window is titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.4.44'. It has a 'Middleware' tab selected. The 'Informationen' section shows:

Empfänger	RLCHECKP
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	OPT003

Below this, there is a list of seven status messages, all marked with a checkmark and 'ERFOLG: SCHRITT' followed by a number from 1 to 7, all indicating 'erfolgreich abgeschlossen'.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Reichert LensChek Plus**“ warten.

Das Gerät überträgt die **Messdatei** per serieller Schnittstelle, die Anwendung ReichertCapture EMR Interface Software speichert die Messung auf dem lokalen Datenträger ab. Die **Middleware** überwacht das konfigurierte Verzeichnis und verarbeitet die Messung sobald sie gespeichert worden ist.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.


Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

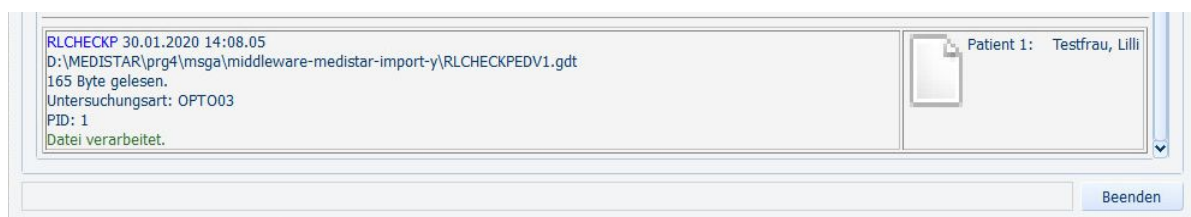

Ergebnis in Medistar

Hier ein **Beispiel** für den Rückeintrag:

```
V0 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U  
V0 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
```

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.