

Geräteanbindung

Shin-Nippon DL-800

Scheitelbrechwertmesser
(Synonym: Lensmeter)



Dateiversion: 1.9.8.13
Erstellungsdatum: 29.09.2020
Letzte Aktualisierung: 15.04.2021
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

bon Optic Vertriebsges. mbH
Stellmacherstraße 14
23556 Lübeck
Deutschland

Telefon: 0451 / 80 9000
Fax: 0451 / 80 900-10
Web: www.bon.de
E-Mail: call@bon.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über die serielle Schnittstelle realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.


Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am Shin-Nippon DL-800

Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen und folgende Kabelbelegung ist zu beachten:

RS-232 Straight Cable

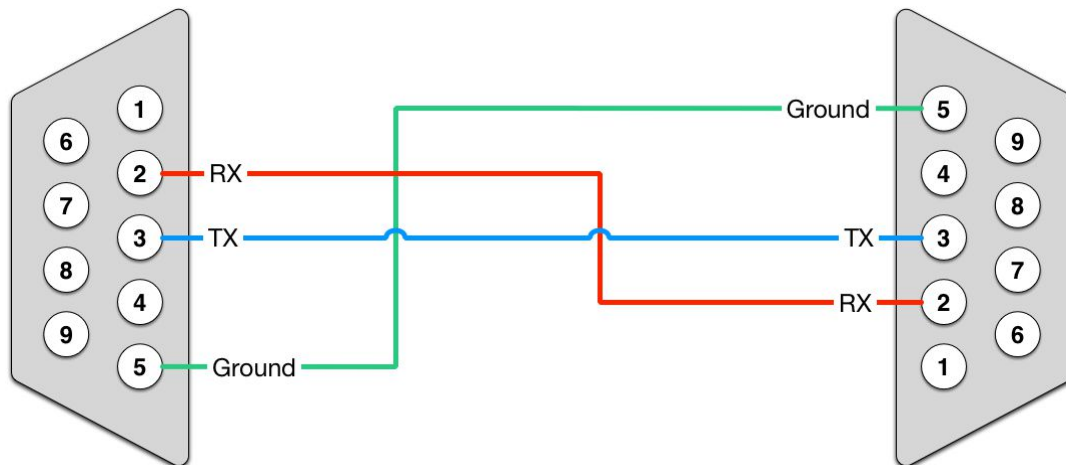

Konfig 1/3

Zyl	-	+	±
Stu.	0.25	0.12	0.01
Auto prog.	Off	On	
Glas	Normal	Hartl.	Weichl.
Auto memory	Off	On	
Lens switch	G/R/L	R/L	
Auto R/L	Off	On	

Navigation: ↓ ↑ ← → OK

Konfig 2/3

Messung ADD	F/N.AT	N.AT	Manuell		
Prog. graph	Off	On			
Prisma	Off	X-Y	P-B		
Prisma(mm)	Off	On			
Abbe	20	30	40	50	60
Ray	e		d		
Standby	Off	3min	5min	10min	

Navigation: ↓ ↑ ← → OK

Konfig 3/3

Sprache	EN	FR	ES	IT	PT	DE	CN
Kontrast	[Bar graph]						
Signalton	On		Off				
ID	Konfig. ID						
Daten+Output	Konfig. Daten+Output						
Dat./Uhrzeit	Konfig. Dat./Uhrzeit						
Stdeinstellung	Konfig. Stdeinstellung						

Navigation: ↓ ↑ ← → OK


Daten+Output

Ausgabemed	RS232C		
Auto comm	Off	On	
Baud-rate	115200	38400	9600
Output	A	B	

Navigation: ↓ ↑ ← → OK

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.

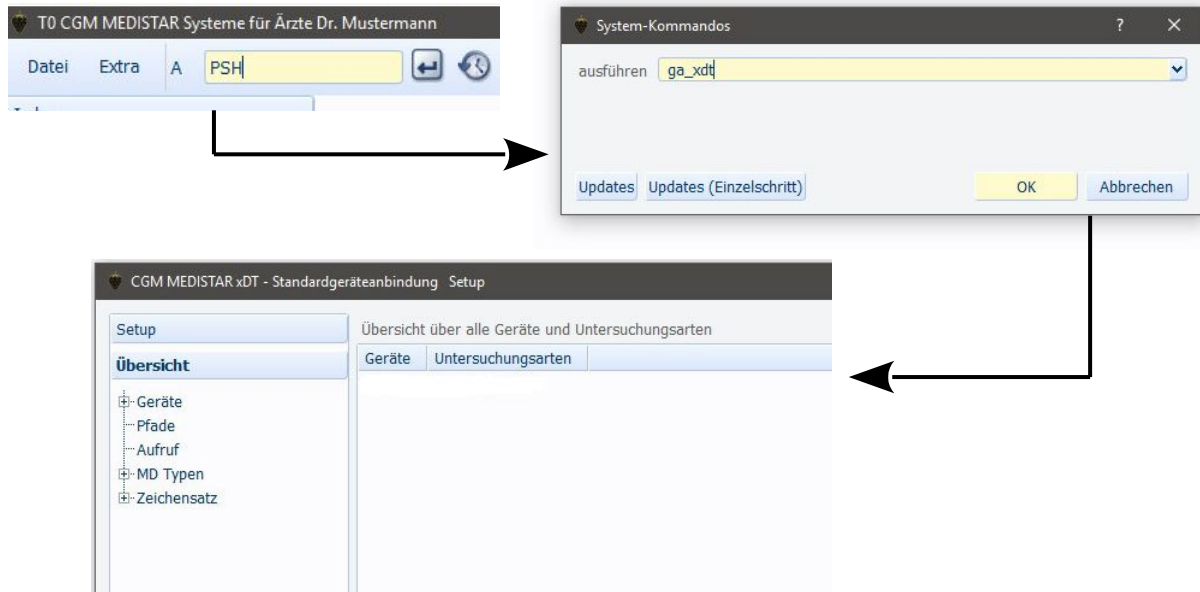

Shin-Nippon DL-800 → **GDT-ID / Geräte-ID ist DL800**

The screenshot shows the 'Setup Gerät "DL800"' configuration window. The 'Allgemein' tab is selected. The configuration details are as follows:

- Fremdprogrammverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm: msga.exe
- Fremdprogrammparameter: /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-dl800.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- ☐ Phoropter
- Anzeigegerät: (empty field)
- Exportverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei: medistar-dl800.gdt
- Importverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-dl800
- Importdatei: *.gdt

Der Gerätenamen (hier **DL800**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den Austausch-verzeichnissen. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung

über zusätzliche Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "DL800"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | Patienten-ID / Kennungen | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) DL800

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPT003, alternativ **LENSM01** (nicht GDT-Standard).

Setup Gerät "DL800" Untersuchungsart "OPT003"

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz Windows ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "DL800" Untersuchungsart "OPT003"

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen ▼

Zeichensatz Windows ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	☐
8432/8439	Verweis Messung	☐
6302-6305	Verweis Link	☐
6205	Diagnose	☐
6220	Befund	☐
6221	Fremdbefund	☐
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	V0
8990	Signatur	☐
3622/3623	Grösse/Gewicht	☐
6330-6399	Freie Kategorien	☐
8410-8480	Werte	☐
	Arztkennzeichen	☐

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Geräte name in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

➔

FASM

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
122	Zeilentyp 11		
123	ExportIndex 11	1	
124	Menüpunkt12	***	
125	Label 12	Shin-Nippon DL-800	
126	Name 12	DL800	
127	Untersart 12	OPT003	
128	Satzart 12	6302	
129	Ziffer 12		
130	Parameter 12		
131	Zeilentyp 12		
132	ExportIndex 12	1	
133	Menüpunkt13	***	
134	Label 13		
135	Name 13		
136	Untersart 13		
137	Satzart 13		

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **DL800**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Skriptdatei (PSC):

DL800-OPT003.ini

DL800-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

DL800.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „DL800-OPT003.ini“ und „DL800-OPT003-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „DL800-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „DL800.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „**DL800-OPT003-COM.psc**“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „**DL800-OPT003-PARSE-DATA-SERIAL.psc**“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**DL800-OPT003-PARSE-DATA-SERIAL.psc**“ mit einem reinen Texteditor.

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The image shows two screenshots of software interfaces. The top screenshot is the 'XDT' application window, titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. It has a yellow background and contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum
	1.4	29.09.20

Below the table, there is a list of numbers from 12 to 20. The number 12 is highlighted with a red box, and next to it, the text 'Shin-Nippon DL-800' is displayed. At the bottom of the window, there is a button labeled 'Auswahl:' and a small input field. The bottom screenshot is the 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.13.60' window. It has a white background and contains a table with the following data:

Informationen	
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medist...\medistar-dl800.gdt
Datum	29.09.2020 15:07:26

Below the table, there is a list of status messages, all starting with 'ERFOLG: SCHRITT' followed by a number from 1 to 7, and the text 'erfolgreich abgeschlossen'. To the right of the status messages, there is a table with the following data:

Empfänger	DL800
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	OPT003

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Shin-Nippon DL-800**“ warten.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.


Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

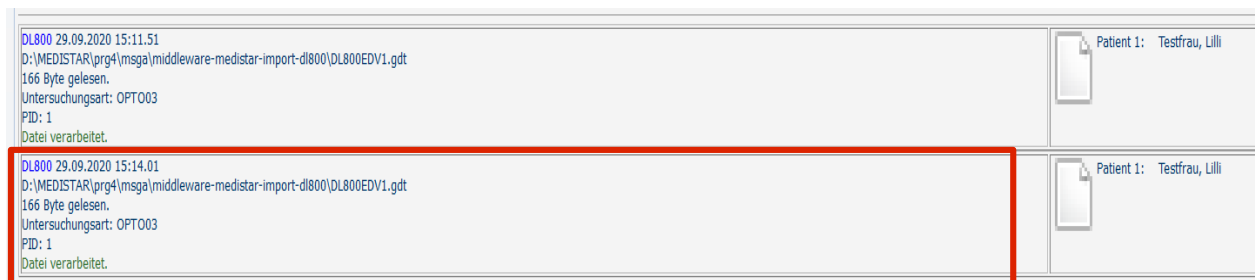

Ergebnis in Medistar

Hier ein **Beispiel** für den Rückeintrag:

```
V0 R.:S=+ 0.50 Z=- 1.75* 11 P= 0.44 I 0.24 U A=+ 1.50  
V0 L.:S=+ 1.50 Z=- 1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D A=+ 2.50
```

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.