

Shin-Nippon DR-900



<http://www.shin-nippon.jp/>

Dateiversion:	1.9.0.36
Erstellungsdatum:	13.04.2021
Letzte Aktualisierung:	18.06.2021
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am Shin-Nippon DR-900.....	4
Bedienung Shin-Nippon DR-900.....	6
CGM Medistar Konfiguration.....	7
Middleware Einstellungen.....	10
Anpassungen, Daten an Phoropter senden.....	11
Editieren der „msga.ini“	11
Editieren der „DR900-OPT002.ini“	12
Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen.....	13
Messdaten auswählen.....	14
Middleware Skript Erklärung und Anpassung.....	15
Ergebnis in Medistar.....	17
Fehlersuche.....	18

Technischer Ansprechpartner

bon Optic Vertriebsges. mbH
Stellmacherstraße 14
23556 Lübeck
Deutschland

Telefon: 0451 / 80 9000
Fax: 0451 / 80 900-10
Web: www.bon.de
E-Mail: call@bon.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt.

Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell ist möglich. Patientennummer kann auch am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt sofern eine **ID** vorhanden ist. Da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.


Zu übertragende Messdaten werden aus der Karteikarte (MD) ausgelesen und per **serieller** Schnittstelle (COM) an das Gerät gesendet. Es werden nur die aktuellen Werte, sprich die letzte Messung pro MD-Zeilentyp, übertragen.

 **Hinweis:** Damit Messdaten per GDT exportiert werden können, muss dies explizit pro Geräteanbindung (GA_XDT) (**Option Phoropter**) aktiviert werden.


Einstellungen am Shin-Nippon DR-900

Das Gerät wird über ein Standard RS232 Kabel angebunden (nicht im Lieferumfang enthalten).


Die Geräte-Konfiguration erreicht man über die Schaltfläche „**Konfig**“.

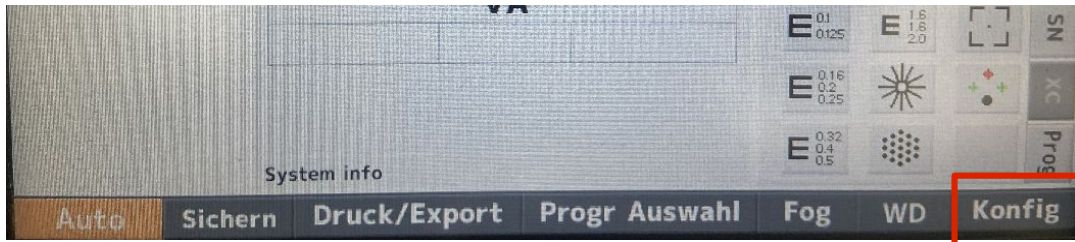

Gerät initial konfigurieren, damit Daten per serieller Schnittstelle „exportiert“ werden können. Untermenü „andere“ → Ausgang auf PC umstellen.

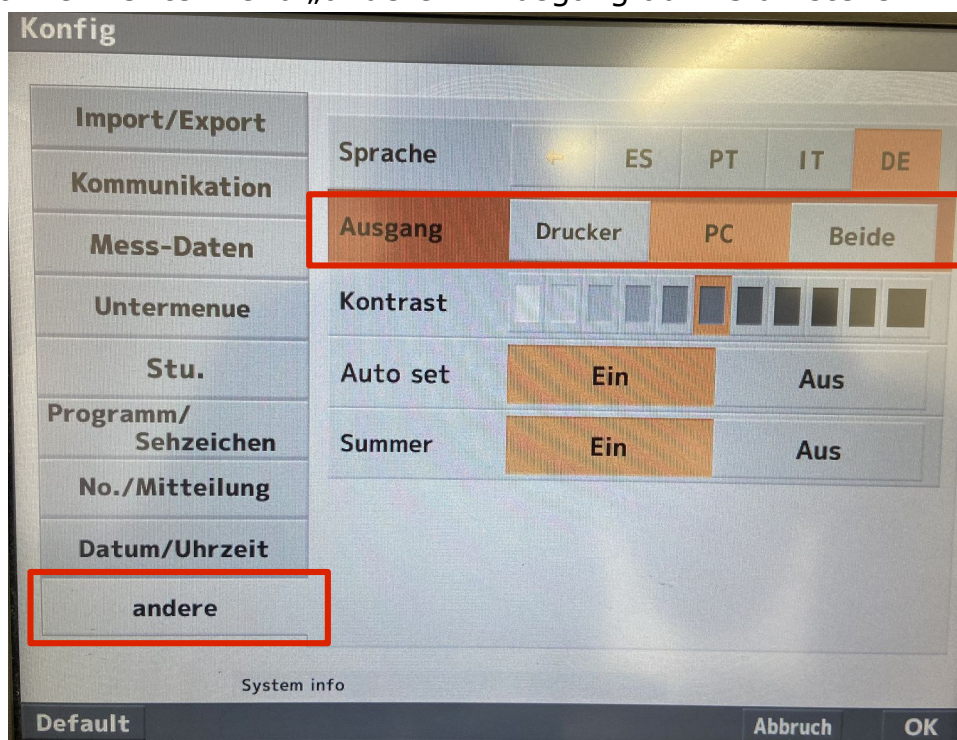


Konfiguration der seriellen Kommunikation. Über das Untermenü „Kommunikation“. Alle Baudraten auf 9600 Baud umstellen. Die serielle Schnittstelle ist dann konfiguriert auf 9600 8 N 1.

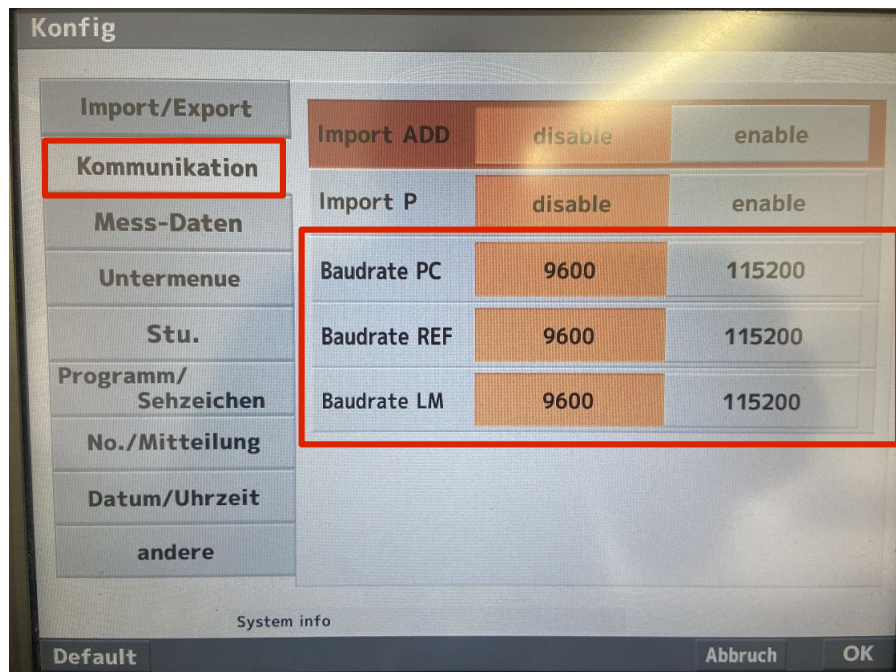

Konfiguration „Import/Export“ des Gerätes. Alle Optionen einstellen wie im Bild vorgegeben. Die Import-Daten vom PC können dann automatisch importiert werden.




Bedienung Shin-Nippon DR-900

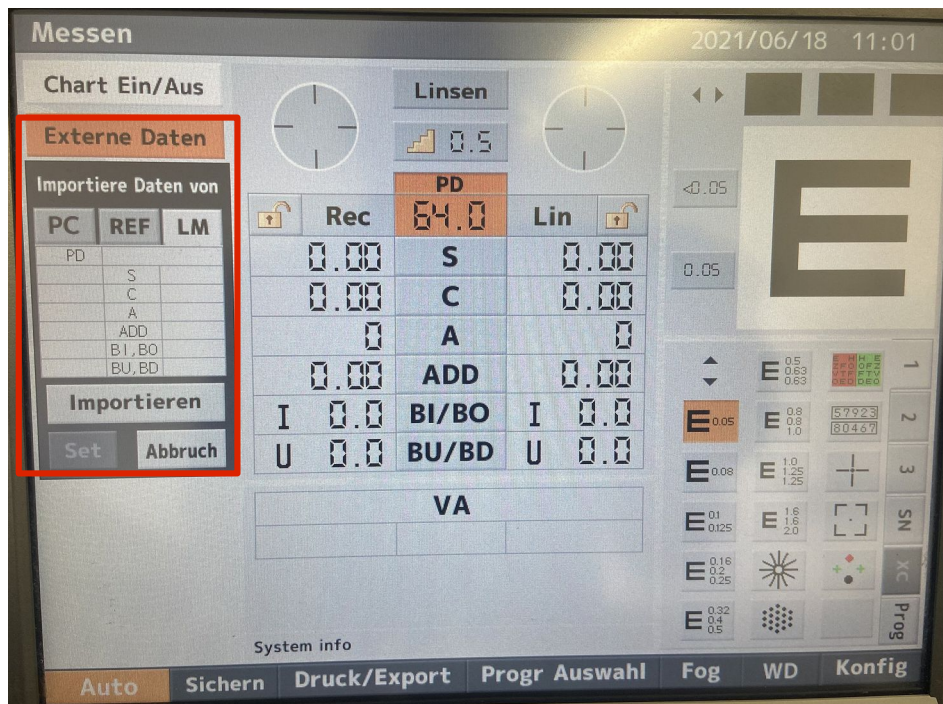


Über die Schaltfläche „Externe Daten“ besteht die Möglichkeit die übertragenen Daten vom PC zum Gerät ins Gerät zu laden. Die Middleware überträgt die selektierten Daten per serieller Schnittstelle ans Gerät. LM-Daten, REF-Daten und PC-Daten (letzte Phoropter Messung) können am Gerät importiert werden.

Nach erfolgreicher Messung können die Daten über die Schaltfläche „Druck/Export“ an den PC (Middleware) übertragen werden.

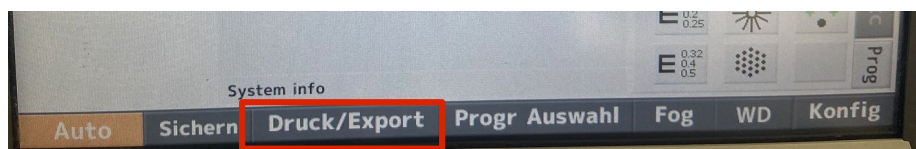


CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

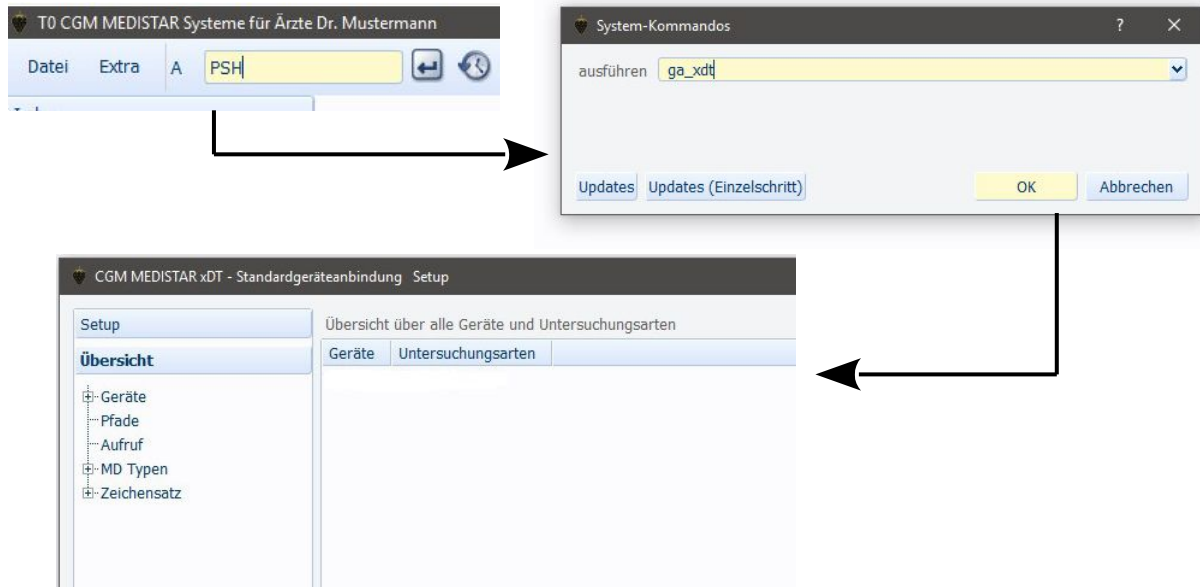


Shin-Nippon DR-900 → **GDT-ID / Geräte-ID ist DR900**

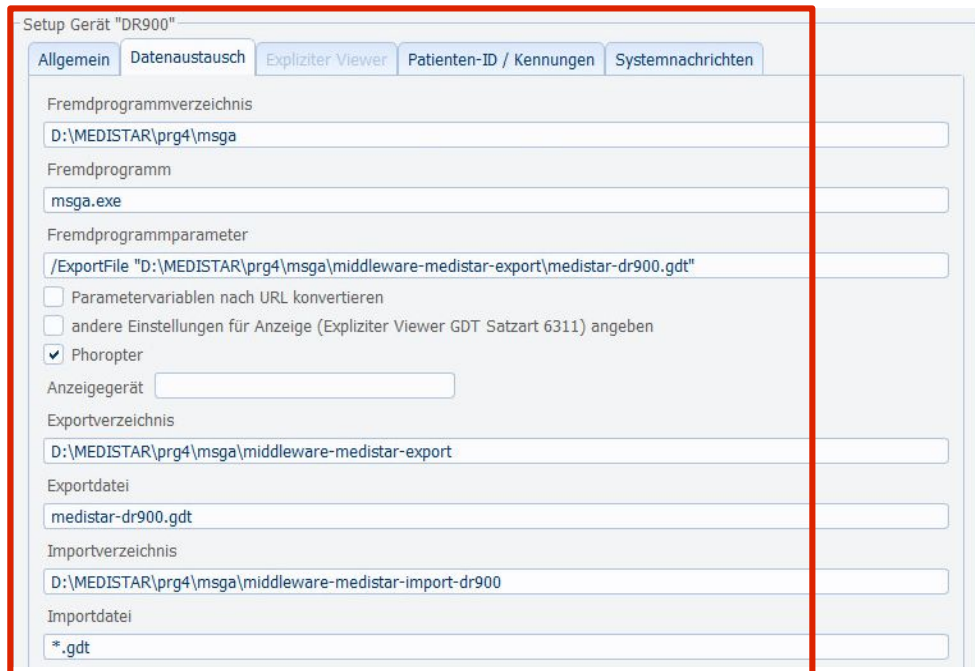

Der Gerätenamen (hier **DR900**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

 Aktivieren Sie die Phoropter Option, damit Daten (Werte) auch an den **Phoropter** gesendet werden können.

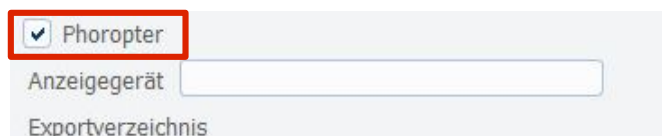

Setup Gerät "DR900"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer **Patienten-ID / Kennungen** Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) DR900

Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Export **Import** MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**
☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD-': Behandlung+Messung
 Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen
☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen
 Zeichensatz **Windows**
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

MD-Eintrag

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	☐
8432/8439	Verweis Messung	☐
6302-6305	Verweis Link	☐
6205	Diagnose	☐
6220	Befund	V
6221	Fremdbefund	V
6227	Kommentar	V6
6228	Ergebnis	V2
8990	Signatur	☐
3622/3623	Grösse/Gewicht	☐
6330-6399	Freie Kategorien	☐
8410-8480	Werte	☐
	Arztkennzeichen	☐

Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Abbildung 1: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPT002**

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen: **fasm**

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
057	Ziffer 4		Leistung
058	Parameter 4		Ergänzung
059	Zeilentyp 4		zusätzl. Unters.arten
060	ExportIndex 4	4	
061	Menüpunkt5	***	Menüpunkt5
062	Label 5	Shin-Nippon DR-900	Beschriftung
063	Name 5	DR900	Geraet
064	Untersart 5	OPT002	Untersuchungsart
065	Satzart 5	6302	Satzart
066	Ziffer 5		Leistung
067	Parameter 5		Ergänzung
068	Zeilentyp 5		zusätzl. Unters.arten
069	ExportIndex 5	1	
070	Menüpunkt6	***	Menüpunkt6
071	Label 6		Beschriftung
072	Name 6		Geraet

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **DR900**

Untersuchungsart: **OPT002**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

DR900-OPT002.ini

DR900-OPT002-COM.psc

DR900-OPT002-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

DR900.crt

Ermitteln Sie über die Datei „**msga.ini**“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „DR900-OPT002.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „DR900-OPT002.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die Standard ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<STX>  
COMEndMarker=<ETX>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen oder auf 0 setzen zum deaktivieren. Standard Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der **Timeout** erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „DR900.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassungen, Daten an Phoropter senden

i Wichtig: Damit Daten aus der Karteikarte (MD) verarbeitet und an den Phoropter gesendet werden können, muss festgelegt werden welcher **MD-Zeilentyp** welche **Gerätedaten** enthält.

D.h. die **Middleware** benötigt die **Zuweisung**, dass die MD-Zeile V0 z.B. Lensmeter Daten enthält. Ohne diese Zuweisung kann auf eine Kundenspezifische Konfiguration eventuell nicht reagiert werden.

Die Patientendaten (immer die aktuellste Messung pro Zeilentyp) werden per GDT 2.1 exportiert und durch die Middleware verarbeitet. Die Messdaten werden 1:1 an das Gerät übertragen.

28.07.2020	A	V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	A	V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
19.08.2020	A	V0 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	A	V0 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
	A	.

Abbildung 2: Beispiel MD-Einträge

Folgende Konfigurationsdateien müssen editiert werden, damit die Middleware Konfiguration mit der MEDISTAR Konfiguration übereinstimmt:

Die Konfigurationsdatei „**msga.ini**“ (Programmkonfigurationsdatei) muss den Datentrenner (Standard: PHOROPTER) für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR enthalten.

Editieren der „msga.ini“

Sektion [GDT]

NonGDTDataSeparator	Datentrenner für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR angehängt werden. Standard: PHOROPTER Schreibweise beachten
---------------------	---

i Editieren Sie die msga.ini und ergänzen Sie folgenden Wert in der Sektion [GDT] (falls nicht vorhanden):

NonGDTDataSeparator=PHOROPTER

Beispiel (Auszug):

```
[GDT]
Format=import
Version=2.1
Charset=3
Type=file
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\
BackupFiles=1
BackupPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export-backup\
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Editieren Sie im Anschluss die **Geräte-Konfigurationsdatei** „DR900-OPTO02.ini“. In der Geräte-Konfigurationsdatei wird hinterlegt, welcher MD-Zeilentyp welchem Geräte-Typ entspricht. Weiterhin hat man die Möglichkeit über die Schalter „Enabled“ pro Gerät die Verarbeitung zu aktivieren oder zu deaktivieren (0 = deaktivieren, 1 = aktivieren).

Editieren der „DR900-OPTO02.ini“

Sektion [Common]

NonGDTDataLineVisus	Zeilenkennung für „Visus“
NonGDTDataLineLensmeter	Zeilenkennung für „Lensmeter“
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Objektiv“
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Subjektiv“
NonGDTDataLinePhoropter	Zeilenkennung für „Phoropter“
NonGDTDataLineKeratometer	Zeilenkennung für „Keratometer“
NonGDTDataLineSondereintraege	Zeilenkennung für „Sondereinträge“
NonGDTDataLine ... Enabled	Mit dem Wert 1 kann die Verarbeitung für den bestimmten MD-Zeilentyp aktiviert werden, mit 0 wird sie deaktiviert.
UseOnlyLatestNonGDTDataLines	Mit dem Wert 1 werden nur die aktuellen Messdaten angezeigt, mit Wert 0 werden alle Daten angezeigt.

Editieren Sie die DR900-OPTO02.ini und ergänzen Sie folgende Werte in der Sektion [Common] (falls nicht vorhanden):

```

NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineLensmeterEnabled=1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektivEnabled=1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLinePhoropterEnabled=1
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineVerordnungEnabled=0
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektivEnabled=0
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineVisusKorrekturEnabled=0
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineSondereintraegeEnabled=0
NonGDTDataLineKeratometer=V7

```



```
NonGDTDataLineKeratometerEnabled=0
NonGDTDataLineVisus=V
NonGDTDataLineVisusEnabled=0
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen

Die Middleware Skript Konfiguration (Datenverarbeitung) muss ebenfalls mit den im MEDISTAR verwendeten MD-Zeilentypen übereinstimmen. Weiterhin muss die Skript-Konfiguration mit der INI-Konfiguration übereinstimmen.

D.h. die INI-Daten und die Skript-Konfiguration muss identisch sein.

Entnehmen Sie die Werte für das Skript aus der Geräte-Konfigurationsdatei.

Datei „DR900-OPTO02.ini“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineVisus=V
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Datei „DR900-OPTO02-COM.psc“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter = 'V0';
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv = 'V1';
NonGDTDataLinePhoropter = 'V2';
NonGDTDataLineVerordnung = 'V3';
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv = 'V4';
NonGDTDataLineVisusKorrektur = 'V5';
NonGDTDataLineSondereintraege = 'V6';
NonGDTDataLineKeratometer = 'V7';
NonGDTDataLineVisus = 'V';
```

Anpassungen können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**DR900-OPTO02-COM.psc**“ mit einem „reinen“ Texteditor.

Editieren Sie das **Skript** und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

Messdaten auswählen

Werden für einen Patienten Messdaten ausgelesen und die **PHOROPTER** Option wurde aktiviert, werden diese Daten zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie hier die zu übertragenden **Daten** aus. Alle selektierten Werte werden an das Gerät per serieller Schnittstelle gesendet.

Messdaten auswählen

V0 =	Linsmeter
☒	01.08.2020 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
☒	01.08.2020 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
V1 =	Refraktometer Objektiv
☒	24.07.2020 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
☒	24.07.2020 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
V2 =	Phoropter
☒	01.08.2020 R.:S=-3.00 Z=-2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50
☒	01.08.2020 L.:S=-4.00 Z=-3.75*115 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75
V5 =	Visus mit Korrektur
☒	24.07.2020 RA CC:1.25 LA CC:1.25
V6 =	Sondereinträge
☒	01.08.2020 WD= 40
V7 =	Keratometer
☒	24.07.2020 R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
☒	24.07.2020 R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50

Auswahl bestätigen Überspringen

Über die Schaltfläche „**Auswahl bestätigen**“ werden die Messdaten selektiert und an das Gerät übertragen. Soll eine Messung durchgeführt werden, ohne Messdaten ans Gerät zu übertragen, dann kann mittels „**Überspringen**“ Schaltfläche dies getan werden.



Wird die Auswahl der Daten **übersprungen**, werden keine Messdaten **gesendet** aber es kann eine Messung am Gerät durchgeführt werden. Empfangene Daten werden verarbeitet und importiert. Ein Klick auf die Schaltfläche „Auswahl bestätigen“ sendet die Daten an das Gerät.

i **Hinweis:** Das Gerät muss sich jetzt bereits im **Übertragungsmodus** befinden, damit Daten gesendet / empfangen werden können.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „**DR900-OPT002-COM.psc**“ übernimmt die serielle Kommunikation, das Senden und Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „**DR900-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ (Daten empfangen) ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT (2.1).

Anpassungen (Daten empfangen) können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**DR900-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ mit einem „reinen“ Texteditor.

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

```
// Verwende "True", damit der WD Wert hinzugefügt wird, benutze "False", damit
// der WD Wert nicht per GDT exportiert wird.
bolAddWDValueToOutput:= True;

// Verwende "True", damit der VD Wert hinzugefügt wird, benutze "False",
// damit der VD Wert nicht per GDT exportiert wird.
bolAddVDValueToOutput:= True;
```

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The top screenshot shows a window titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse' with a sub-header 'XDT'. The main area has a yellow background and contains a table with three columns: 'XDT-Anbindung', 'Version', and 'Datum'. The 'XDT-Anbindung' column contains '5 Shin-Nippon DR-900', which is highlighted with a red box. Below the table is a label 'Auswahl:' followed by a small square button. At the bottom are four buttons: 'Eingabe', 'Druckauftrag', 'Drucken', and 'Ende'.

The bottom screenshot shows a window titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.19.66' with two tabs: 'Middleware' and 'Logs'. The 'Middleware' tab is active and shows a table with the following data:

Informationen	
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medis...\medistar-dr900.gdt
Datum	15.04.2021 09:19:09
Empfänger	DR900
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	OPT002

The 'Empfänger' field 'DR900' is highlighted with a red box. Below the table is a list of seven status messages, each starting with a checkmark and 'ERFOLG: SCHRITT 1' through '7' erfolgreich abgeschlossen.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Shin-Nippon DR-900**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Wenn das Gerät als **Phoropter** konfiguriert ist, werden die Messdaten auch an das Gerät über die konfigurierte Schnittstelle gesendet. Ohne die Phoropter Option können Daten nicht exportiert werden.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet. Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

Die Messdaten, welche über die serielle Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar


Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V2 R.:S=- 5.00 Z=- 0.25*120 P= 2.50 O 9.00 D A=+ 6.25 PD= 64.0 VD= 12.00  
V2 L.:S=- 2.00 Z=- 0.50* 50 P= 1.50 I 1.00 U A=+ 1.25 PD= 64.0 VD= 12.00  
V6 WD= 23.0
```


Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.

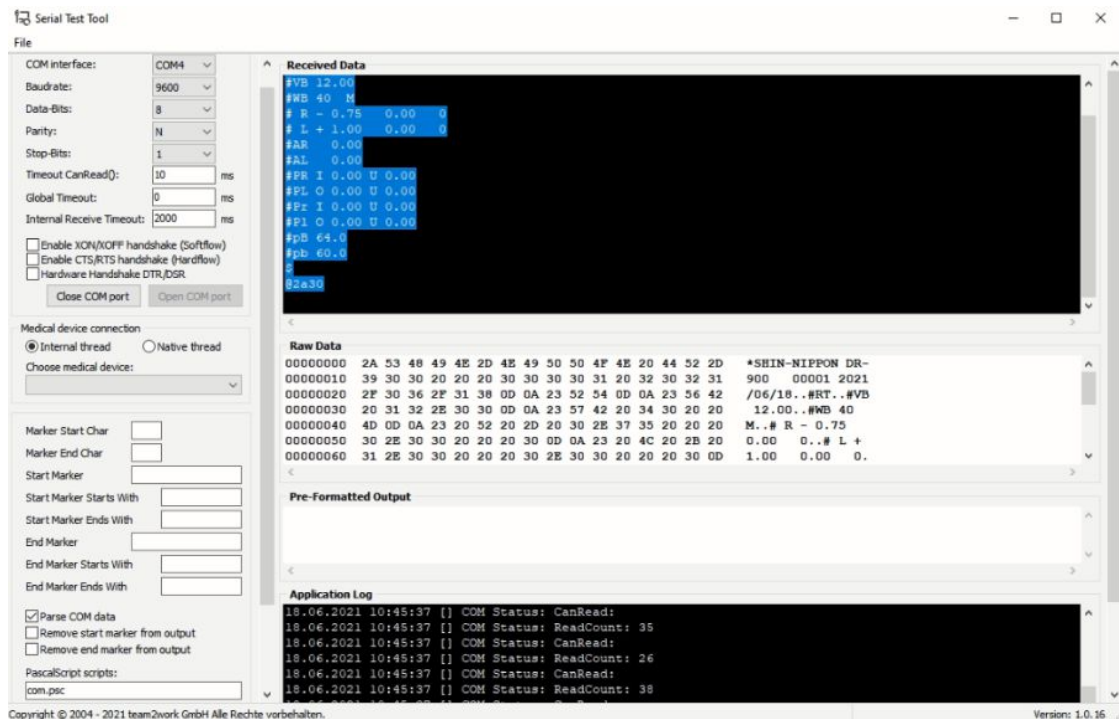

Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte und / oder INI-Dateien angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM1" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "DR900EDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „DR900-OPT002.ini“.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.