

Siemens Clinitek Status Plus



Copyright (c) Siemens Healthineers AG

Dateiversion: 1.9.0.10
Erstellungsdatum: 13.03.2026
Letzte Aktualisierung: 13.03.2026

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am Siemens Clinitek Status Plus.....	4
Bedienung Siemens Clinitek Status Plus.....	6
CGM Medistar Konfiguration.....	7
Medistar Formular Einrichtung (XDT).....	10
Middleware Einstellungen.....	11
Formularaufruf.....	12
Ergebnis in Medistar.....	14

Technischer Ansprechpartner

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird per serieller Schnittstelle realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt sofern eine **ID** vorhanden ist, falls nicht wird der aktuelle Patient verwendet.

Einstellungen am Siemens Clinitek Status Plus

Die serielle Schnittstelle, z.B. COM1, muss auf folgende Parameter eingestellt werden: 9600 | 8 | N | 1 | ohne HW Handshake

4. Select the connectivity options.

Connectivity Option	Description
Screen 1 of 2	
Connectivity Platform	• Enabled allows communication between the analyzer and the connector. • Disabled (default) prevents communication between the analyzer and the connector.
Allow results to be sent to PC	• Enabled (default) allows the analyzer to send the test results to a PC. • Disabled prevents the analyzer from sending the test results to a PC. Note If you do not use a CLINITEK Status connector, Siemens recommends that you select Disabled.

5. Select **Next**.

The **Connectivity 2 of 2** screen displays.

6. Select **Serial Connection**.

7. Select **Edit serial settings**, and select the following options:

- For **Baud** rate, select **9600, 19200, 57600, or 115200**.
- Select **Next**.
- For **Parity**, select **None, Odd, or Even**.
- Select **Next**.
- For **Stop Bits**, select **1 or 2**.


8. Select **Done** 4 times to return to the **Select Ready** screen.

Abbildung 1: Copyright (c) Siemens Healthineers AG


Bedienung Siemens Clinitek Status Plus

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

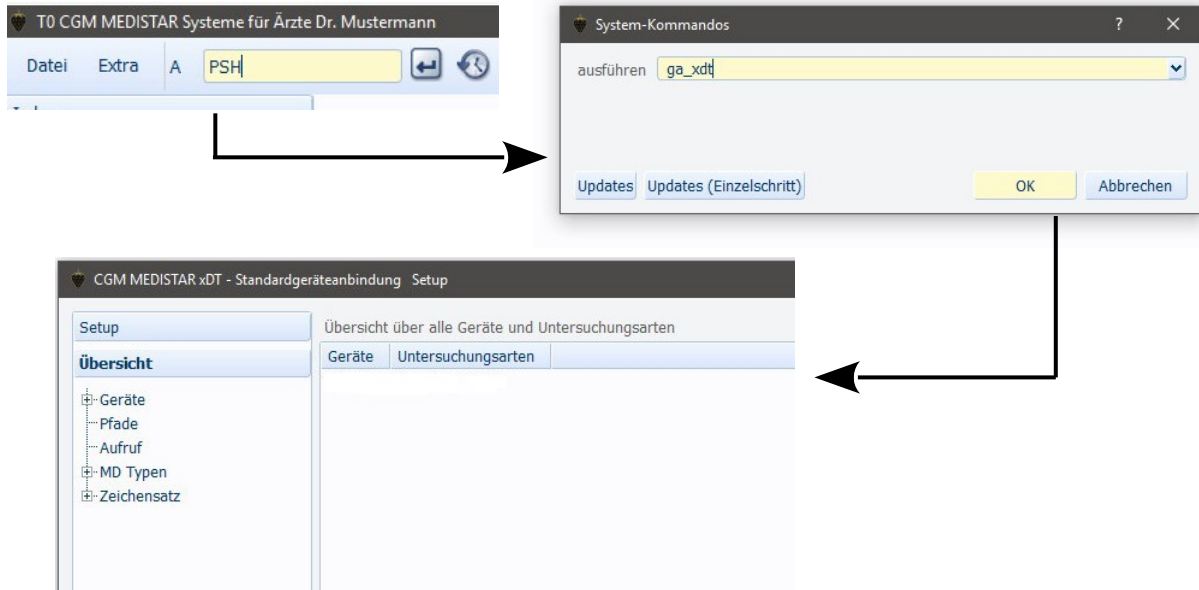

Siemens Clinitek Status Plus → **GDT-ID / Geräte-ID ist SCLINSTP**

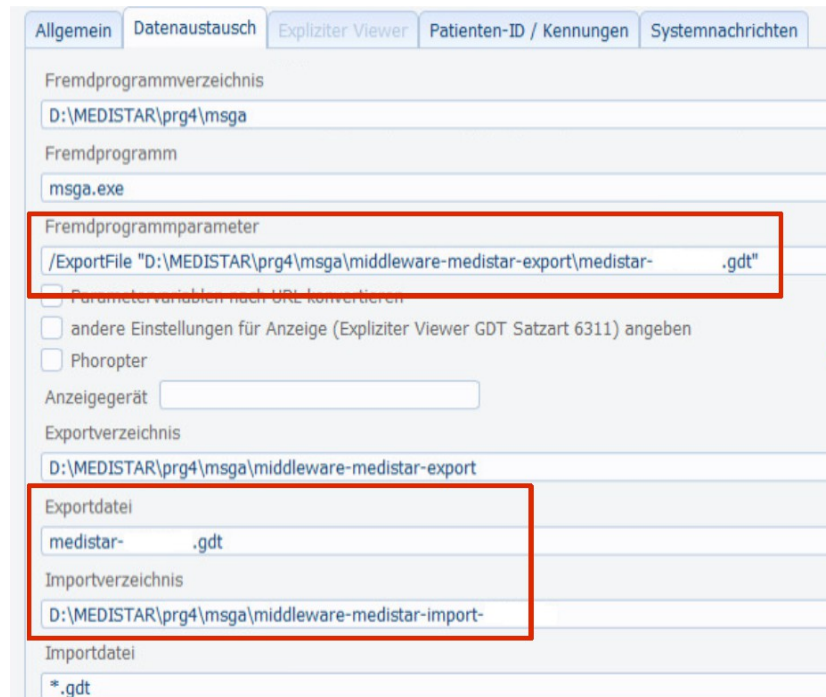

Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **SCLINSTP**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)

Die **GDT-Empfänger-Kennung SCLINSTP** (im rot markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Erstellen Sie eine neue Untersuchungsart „**OPT000**“.

Die Einstellungen für „**Export**“ und „**Import**“ unterscheiden sich nicht.

- Setup Gerät " " Untersuchungsart " "
 Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz: Windows
☐ Größe/Gewicht exportieren
 Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': Behandlung+Messung
 Abfrage Abrechnungskennzeichen: Nur EBM
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten
 Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten:

- Setup Gerät " " Untersuchungsart " "
 Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen
☐ Untersuchungsdatum eintragen
 Zeitangaben in MD-Verweis: Messung vorziehen
 Zeichensatz: Windows
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät " " Untersuchungsart " "

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten
6200/6201	Verweis
8432/8439	Verweis Messung
6302-6305	Verweis Link
6205	Diagnose
6220	Befund
6221	Fremdbefund
6227	Kommentar
6228	Ergebnis
8990	Signatur
3622/3623	Grösse/Gewicht
6330-6399	Freie Kategorien
8410-8480	Werte
	Arztkennezeichen

Setup Gerät " " Untersuchungsart " "

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen


- ☐ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Abbildung 2: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Für **6228** und **6227** den Buchstaben „Y“ eintragen.


Medistar Formular Einrichtung (XDT)

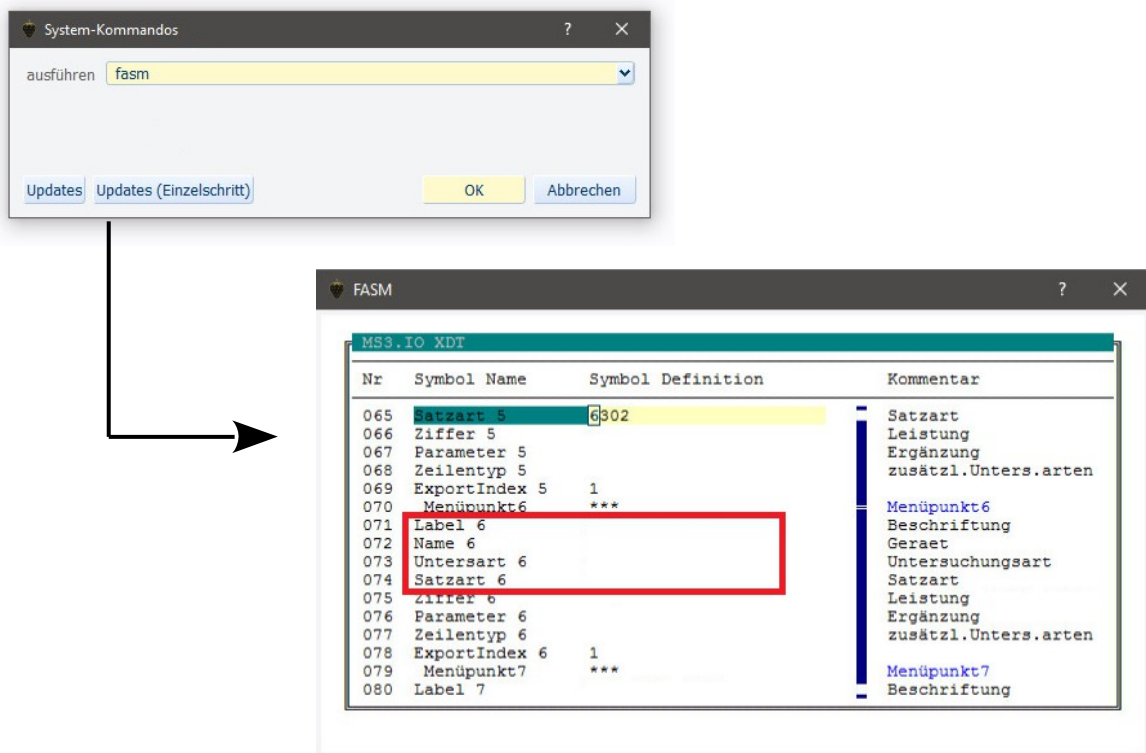

Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: Siemens Clinitek Status Plus
Name: SCLINSTP
Untersart: OPT000
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.

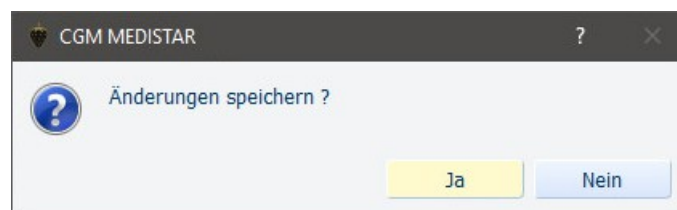

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **SCLINSTP**

Untersuchungsart: **OPT000**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

SCLINSTP-OPT000.ini

SCLINSTP-ALG00-COM.psc

SCLINSTP-OPT000-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

SCLINSTP.crt

Ermitteln Sie über die Datei „**msga.ini**“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „SCLINSTP-OPT000.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „SCLINSTP-OPT000.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „SCLINSTP.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.


Gegebenenfalls anpassen der Parameter der seriellen Schnittstelle.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.




Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Siemens Clinitek Status Plus**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per COM-Schnittstelle, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

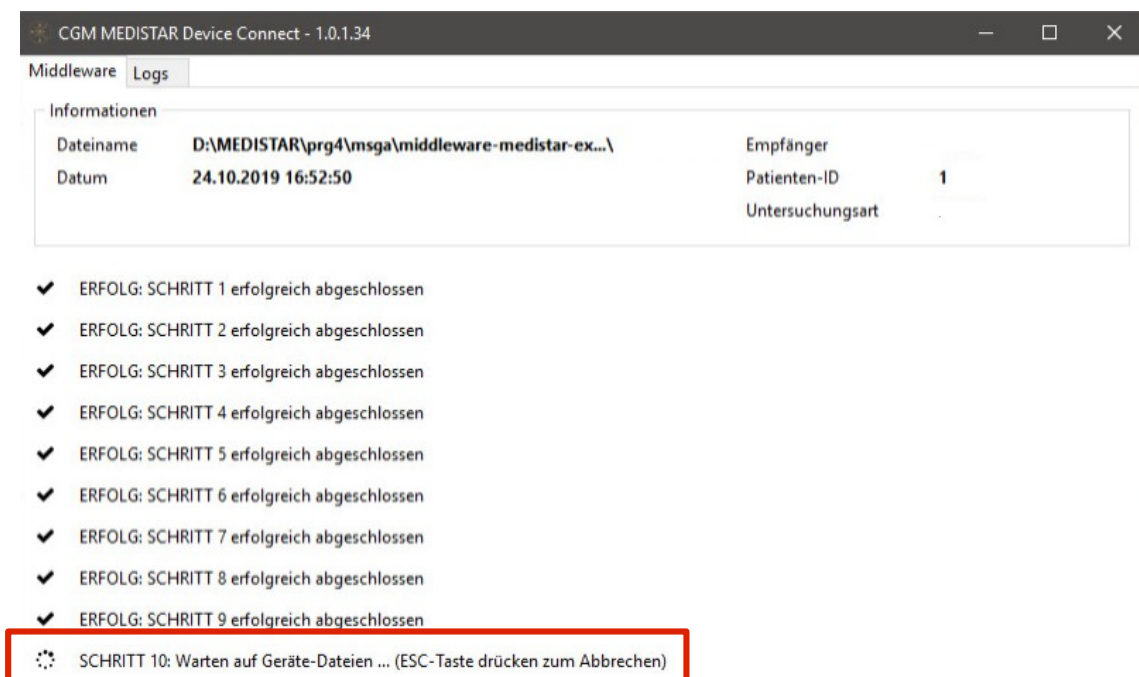

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet. Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

Die Messdaten, welche über die COM-Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.

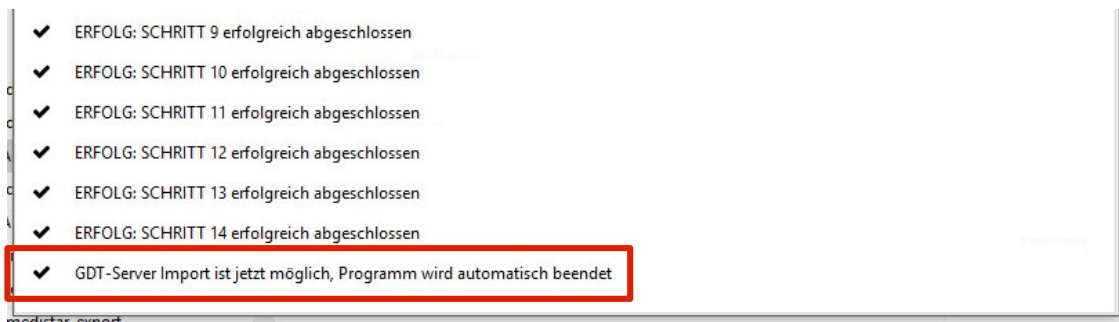

Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

Y Farbe=Keine Angabe; Klarheit=Keine Angabe; GLU=Negativ;
Y BIL=Negativ; KET=Negativ; SG=1.020; OBL=0 Ery/uL; pH=6.0;
Y PRO=Negativ; UBG=3.2 umol/L; NIT=Negativ; LEU=0 Leu/uL;

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.