

Geräteanbindung TOMEY TL-6000

Lensmeter



<https://tomey.de/de/tl-6000>

Dateiversion:	1.9.7.9
Erstellungsdatum:	09.07.2020
Letzte Aktualisierung:	28.04.2021
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Tomey GmbH
Wiesbadener Str. 21
90427 Nürnberg
Tel: 0911 – 93854620
Fax: 0911 – 938546220

Mail: info@tomey.de
Web: www.tomey.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am TOMEY TL-6000

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden inkl. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse. Die Messungsdateien werden auf einem **Netzlaufwerk** abgespeichert.

The screenshot shows the 'System Setup' window with the 'Connection & Print' tab selected. The 'My IP' sub-tab is active. The 'My IP Address Setting' section has 'Manual' selected over 'DHCP'. The IP address is set to 192.168.100.210, the Sub Net Mask to 255.255.255.0, and the Default GateWay to 192.168.100.250. The MAC ADDRESS is 00-10-DC-08-07-26. An 'IP Check' button is at the bottom right.

Field	Value
My IP Address	192 . 168 . 100 . 210
Sub Net Mask	255 . 255 . 255 . 0
Default GateWay	192 . 168 . 100 . 250
MAC ADDRESS	00-10-DC-08-07-26

The screenshot shows the 'Select Function' screen. Options include 'Print', 'Export', 'My IP Setting', 'PC LAN RS232C Setting', and 'Printout Setting'. The 'LAN' option under 'PC' is highlighted.


Function	Option
Print	Print
Export	Export
My IP	Setting
PC	LAN (highlighted), RS232C
Printout	Setting

The screenshot shows the 'LAN' configuration screen. It includes fields for 'Login' (User ID: Praxis, Password: *****), 'Host IP Address' (192.168.100.100), 'Domain' (empty), 'Folder' (TOMEY), 'File Name Settings' (Setting), and 'Export File' (CSV Format1, CSV Format2, Screen Shot). A 'Connection Test' button is at the bottom right.

Field	Value
Login User ID	Praxis
Login Password	*****
Host IP Address	192 . 168 . 100 . 100
Domain	
Folder	TOMEY
File Name Settings	Setting
Export File	CSV Format1, CSV Format2, Screen Shot

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.

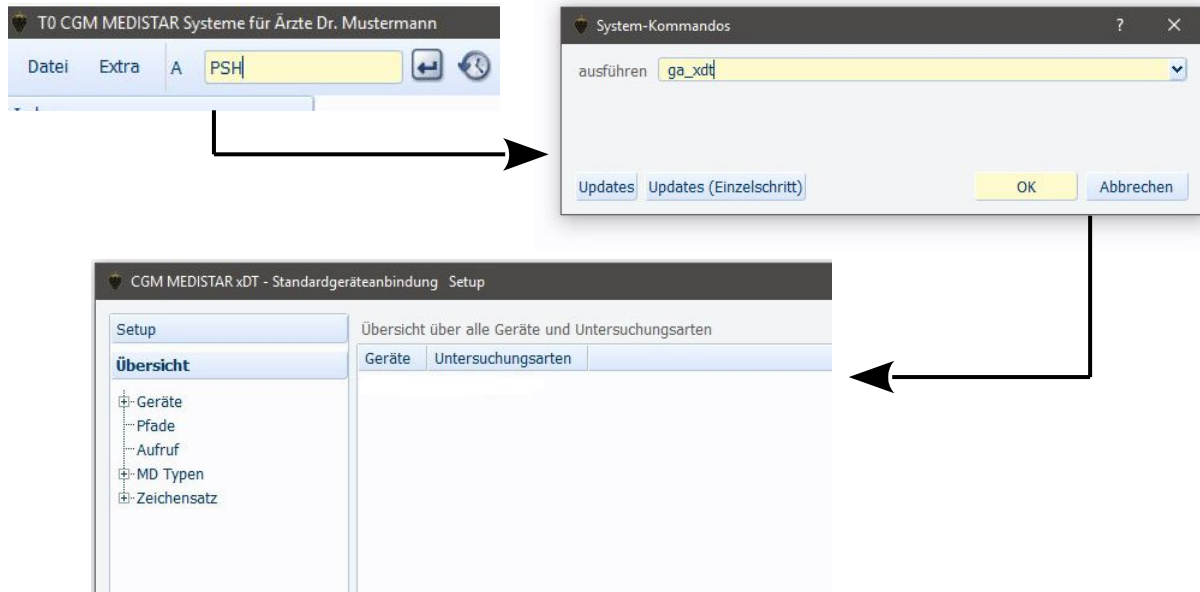

TOMEY TL-6000 → **GDT-ID (Geräte-ID) ist TL6K**

The screenshot shows the 'Setup Gerät "TL6K"' configuration window. The 'Allgemein' tab is selected. The 'Fremdprogrammverzeichnis' field is set to 'D:\MEDISTAR\prg4\msga'. The 'Fremdprogramm' field is set to 'msga.exe'. The 'Fremdprogrammparameter' field is set to '/ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-tl6k.gdt"'. The 'Anzeigegerät' field is empty. The 'Exportverzeichnis' field is set to 'D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export'. The 'Exportdatei' field is set to 'medistar-tl6k.gdt'. The 'Importverzeichnis' field is set to 'D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-tl6k'. The 'Importdatei' field is set to '*.gdt'.

Der Gerätenamen (hier **TL6K**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt! D.h. der Name muss identisch sein.

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wir folgt eingetragen werden: **TL6K#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

Setup Gerät "TL6K"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) TL6K

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsarten: OPT003 (Lensmeter)

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | **MD-Eintrag** | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-

Setup Gerät "TL6K" Untersuchungsart "OPTO03"

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V0
6205	Diagnose	V0
6220	Befund	V0
6221	Fremdbefund	V0
6227	Kommentar	V0
6228	Ergebnis	V0
8990	Signatur	V0
3622/3623	Grösse/Gewicht	V0
6330-6399	Freie Kategorien	V0
8410-8480	Werte	V0
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät "TL6K" Untersuchungsart "OPTO03"

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☐ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Das Schreiben der zusätzlichen Zeile **XD:MR6K** in der Messung, kann wie folgt deaktiviert werden:

Pro Untersuchungsart die Untersuchungsart und das Datum nicht mit eintragen.

Setup Gerät "TL6K" Untersuchungsart "OPTO03"

- ☐ Untersuchungsart eintragen
- ☐ Untersuchungsdatum eintragen

Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6228, 6227 und 6302 – 6305** eingetragen werden.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
078	ExportIndex 6	1	
079	Menüpunkt7	***	Menüpunkt7
080	Label 7	TOMEY TL-6000	Beschriftung
081	Name 7	TL6K	Geraet
082	Untersart 7	OPT003	Untersuchungsart
083	Satzart 7	6302	Satzart
084	Ziffer 7		Leistung
085	Parameter 7		Ergänzung
086	Zeilentyp 7		zusätzl.Unters.arten
087	ExportIndex 7	1	
088	Menüpunkt8	***	Menüpunkt8
089	Label 8		Beschriftung
090	Name 8		Geraet
091	Untersart 8		Untersuchungsart
092	Satzart 8		Satzart
093	Ziffer 8		Leistung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TL6K**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (*.psc):

TL6K-OPT003.ini

TL6K-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

TL6K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „TL6K-OPT003.ini“ und „TL6K-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TL6K-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TL6K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im gleichen Verzeichnis eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung und der Pfad zu den **Bilddateien** hinterlegt werden.

siehe „TL6K-OPT003.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\TL6K-OPT003\  
ExternalFilePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\TL6K-OPT003\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis der Messung

ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis



Hinweis: Bitte darauf achten, dass die Pfade mit „\“ (Backslash) abschließen. Die Verzeichnisüberwachung benötigt den „letzten“ Backslash.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT

XDT-Anbindung

Version 1.4 Datum: 10.07.20

7 TOMEY TL-6000

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.11.58

Middleware Logs

Informationen

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medista...\medistar-tl6k.gdt	Empfänger	TL6K
Datum	10.07.2020 12:31:30	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	OPT003

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⚙ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOMEY TL-6000**“ warten.

Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V0 R: UV = 0%; L: UV = 0%  
V0 R.:S=- 1.00 Z=+ 0.00* 0  
V0 L.:S=- 1.25 Z=+ 0.00* 0
```

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „TL6K-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.