

Geräteanbindung TOMEY TL-7000

Lensmeter



<https://www.tomey.de/>

Dateiversion:	1.9.7.9
Erstellungsdatum:	02.07.2025
Letzte Aktualisierung:	02.07.2025
Autor:	kai-oliver.zirlewagen@cgm.com

Technischer Ansprechpartner

Tomey GmbH
Wiesbadener Str. 21
90427 Nürnberg
Tel: 0911 – 93854620
Fax: 0911 – 938546220

Mail: info@tomey.de
Web: www.tomey.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.


Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am TOMEY TL-7000


Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden inkl. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse. Die Messungsdateien werden auf einem **Netzlaufwerk** abgespeichert.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.

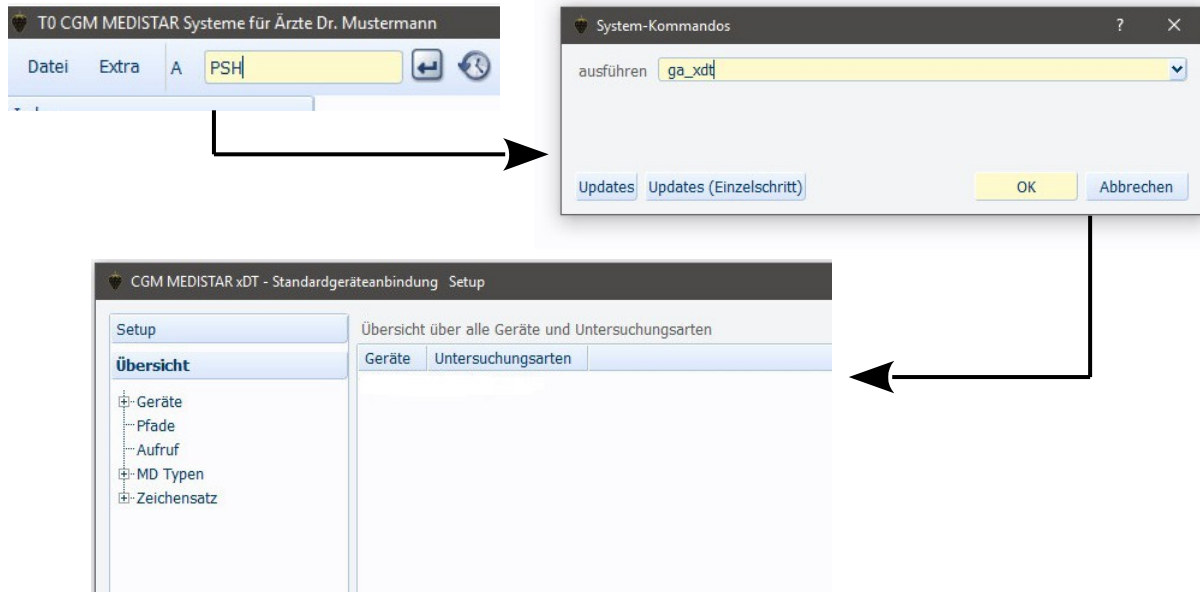

TOMEY TL-7000 → **GDT-ID (Geräte-ID)** ist **TMTL7K**

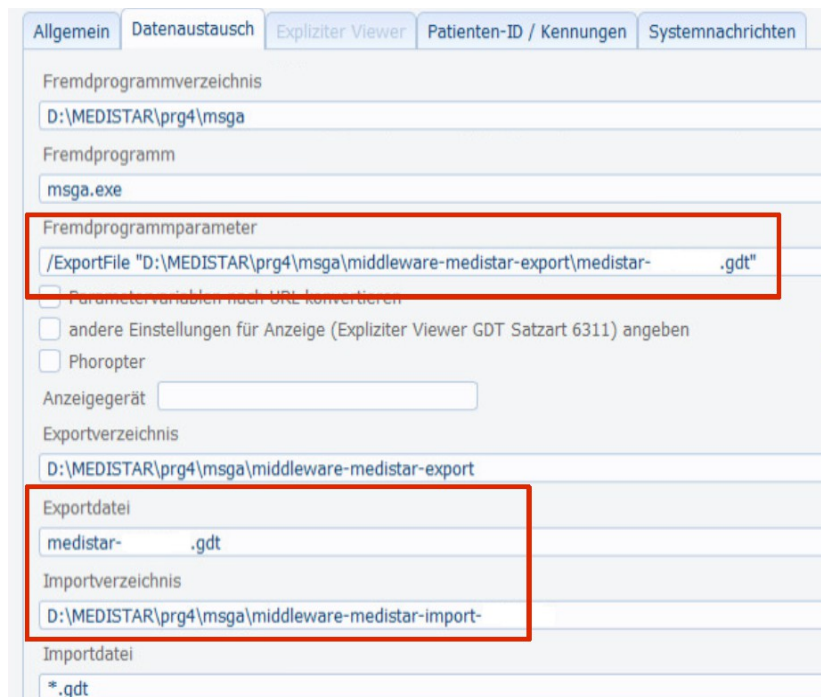

Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **TMTL7K**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf ***.*** konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wir folgt eingetragen werden: **TMTL7K#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

The screenshot shows the 'Patienten-ID / Kennungen' tab. Fields include: Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000), Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000), Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) set to 02.10, Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) set to EDV1, and Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) which is highlighted with a red rectangle.

Die **GDT-Empfänger-Kennung TMTL7K** (im markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsarten: OPT003 (Lensmeter)

The screenshot shows the 'Export' tab. Settings include: Zeichensatz set to Windows (highlighted with a red rectangle), Größe/Gewicht exportieren (unchecked), Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' set to Behandlung+Messung, Abfrage Abrechnungskennzeichen set to Nur EBM, and Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten (unchecked).

The screenshot shows the 'Import' tab. Settings include: Untersuchungsart eintragen (checked, highlighted with a red rectangle), Untersuchungsdatum eintragen (checked, highlighted with a red rectangle), Zeitangaben in MD-Verweis set to Messung vorziehen, Zeichensatz set to Windows (highlighted with a red rectangle), Doppelte Einträge vermeiden (unchecked), Reihenfolge der Einträge (empty field), and Sonderzeichenumwandlung (empty field).

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät Untersuchungsart "OPTO03"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten
6200/6201	Verweis
8432/8439	Verweis Messung
6302-6305	Verweis Link V0
6205	Diagnose V0
6220	Befund V0
6221	Fremdbefund V0
6227	Kommentar V0
6228	Ergebnis V0
8990	Signatur V0
3622/3623	Grösse/Gewicht V0
6330-6399	Freie Kategorien V0
8410-8480	Werte V0
	Arztkennzeichen

Setup Gerät Untersuchungsart "OPTO03"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☐ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Das Schreiben der zusätzlichen Zeile **XD: TMTL7K** in der Messung, kann wie folgt deaktiviert werden:


Pro Untersuchungsart die Untersuchungsart und das Datum nicht mit eintragen.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

- ☐ Untersuchungsart eintragen
- ☐ Untersuchungsdatum eintragen

Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6228, 6227 und 6302 – 6305** eingetragen werden.


Medistar Formular Einrichtung (XDT)

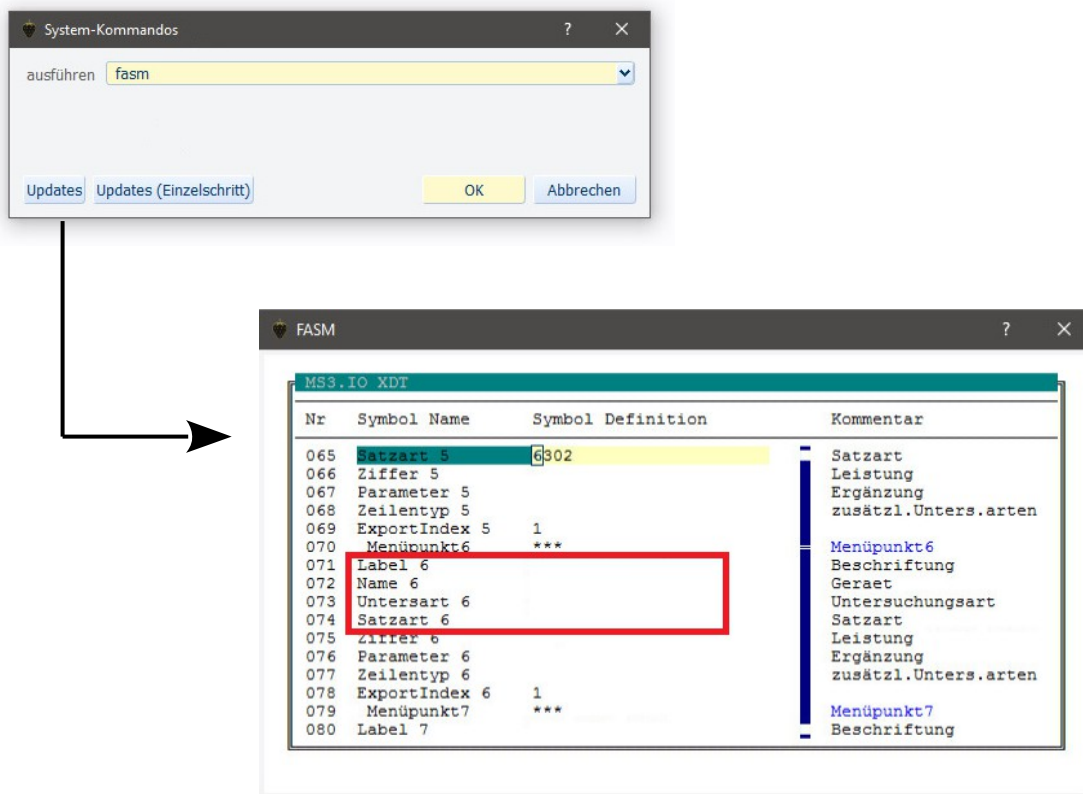

Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: TOMEY TL-7000
Name: TMTL7K
Untersart: OPT003
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.

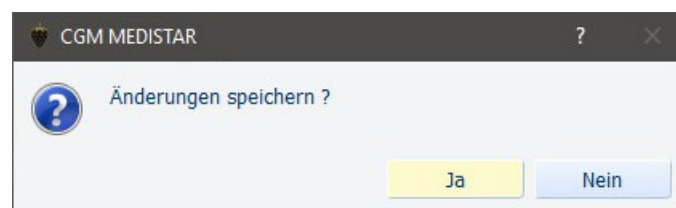

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TMTL7K**
Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (*.psc):

TMTL7K-OPT003.ini
TMTL7K-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

TMTL7K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „TMTL7K-OPT003.ini“ und „TMTL7K-*
PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TMTL7K-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TMTL7K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.csv) wird im gleichen Verzeichnis eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung und der Pfad zu den **Bilddateien** hinterlegt werden.

siehe „TMTL7K-OPT003.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\TMTL7K-OPT003\  
ExternalFilePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\TMTL7K-OPT003\
```


Path = Pfad zum Verzeichnis der Messung
ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis



Hinweis: Bitte darauf achten, dass die Pfade mit „\“ (Backslash) abschließen. Die Verzeichnisüberwachung benötigt den „letzten“ Backslash.

Formularaufruf


Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

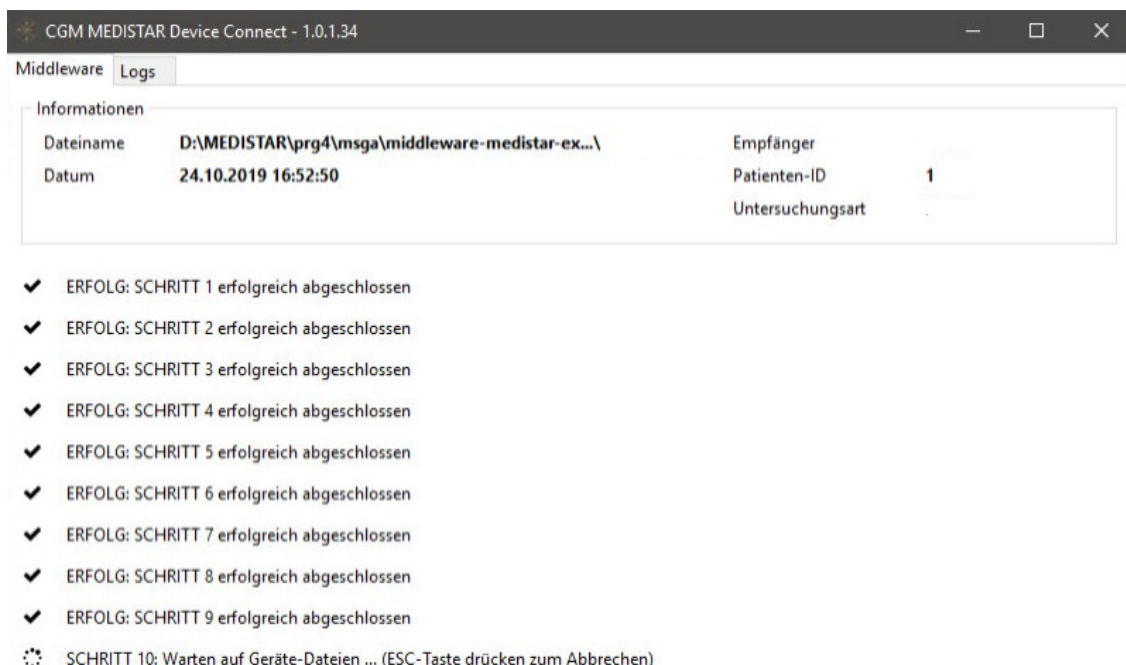

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOMEY TL-7000**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfigurationsdaten dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

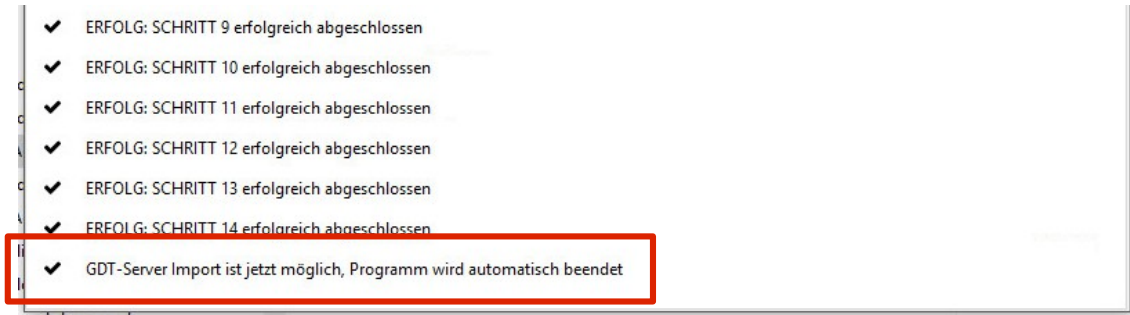

Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V0 R: UV = 0%; L: UV = 0%  
V0 R.:S=- 1.00 Z=+ 0.00* 0  
V0 L.:S=- 1.25 Z=+ 0.00* 0
```

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „TMTL7K-OPT003-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.