

Geräteanbindung TOMEY TOP-1000



<https://tomey.de/de/>

Dateiversion:	1.9.4.37
Erstellungsdatum:	02.07.2021
Letzte Aktualisierung:	10.09.2021
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Tomey GmbH
Wiesbadener Str. 21
90427 Nürnberg
Tel: 0911 – 93854620
Fax: 0911 – 938546220

Mail: info@tomey.de
Web: www.tomey.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.



Einstellungen am TOMEY TOP-1000

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.


Zur Steuerung des Gerätes muss eine Funk Tastatur / Maus Kombination an der Unterseite des Gerätes aufgesteckt werden (TOP 1000 hat nur einen funktionierenden USB Port).

Auf dem Touch-Display von links nach rechts wischen um auf die Windowsoberfläche des TOP 1000 zu kommen. Nun befindet man sich im Windows Betriebssystem (Achtung: englische Windowsversion) des TOP 1000.


Nun muss der TOP 1000 in das Praxisnetzwerk integriert werden (IP-Adresse vergeben, neuen Benutzer anlegen z. B. PRAXIS mit Kennwort).

Die Daten des TOP 1000 befinden sich auf dem Desktop im Ordner XML. Dieser Ordner muss freigegeben werden (Vollzugriff für Benutzer Praxis).

Aktivieren Sie Auto Print oder Auto Export in den EINSTELLUNGEN des Druckers. Die XML-Datei wird exportiert, wenn eine Messung abgeschlossen ist.

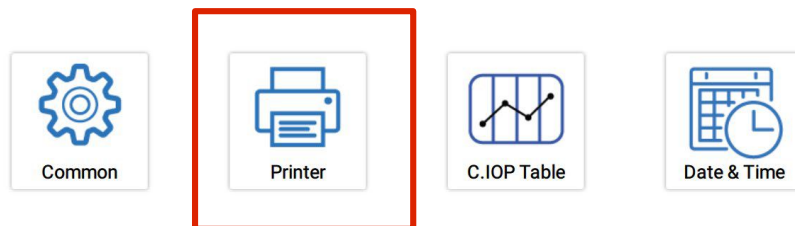

SN: 51111-1111-111
SW Version: v1.0.0.0

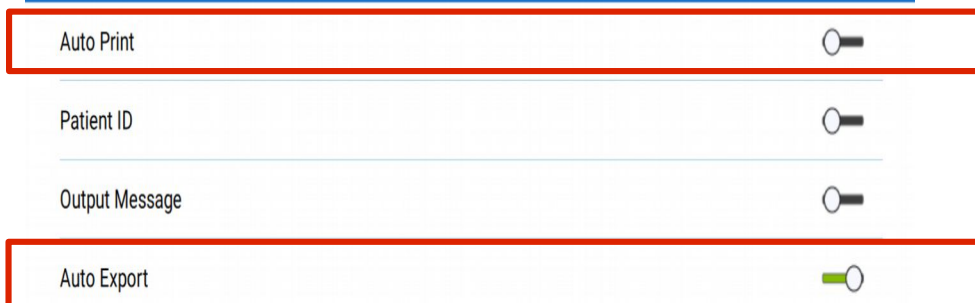

Message

tony test

So exportieren Sie die XML-Daten manuell: Drücken Sie auf der Seite MEASURE oder HISTORY die Print-Taste.

Unknown

MEASURE

00000032

Chinrest

Chinrest

Forward

Backward

Erase

Print

IOP (R) 17

(mmHg) 19

18

Avg 17.9

CCT

C.IOP

IOP (L) 23

(mmHg) 23

21

Avg 22.3

CCT

C.IOP

3 Times

L R

Start

Manual

Safety

30 | 30 mmHg

Unknown

HISTORY

00000033

00000032

00000031

00000030

00000024

00000023

00000022

00000021

00000020

00000019

OD Right

Avg.IOP 18

CCT

C.IOP

No.	Time	IOP
1	16:59:20	18
2	16:59:25	19
3	16:59:27	17

OS Left

Avg.IOP 22


CCT

C.IOP


No.	Time	IOP
1	16:59:36	21
2	16:59:37	23
3	16:59:39	23

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

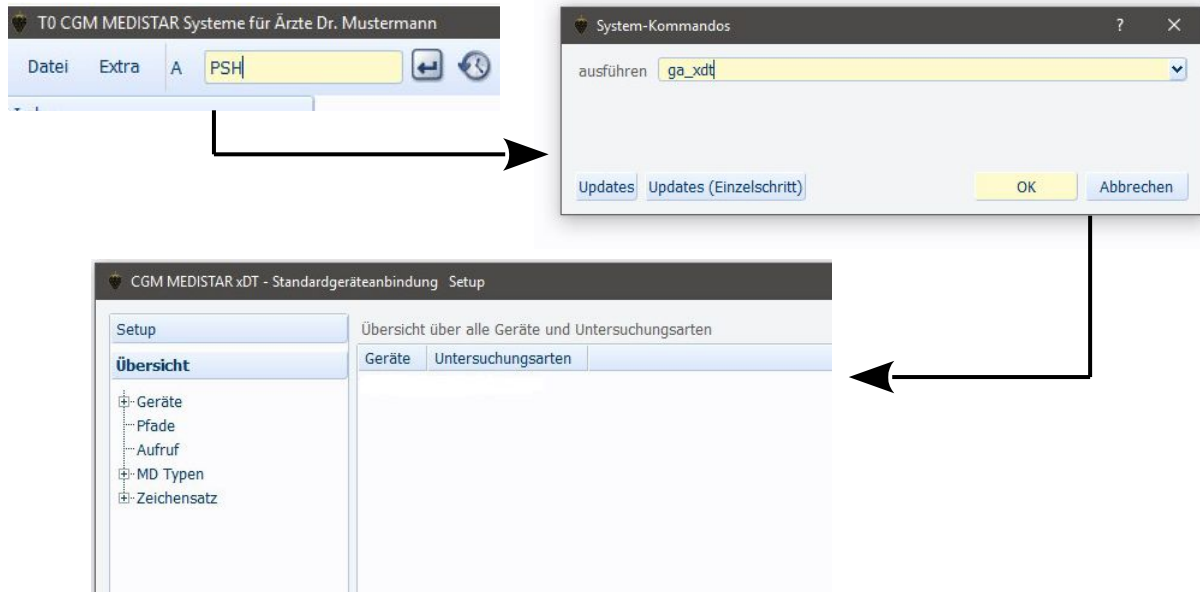

TOMEY TOP-1000 → **GDT-ID / Geräte-ID ist TOP1K**

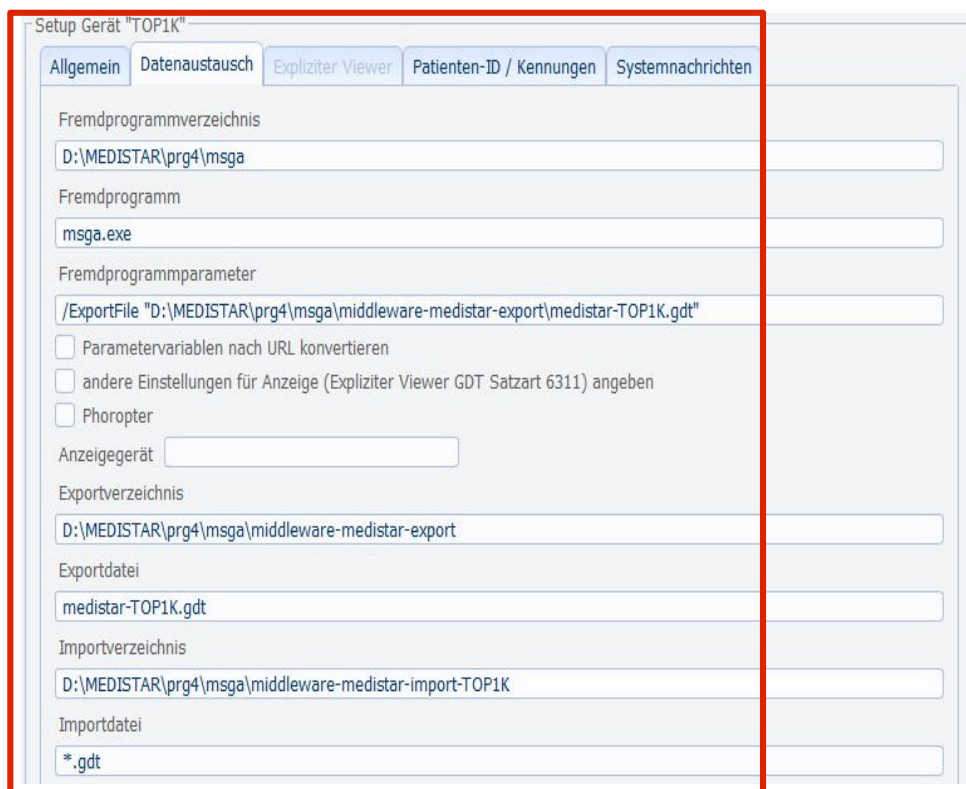

Der Gerätenamen (hier **TOP1K**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt.

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. PDF Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. PDF Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPT006, alternativ **TM01** → **Tonometer** (TM01 ist kein GDT-Standard).

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag P XD:TOP1K.OPT006 nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	
6220	Befund	P1
6221	Fremdbefund	P1
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	P0
3622/3623	Grösse/Gewicht	P
6330-6399	Freie Kategorien	P
8410-8480	Werte	P
	Arztkennzeichen	

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒			Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒			Gerätename in Kommentar
☒			Untersuchungsart in Kommentar
☒			Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒			Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒			Dateien nach PDaten verschieben
☐			Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **P** (Tonometer → Augendruck) eingegeben. Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen

fasm

Updates

Updates (Einzelschritt)

OK

Abbrechen

MS3.IO XDT2			
Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
065	Satzart 5		Satzart
066	Ziffer 5		Leistung
067	Parameter 5		Ergänzung
068	Zeilentyp 5		zusätzl.Unters.arten
069	ExportIndex 5	1	
070	Menüpunkt6	***	Menüpunkt6
071	Label 6	TOMEY TOP-1000	Beschriftung
072	Name 6	TOP1K	Gerät
073	Untersart 6	OPT006	Untersuchungsart
074	Satzart 6	6302	Satzart
075	Ziffer 6		Leistung
076	Parameter 6		Ergänzung
077	Zeilentyp 6		zusätzl.Unters.arten
078	ExportIndex 6	1	
079	Menüpunkt7	***	Menüpunkt7
080	Label 7		Beschriftung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TOP1K**

Untersuchungsart: **OPT006**

Middleware Konfiguration und PascalScript-Datei (PSC):

TOP1K-OPT006.ini

TOP1K-OPT006-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

TOP1K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „TOP1K-OPT006.ini“ und „TOP1K-OPT006-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TOP1K-OPT006.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

In der Geräte-Konfigurationsdatei „TOP1K-OPT006.ini“ muss der Pfad zur XML Datei angepasst werden. Z.B. Path=\\<IP-Adresse Gerät>\XML (Pfad zum TOP 1000).

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TOP1K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.


Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



The screenshot shows a window titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there's a section labeled "XDT" with a yellow background. It contains a table with three columns: "XDT-Anbindung", "Version", and "Datum". The values are "6 TOMEY TOP-1000", "1.4", and "02.07.21" respectively. The "6 TOMEY TOP-1000" entry is highlighted with a red box.

XDT-Anbindung	Version	Datum
6 TOMEY TOP-1000	1.4	02.07.21

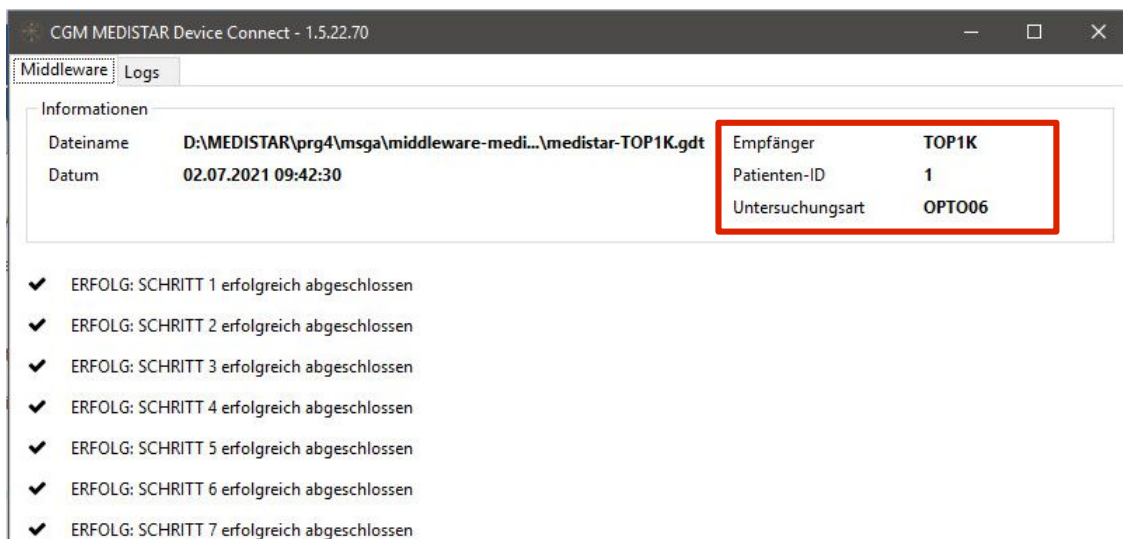

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.22.70". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a table with patient and device information. The table has two columns: "Informationen" and "Details". The "Informationen" column contains "Dateiname" and "Datum". The "Details" column contains "Empfänger", "Patienten-ID", and "Untersuchungsart". The "Details" column is highlighted with a red box.

Informationen	Details
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medi...\medistar-TOP1K.gdt
Datum	02.07.2021 09:42:30
	Empfänger TOP1K
	Patienten-ID 1
	Untersuchungsart OPT006


Below the table, there are seven log entries, all marked with a checkmark and "ERFOLG":

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOMEY TOP-1000**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die **Messung** des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden.


Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

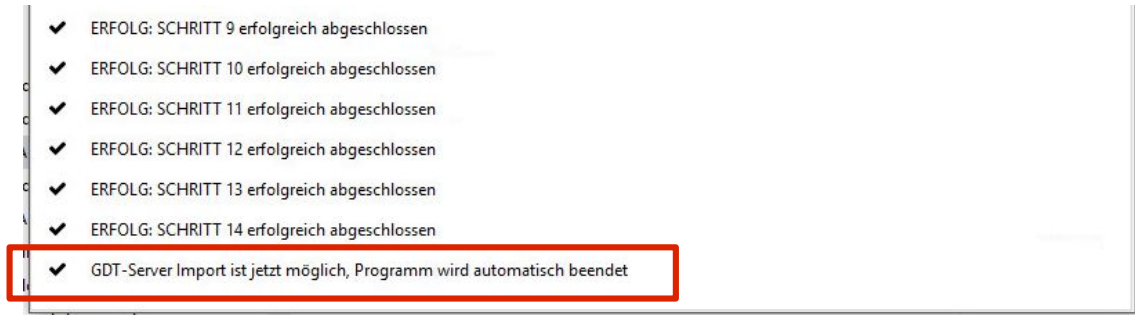

Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten nun erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig. Der **GDT-Server** kann nun automatisch (sofern gestartet) die GDT-Importdatei einlesen und verarbeiten.



Der **GDT-Server** importiert die GDT „Exportdatei“ der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

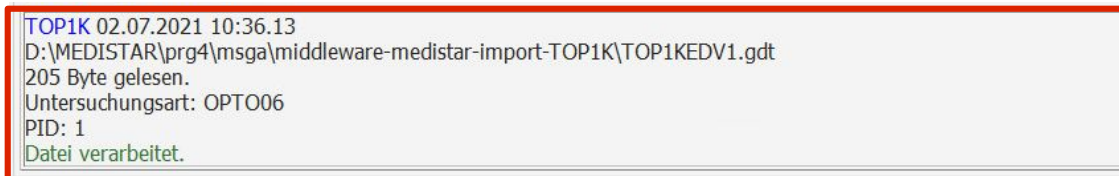

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
P1 PR: CIOP = 19.0 CCT = 483um
P1 PL: CIOP = 18.0 CCT = 499um
P  R = 17 15 14 [15.0] // L = 15 15 15 [14.0] mmHg 11:27
```

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „TOP1K-OPTO06-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Setzen Sie hier die Anzahl der IOP Messungen, welche exportiert werden
// sollen.
// Es werden Anzahl x Messungen plus der Durchschnittswert per GDT exportiert.
// Die Anzahl muss zwischen 1 und 99 liegen.
MeasurementIopCount:= 3;
```

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Script-Dateien verwendet werden.