

TOPCON CL-300PDL

Lensmeter



<https://www.topcon-medical.de/>

Dateiversion:	1.9.6.15
Erstellungsdatum:	09.07.2020
Letzte Aktualisierung:	09.07.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 41
D - 47877 Willich
Germany

T: +49 21 548850
F: +49 21 54885177
E: info@topcon-medical.de
W: www.topcon-medical.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist **nicht** möglich. **Patientennummer** sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.



Abbildung 1:

Einstellungen am TOPCON CL-300PDL


Das Setup des **TOPCON CL-300PDL** wird durch den Touchscreen vorgenommen. Hierzu rechts oben auf das „Schraubenschlüssel“ Symbol drücken.




i Bitte beachten Sie, dass es zwei unterschiedliche Modelle gibt. Das CL-300PL hat lediglich eine serielle Schnittstelle, das **CL-300PDL** verfügt über eine serielle, sowie Netzwerkschnittstelle.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

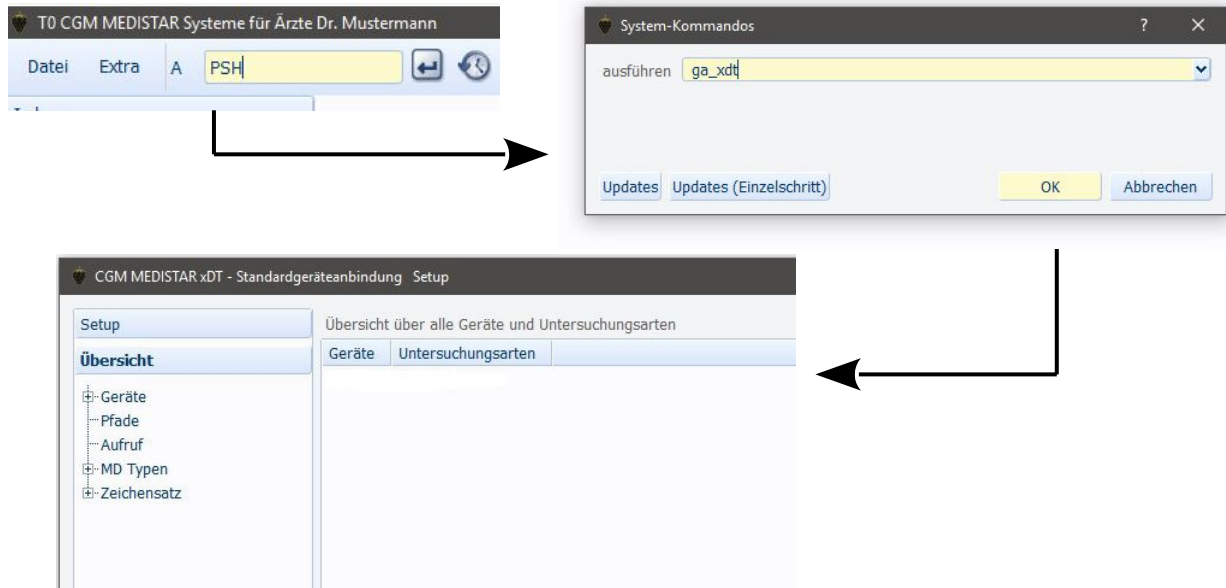

CL3PDL → TOPCON CL-300PDL → **GDT-ID / Geräte-ID ist CL3PDL**

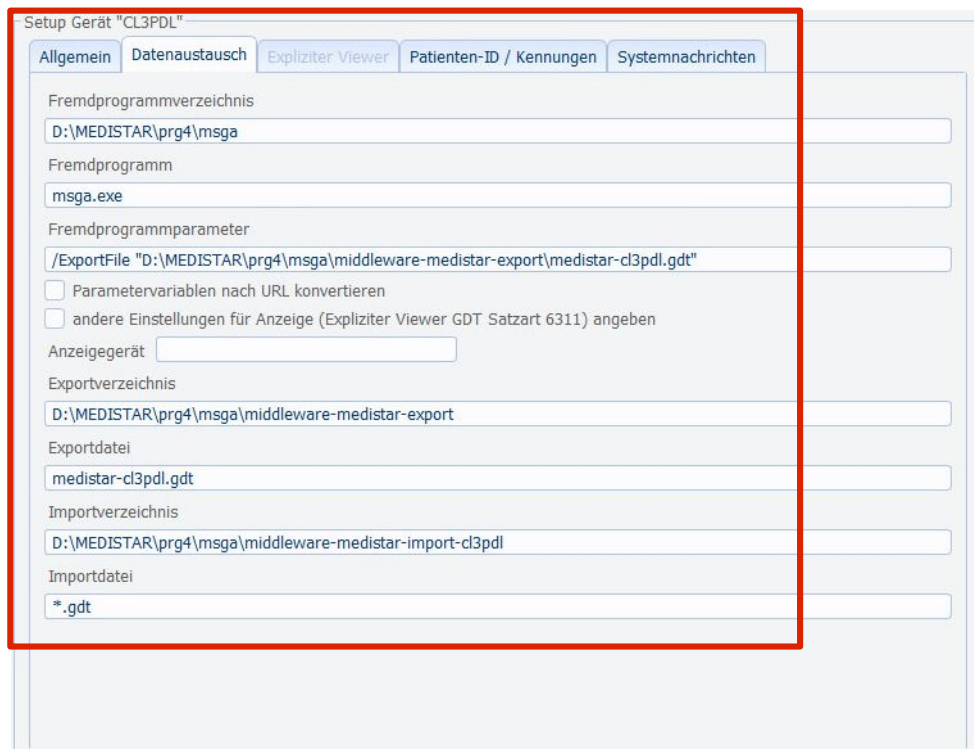

Der Gerätenamen (hier **CL3PDL**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "CL3PDL"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) CL3PDL

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Neue Untersuchungsarten anlegen z.B. Untersuchungsart **OPT003** → LM Data (Lensmeter).

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz: **Windows** ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': **Behandlung+Messung** ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen: **Nur EBM** ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis: **Messung vorziehen** ▼

Zeichensatz: **Windows** ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Setup Gerät "CL3PDL" Untersuchungsart "OPT003"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V0
8432/8439	Verweis Messung	V0
6302-6305	Verweis Link	V0
6205	Diagnose	V0
6220	Befund	V0
6221	Fremdbefund	V0
6227	Kommentar	V0
6228	Ergebnis	V0
8990	Signatur	V0
3622/3623	Grösse/Gewicht	V0
6330-6399	Freie Kategorien	V0
8410-8480	Werte	V0
Arztkennzeichen		

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen


- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Kommentar

Viewer

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

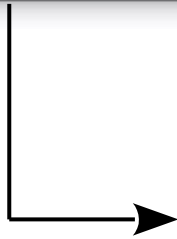

FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
058	Parameter 4		Ergänzung
059	Zeilentyp 4		zusätzl.Unters.arten
060	ExportIndex 4	4	
061	Menüpunkt5	***	Menüpunkt5
062	Label 5	TOPCON CL-300PDL	Beschriftung
063	Name 5	CL3PDL	Geraet
064	Untersart 5	OPT003	Untersuchungsart
065	Satzart 5	6302	Satzart
066	Zieler 5		Leistung
067	Parameter 5		Ergänzung
068	Zeilentyp 5		zusätzl.Unters.arten
069	ExportIndex 5	1	
070	Menüpunkt6	***	Menüpunkt6
071	Label 6		Beschriftung
072	Name 6		Geraet
073	Untersart 6		Untersuchungsart

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **CL3PDL**

Untersuchungsart: **OPT003**

OPT003 → LM Data (Lensmeter)

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

CL3PDL-OPT003.ini

CL3PDL-OPT003-scheme-01.xml

Middleware Lizenzdatei:

CL3PDL.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „CL3PDL-OPT003.ini“ und „CL3PDL-OPT003-scheme-01.xml“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „CL3PDL-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „CL3PDL.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. Inside, there's a section labeled 'XDT' with a yellow background. It contains a table with three columns: 'XDT-Anbindung', 'Version', and 'Datum'. The values are '5 TOPCON CL-300PDL', '1.4', and '09.07.20' respectively. The 'XDT-Anbindung' cell is highlighted with a red box.

The screenshot shows a window titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.11.58'. It has two tabs: 'Middleware' and 'Logs'. The 'Middleware' tab is active, showing a table with 'Dateiname' and 'Datum'. The 'Dateiname' is 'D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medis...\medistar-cl3pdl.gdt' and the 'Datum' is '09.07.2020 15:55:32'. To the right, there's a table with 'Empfänger', 'Patienten-ID', and 'Untersuchungsart'. The values are 'CL3PDL', '1', and 'OPT003' respectively. Below this, there's a list of logs with 9 steps, all marked 'ERFOLG: SCHRITT X erfolgreich abgeschlossen'. The 10th step is 'SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)' and is highlighted with a red box.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „TOPCON CL-300PDL“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden.

 Die Anwendung sollte über das Formular „initial“ einmal gestartet werden, damit alle eventuell fehlenden Verzeichnis angelegt werden können. Weiterhin kann dann am Gerät das Exportverzeichnis direkt auf das Importverzeichnis der Middleware eingestellt werden.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V0 XD:CL3PDL.OPTO03
V0 R.:S= -0.25 Z= -1.00 * 91 P=0.00 O 0.00 D
V0 R.:S= +0.00 Z= -1.00 * 87 P=0.00 I 0.00 D
```

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.