

TOPCON KR-1

automatischer Kerato-Refraktometer



<https://www.topcon-medical.de/>

Dateiversion:	1.9.6.11
Erstellungsdatum:	12.04.2019
Letzte Aktualisierung:	04.11.2019
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 41
D - 47877 Willich
Germany

T: +49 21 548850
F: +49 21 54885177
E: info@topcon-medical.de
E: service@topcon-medical.de
W: www.topcon-medical.de

Allgemeines


Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.



Einstellungen am TOPCON KR-1

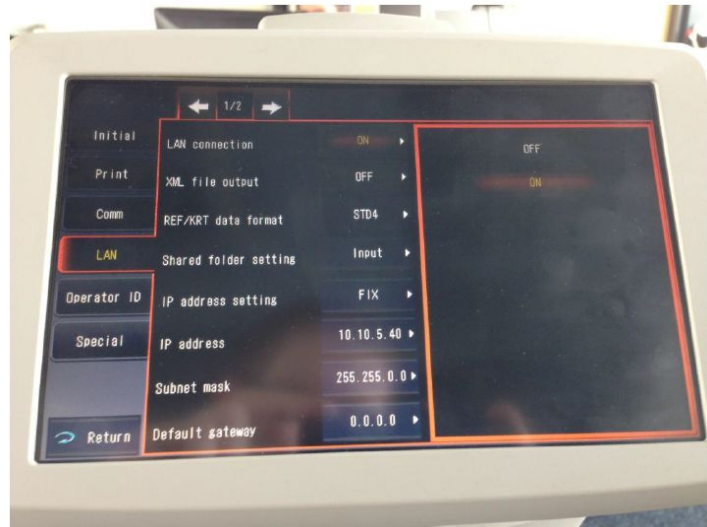

Das Setup des **TOPCON KR-1** wird durch den Touchscreen vorgenommen. Hierzu rechts oben auf das „Schraubenschlüssel“ Symbol drücken.


Die die für die Übertragung wichtigen Einstellungen in Kürze:

Initial(1/4)	Auto print Printer output	OFF/ON OFF
Comm	Output data format Communication Format Use of Output port Baudrate setting	ALL STD4 OFF 9600bps
LAN	LAN Connection XML file output REF /KRT Data format IP address setting Shared folder (32) User name(32) Password(16)	ON ON STD4 AUTO ***.***.***.***\RP ***** *****


Je nach Gegebenheiten in der Praxis sind diese und weitere Einstellungen im LAN Bereich vorzunehmen.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

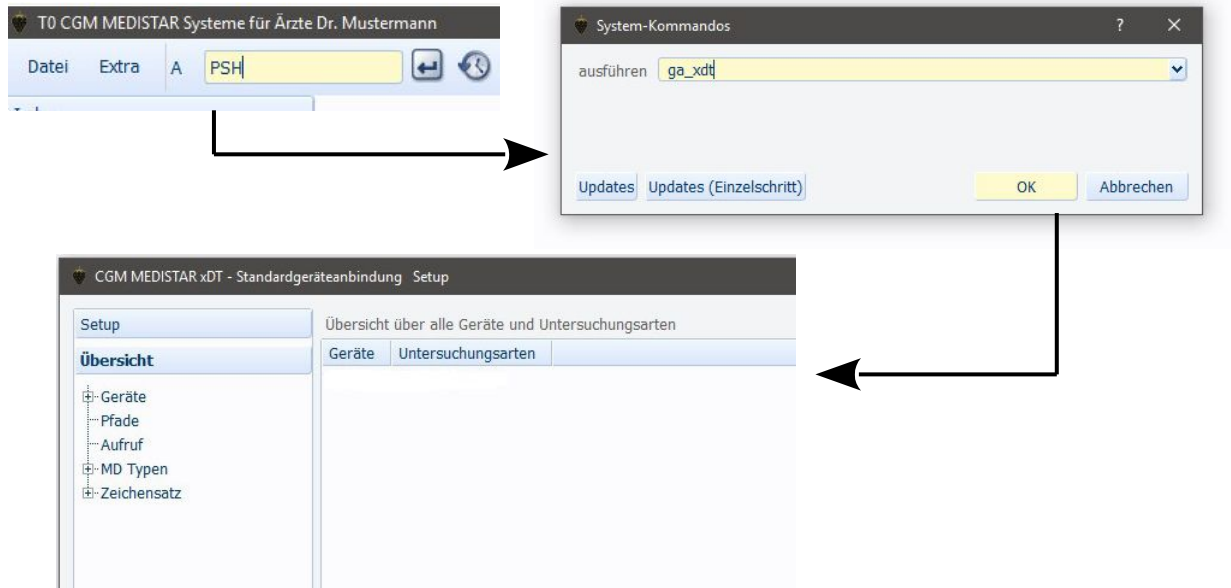

KR1 → TOPCON KR-1 → **GDT-ID / Geräte-ID ist KR1**

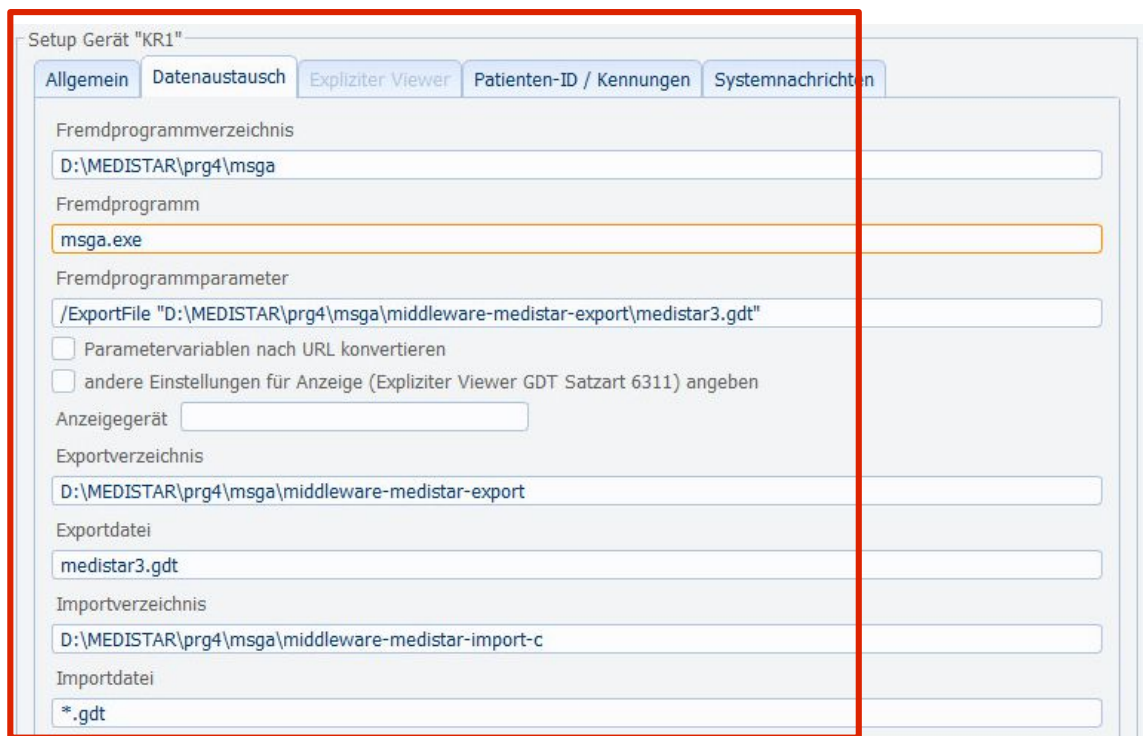

Der Gerätenamen (hier **KR1**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt.

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "KR1"

Allgemein **Datenaustausch** Expliziter Viewer Patienten-ID / Kennungen Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10 ▼**

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **KR1**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Neue Untersuchungsarten anlegen z.B.

Untersuchungsart **REF01** → REF Data (Refraktometer REF) und **KM01** für Kerato-Refraktometer, KRT / KM).

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Untersuchungsart

Export	Import
Standard	Standard
REF01	REF01

Neu Löschen

Übersicht

Setup Gerät "KR1" Untersuchungsart "REF01"

Export **Import** MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' **Behandlung+Messung**

Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "KR1" Untersuchungsart "REF01"

Export **Import** MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Setup Gerät "KR1" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V1
8432/8439	Verweis Messung	V1
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V1
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät "KR1" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach Daten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Setup Gerät "KR1" Untersuchungsart "KM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V7
8432/8439	Verweis Messung	V7
6302-6305	Verweis Link	V7
6205	Diagnose	V7
6220	Befund	V7
6221	Fremdbefund	V7
6227	Kommentar	V7
6228	Ergebnis	V7
8990	Signatur	V7
3622/3623	Grösse/Gewicht	V7
6330-6399	Freie Kategorien	V7
8410-8480	Werte	V7

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
049	Parameter 3		Ergänzung
050	Zeilentyp 3		zusätzl. Unters. arten
051	ExportIndex 3	3	
052	Menüpunkt 4	***	Menüpunkt 4
053	Label 4	TOPCON KR-1	Beschriftung
054	Name 4	KR1	Geraet
055	Untersart 4	REF01, KM01	Untersuchungsart
056	Satzart 4	6302	Satzart
057	Zeiler 4		Leistung
058	Parameter 4		Ergänzung
059	Zeilentyp 4		zusätzl. Unters. arten
060	ExportIndex 4	4	
061	Menüpunkt 5	***	Menüpunkt 5
062	Label 5	Nidek Tonoref 3	Beschriftung
063	Name 5	TONOREF3	Geraet
064	Untersart 5	REF01, KM01, TM01, PM01	Untersuchungsart

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **KR1**

Untersuchungsart: **REF01,KM01**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

KR1-REF01,KM01.ini

KR1-REF01-scheme-01.xml

KR1-KM01-scheme-01.xml

Middleware Lizenzdatei:

KR1.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).


Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „KR1-REF01,KM01.ini“ und „KR1-*-scheme-01.xml“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „KR1-REF01,KM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „KR1.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

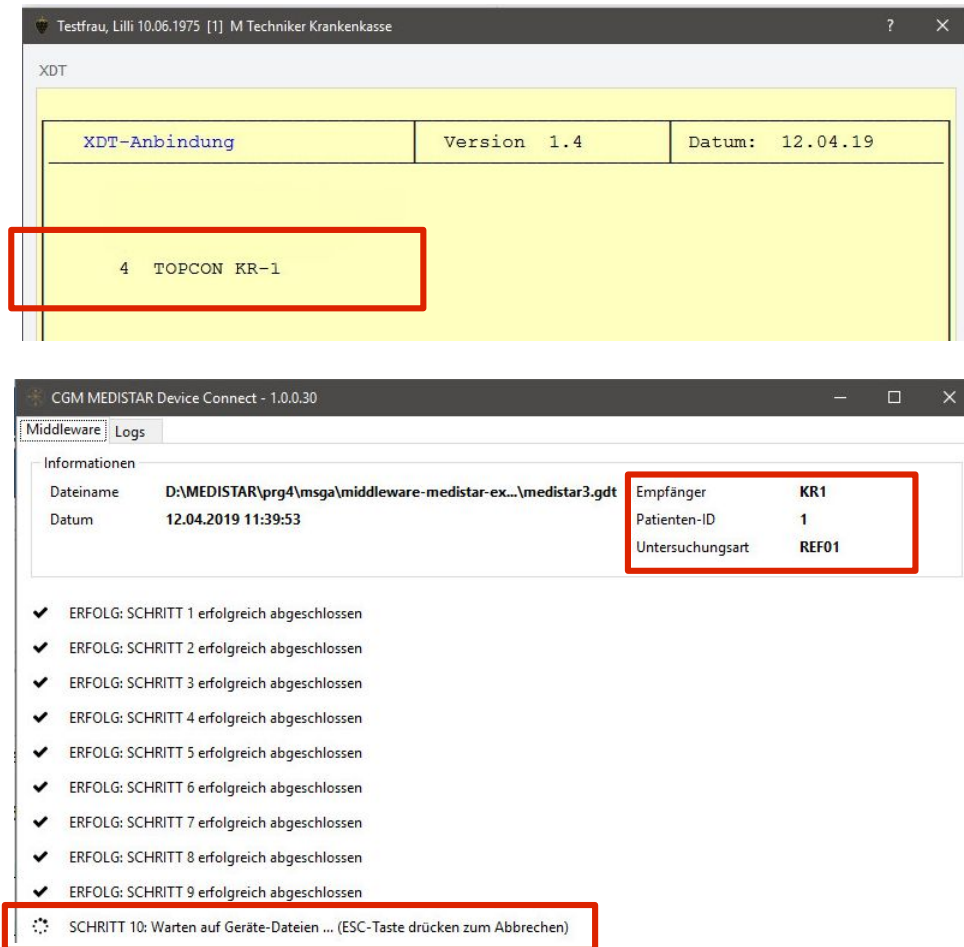

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOPCON KR-1**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muß mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese ID am Gerät eingegeben werden.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 XD:KR1.REF01
V1 R.:S=+ 1.00 Z=+ 0.0*0 PD= 62.00 VD= 13.75
V1 L.:S=+ 0.75 Z=+ 0.0*0
V7 XD:KR1.KM01
V7 R: R1=+ 8.00*166 R2=+ 7.91*76 // L: R1=+ 8.06*173 R2=+ 7.89*83
V7 R: AV=+ 7.96 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 7.98 CYL=- 1.00
```

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.