

Geräteanbindung TOPCON SOLOS

Lensmeter



<https://topconhealthcare.eu/>

Dateiversion:	1.9.8.12
Erstellungsdatum:	24.11.2022
Letzte Aktualisierung:	02.11.2023
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am TOPCON SOLOS.....	4
CGM Medistar Konfiguration.....	5
Middleware Einstellungen.....	8
Anpassung der MD-Formatierung.....	9
Ergebnis in Medistar.....	12

Technischer Ansprechpartner

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 41
D - 47877 Willich
Germany

T: +49 21 548850
F: +49 21 54885177
E: info@topcon-medical.de
W: www.topcon-medical.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am TOPCON SOLOS

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden und ein freigegebener Ordner muss im Netzwerk verfügbar sein.


Export unter Formate Joia=Komplett und PDF = A4 einstellen.

In den Einstellungen des Gerätes gibt es die Option die Pat-ID vor Export anzugeben. Beim Export der zuerst gemessenen Brille kommt diese Abfrage auch. Nach Messung und Export der nächsten Brillen leider nicht. Es steht immer noch die zuerst eingestellt PAT-ID.

Eine Einstellung, dass nach Export die Werte am Gerät gelöscht werden, konnte nicht gefunden werden. Hier kann in der Device INI-Datei der Parameter IgnorePatientID=1 helfen.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.

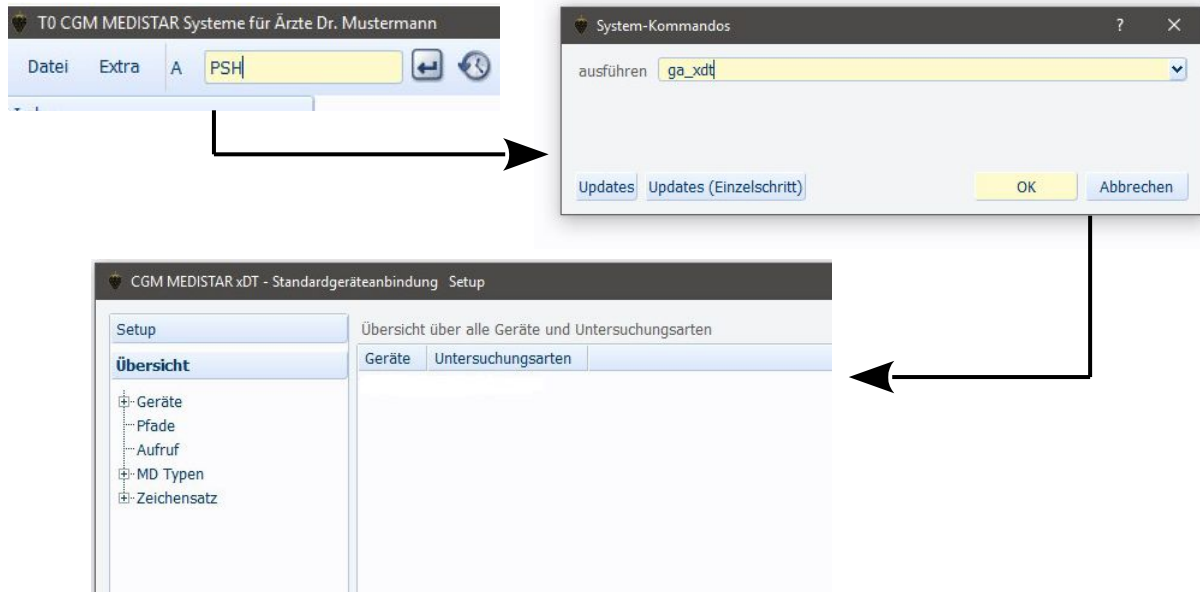

TOPCON SOLOS → **GDT-ID / Geräte-ID ist TSOLOS**

The screenshot shows the 'Setup Gerät TSOLOS' configuration window. The 'Allgemein' tab is selected. The configuration fields are as follows:

- Fremdprogrammverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm: msga.exe
- Fremdprogrammparameter: /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-TSOLOS.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- ☐ Phoropter
- Anzeigegerät: (empty field)
- Exportverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei: medistar-TSOLOS.gdt
- Importverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-TSOLOS
- Importdatei: *.gdt

Der Gerätenamen (hier **TSOLOS**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

i Hinweis: Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG** Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. **JPG** Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "TSOLOS"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | Patienten-ID / Kennungen | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) TSOLOS

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPT003, alternativ **LENSM01** (nicht GDT-Standard).

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
Feldkennung Art der Daten			
6200/6201	Verweis		
8432/8439	Verweis Messung		
6302-6305	Verweis Link		
6205	Diagnose	V0	
6220	Befund	V0	
6221	Fremdbefund	V0	
6227	Kommentar	N	
6228	Ergebnis	V0	
8990	Signatur	V0	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V0	
6330-6399	Freie Kategorien	V0	
8410-8480	Werte	V0	
Arztkennzeichen			

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒			Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒			Gerätename in Kommentar
☒			Untersuchungsart in Kommentar
☒			Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☐			Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒			Dateien nach PDaten verschieben
☐			Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N (oder alternativ Y)** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos
?
×

ausführen fasm

Updates
Updates (Einzelschritt)
OK
Abbrechen



FASM
?
×

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
049	Parameter 3		Ergänzung
050	Zeilentyp 3		zusätzl. Unters. arten
051	ExportIndex 3	3	
052	Menüpunkt4	***	Menüpunkt4
053	Label 4	TOPCON SOLOS	Beschriftung
054	Name 4	TSOLOS	Geraet
055	Untersart 4	OPT003	Untersuchungsart
056	Satzart 4	6302	Satzart
057	Ziffer 4		Leistung
058	Parameter 4		Ergänzung
059	Zeilentyp 4		zusätzl. Unters. arten
060	ExportIndex 4	4	
061	Menüpunkt5	***	Menüpunkt5
062	Label 5		Beschriftung
063	Name 5		Geraet
064	Untersart 5		Untersuchungsart

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TSOLOS**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Schema-/ Scriptdatei (XML, PSC):

TSOLOS-OPT003.ini

TSOLOS-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

TSOLOS.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „TSOLOS-OPT003.ini“ und „TSOLOS-OPT003-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TSOLOS-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TSOLOS.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „TSOLOS-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Aktiviere den Import aller externen Bildquellen.  
// Verwende "True", damit der Import aktiviert ist, benutze "False", damit Bilder  
// nicht importiert und per GDT weiterverarbeitet werden.  
bolAddExternalFilesToGdtFile:= False;  
  
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er  
// vom Gerät kommt  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus GDT_SIGN_SEPARATOR  
// angefügt wird,  
// benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert eingefügt wird  
bolAddSignSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird  
bolAddAxisSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Prism und Base Wert angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Prism und Base Wert nicht verwendet wird  
bolAddPrismAndBaseToOutput:= False;  
  
// Verwende "True", damit der Prism X und Y Wert angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Prism X und Y Wert nicht verwendet wird  
bolAddPrismXandYToOutput:= True;
```

Speichern Sie die Datei unter selben Namen wieder ab.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 24.11.22
4 TOPCON SOLOS		

Informationen	
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-med...\medistar-TSOLOS.gdt
Datum	24.11.2022 11:03:55

Empfänger	TSOLOS
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	OPT003

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOPCON SOLOS**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

 **Hinweis:** Die Anwendung solte über das Formular „initial“ einmal gestartet werden, damit alle eventuell fehlenden Verzeichnis angelegt werden können. Weiterhin kann dann am Gerät das Exportverzeichnis direkt auf das Importverzeichnis der Middleware eingestellt werden.

Die Messung des Patienten muss/sollte mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein **Beispiel** für den Rückeintrag:

```
N   R: UV = 83%; L: UV = 85%
V0  R.:S=+ 1.50 Z=- 0.50*128 P= 0.75 O 2.00 D A=+ 1.50
V0  L.:S=- 0.25 Z=- 1.00* 58 P= 0.75 I 1.75 D A=+ 1.25
```

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.