

TOPCON TRK-2P

Refraktometer, Keratometer,
Non-Contact Tonometer, Pachymeter



<https://www.topcon-medical.de/>

Dateiversion:	1.9.6.24
Erstellungsdatum:	03.04.2019
Letzte Aktualisierung:	29.10.2019
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 41
D - 47877 Willich
Germany


T: +49 21 548850
F: +49 21 54885177
E: info@topcon-medical.de
W: www.topcon-medical.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.


Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

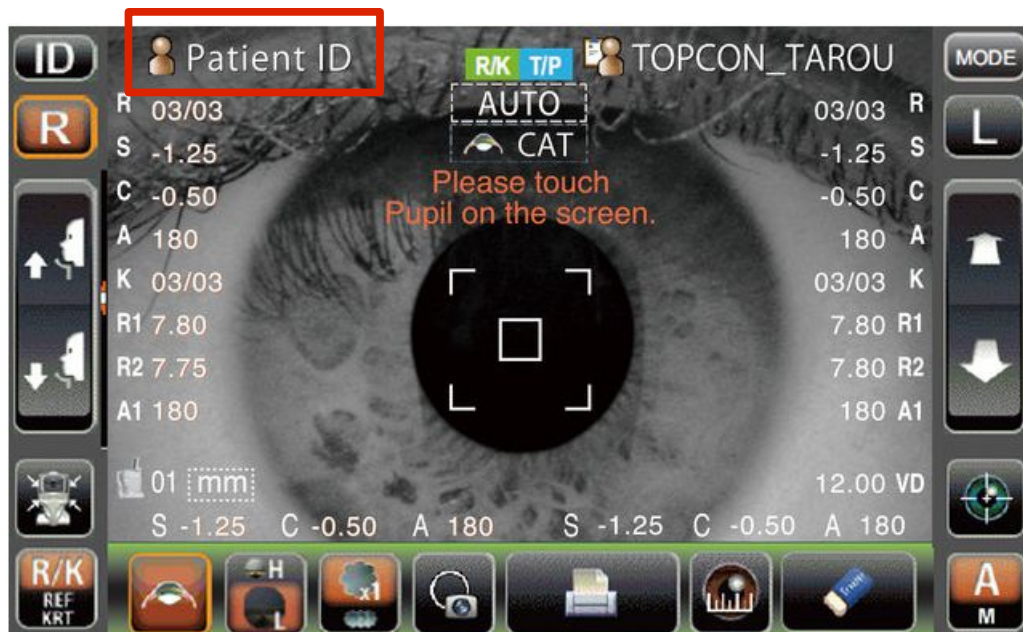


Einstellungen am TOPCON TRK-2P



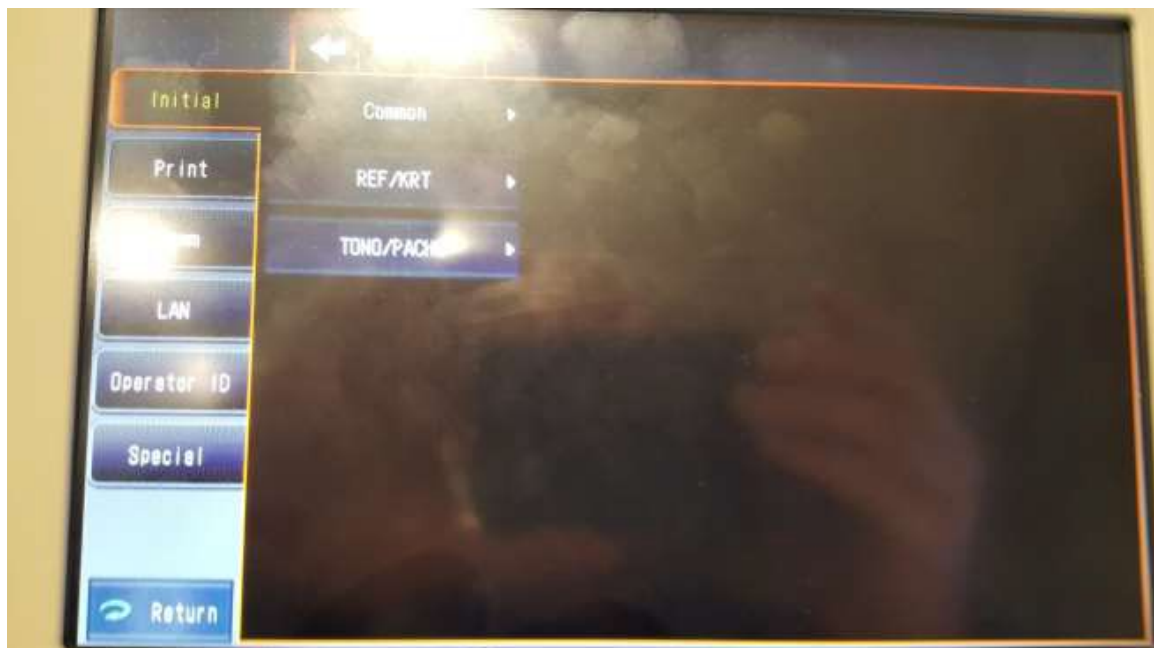


CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

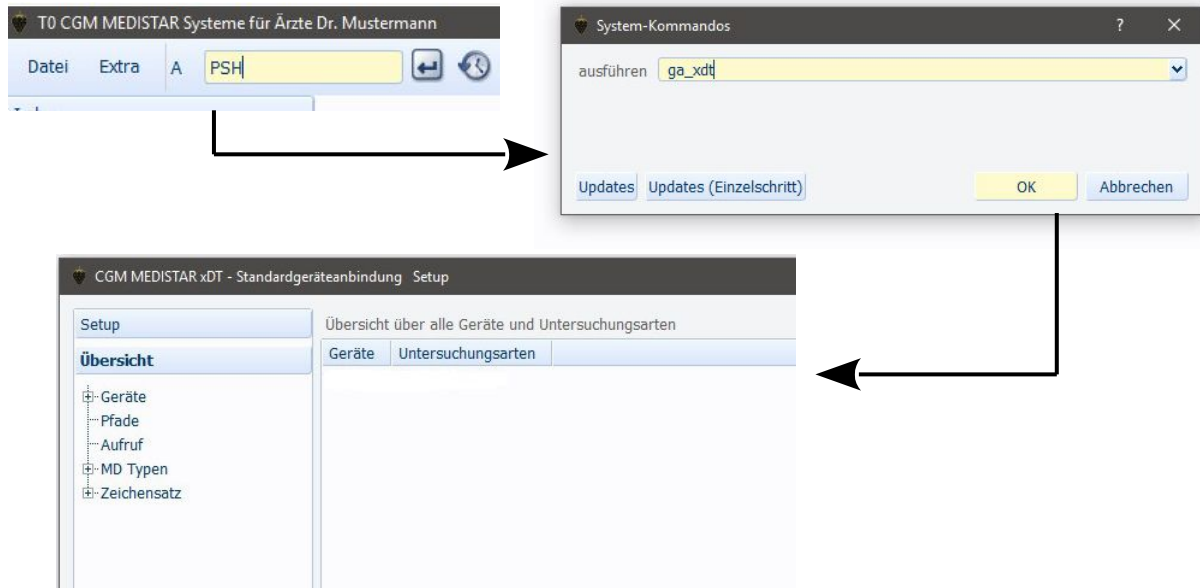

TRK2P → TOPCON TRK-2P → **GDT-ID / Geräte-ID ist TRK2P**

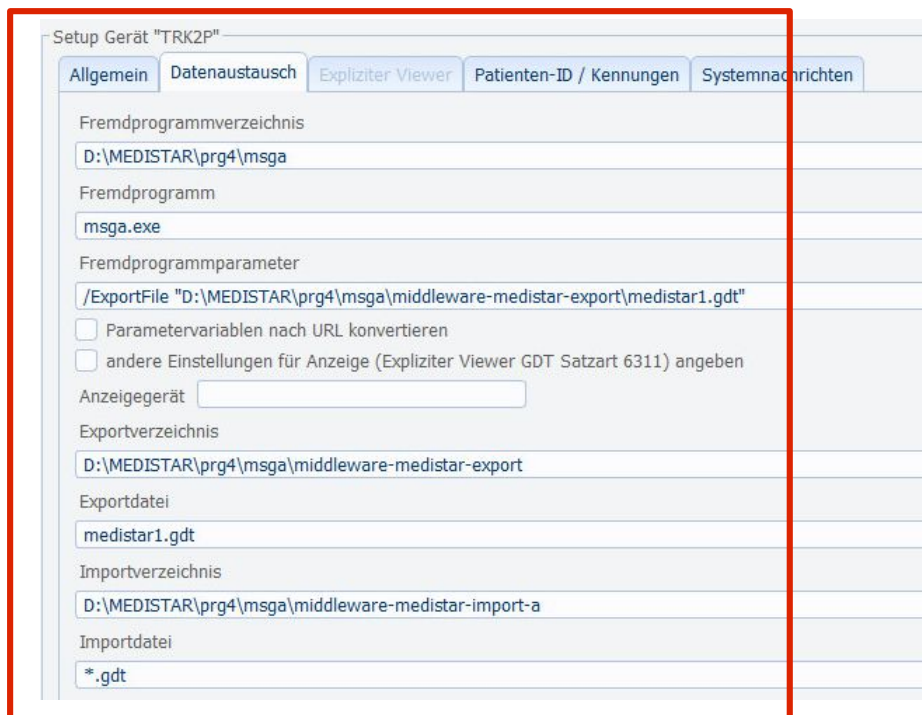

Der Gerätenamen (hier **TRK2P**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "TRK2P"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **TRK2P**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsarten: REF01, KM01, TM01, PM01 (Refraktometer, Keratometer, Tonometer und Pachymeter)

Für dieses Gerät müssen alle vier Untersuchungsarten erstellt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich nur in der Zuweisung des MD-Eintrags.

Bitte erstellen Sie die Einträge für **V1 = REF01**, **V7 = KM01**, **P = TM01** und **Y = PM01**.

Untersuchungsart

Export	Import
PM01	PM01
TM01	TM01
KM01	KM01
Standard	Standard
REF01	REF01

Neu Löschen

Übersicht

Setup Gerät "TRK2P" Untersuchungsart "REF01"

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': **Behandlung+Messung**

Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Setup Gerät "TRK2P" Untersuchungsart "REF01"

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis: **Messung vorziehen**

Zeichensatz: **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Die unterschiedlichen Untersuchungsarten werden über die MD-Zeilentypen zugewiesen.

Setup Gerät "TRK2P" Untersuchungsart "REF01"

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V1
8432/8439	Verweis Messung	V1
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V1
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät "TRK2P" Untersuchungsart "REF01"

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätenamen in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDaten verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Setup Gerät "TRK2P" Untersuchungsart "KM01"

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V7
8432/8439	Verweis Messung	V7
6302-6305	Verweis Link	V7
6205	Diagnose	V7
6220	Befund	V7
6221	Fremdbefund	V7
6227	Kommentar	V7
6228	Ergebnis	V7
8990	Signatur	V7
3622/3623	Grösse/Gewicht	V7
6330-6399	Freie Kategorien	V7
8410-8480	Werte	V7
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät "TRK2P" Untersuchungsart "PM01"

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	Y
8432/8439	Verweis Messung	Y
6302-6305	Verweis Link	Y
6205	Diagnose	Y
6220	Befund	Y
6221	Fremdbefund	Y
6227	Kommentar	Y
6228	Ergebnis	Y
8990	Signatur	Y
3622/3623	Grösse/Gewicht	Y
6330-6399	Freie Kategorien	Y
8410-8480	Werte	Y
Arztkennzeichen		

Setup Gerät "TRK2P" Untersuchungsart "TM01"

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	P
8432/8439	Verweis Messung	P
6302-6305	Verweis Link	P
6205	Diagnose	P
6220	Befund	P
6221	Fremdbefund	P
6227	Kommentar	Y
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	P
3622/3623	Grösse/Gewicht	P
6330-6399	Freie Kategorien	P
8410-8480	Werte	P
Arztkennzeichen		

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm



FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
033	ExportIndex 1	1	
034	Menüpunkt2	***	Menüpunkt2
035	Label 2	TOPCON TRK-2P	Beschriftung
036	Name 2	TRK2P	Geraet
037	Untersart 2	REF01,KM01,TM01,PM01	Untersuchungsart
038	Satzart 2	6302	Satzart
039	Ziffer 2		Leistung
040	Parameter 2		Ergänzung
041	Zeilentyp 2		zusätzl.Unters.arten
042	ExportIndex 2	2	
043	Menüpunkt3	***	Menüpunkt3
044	Label 3	TOPCON KR-800S	Beschriftung
045	Name 3	KR800S	Geraet
046	Untersart 3	REF01,KM01	Untersuchungsart
047	Satzart 3	6302	Satzart
048	Ziffer 3		Leistung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TRK2P**

Untersuchungsart: **REF01,KM01,TM01,PM01**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

TRK2P-REF01,KM01,TM01,PM01.ini

TRK2P-REF01-scheme-01.xml

TRK2P-KM01-scheme-01.xml

TRK2P-TM01-scheme-01.xml

TRK2P-PM01-scheme-01.xml

Middleware Lizenzdatei:

TRK2P.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „TRK2P-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“ und „TRK2P-REF01-scheme-01.xml“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TRK2P-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TRK2P.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.


The screenshot shows a window titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. Inside, there's a form with a yellow background. At the top, it says 'XDT'. Below that, there's a table with three columns: 'XDT-Anbindung', 'Version 1.4', and 'Datum: 03.04.19'. In the 'XDT-Anbindung' column, there's a red box containing the text '2 TOPCON TRK-2P'.

The screenshot shows a window titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.1.34'. It has two tabs: 'Middleware' and 'Logs'. The 'Middleware' tab is active. Under 'Informationen', there's a table with two columns: 'Dateiname' and 'Datum'. The 'Dateiname' is 'D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-ex-...\medistar1.gdt' and the 'Datum' is '29.10.2019 09:08:26'. To the right of this table, there's another table with two columns: 'Empfänger' and 'Patienten-ID'. The 'Empfänger' is 'TRK2P' and the 'Patienten-ID' is '1'. Below this, there's a table with two columns: 'Untersuchungsart' and 'REF01,KM01,TM01,...'. Below the 'Informationen' section, there's a list of steps with checkboxes. The first nine steps are marked with a checkmark and the text 'ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen' through 'ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen'. The tenth step is marked with a gear icon and the text 'SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)'. This step is highlighted with a red box.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOPCON TRK-2P**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

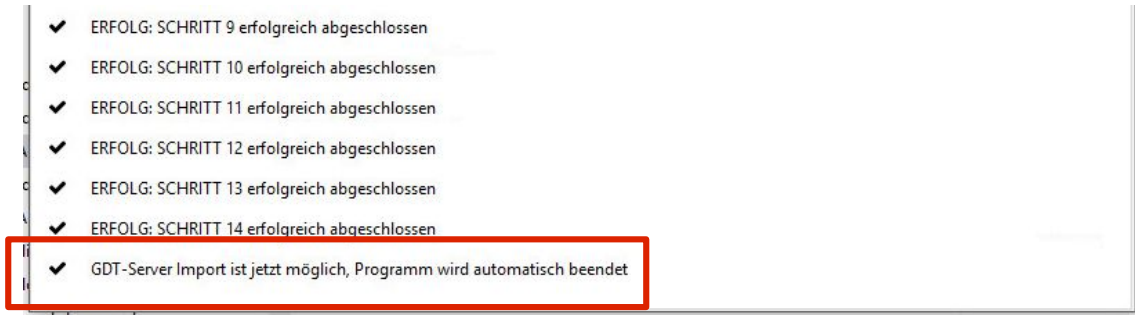

Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 XD:TRK2P.REF01
V1 R.:S=+ 1.00 Z=- 0.25*141 PD= 68.0 VD= 13.75
V1 L.:S=+ 1.00 Z=- 0.25*27
V7 XD:TRK2P.KM01
V7 R: R1=+ 8.30*168 R2=+ 8.12*78 // L: R1=+ 8.32*11 R2=+ 8.14*101
V7 R: AV=+ 8.21 CYL=- 0.75 // L: AV=+ 8.23 CYL=- 1.00
P XD:TRK2P.TM01
Y PR: Gemessen = 13.7 mmHg; Korrigiert = 16.2 mmHg;
Y PR: Param1 = 0.545mm; Param2 = 0.050; CCT = 0.495mm
Y PL: Gemessen = 15.0 mmHg; Korrigiert = 18.0 mmHg;
Y PL: Param1 = 0.545mm; Param2 = 0.050; CCT = 0.485mm
P R = 14.0 13.0 14.0 [13.7] // L = 15.0 15.0 15.0 [15.0] mmHg 09:10
Y XD:TRK2P.PM01
Y PR: 0.580 0.580 [0.578] mm
Y LR: 0.570 0.570 [0.572] mm
```

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.