

TOPCON TRK-3



<https://www.topcon-medical.de/>

Dateiversion: 1.9.6.10
Erstellungsdatum: 01.07.2025
Letzte Aktualisierung: 01.07.2025
Autor: kai-oliver.zirlewagen@cgm.com

Technischer Ansprechpartner

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 41
D - 47877 Willich
Germany

T: +49 21 548850
F: +49 21 54885177
E: info@topcon-medical.de
W: www.topcon-medical.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.


Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am TOPCON TRK-3


Das Gerät muss per LAN ans lokale Netzwerk angeschlossen werden. Das Gerät speichert per SMB-Freigabe die XML-Messung ab.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

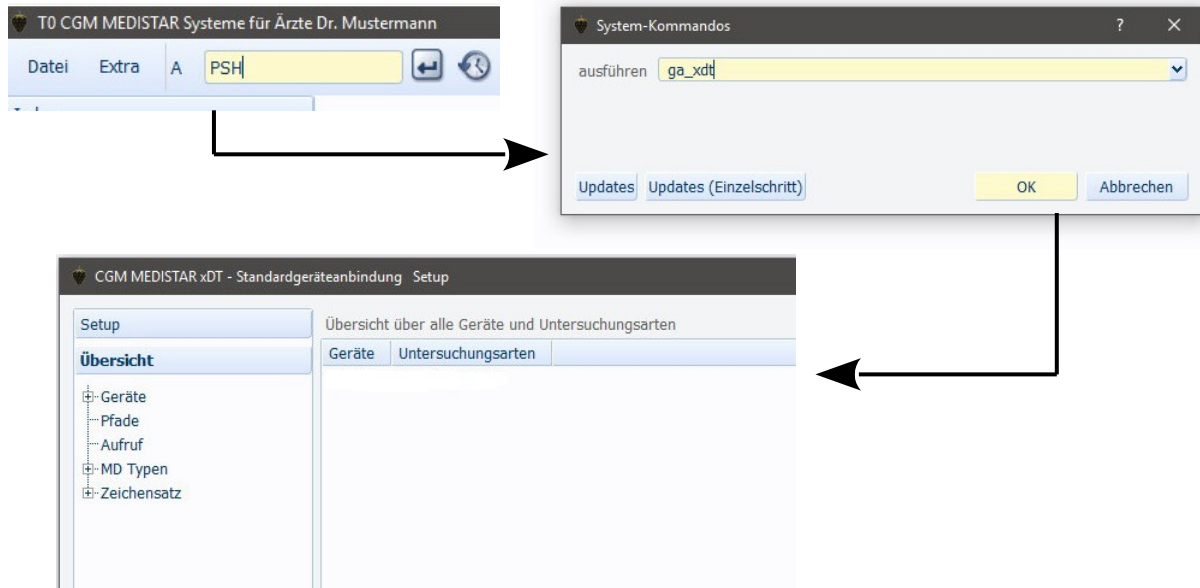

TRK3 → TOPCON TRK-3 → **GDT-ID / Geräte-ID ist TRK3**

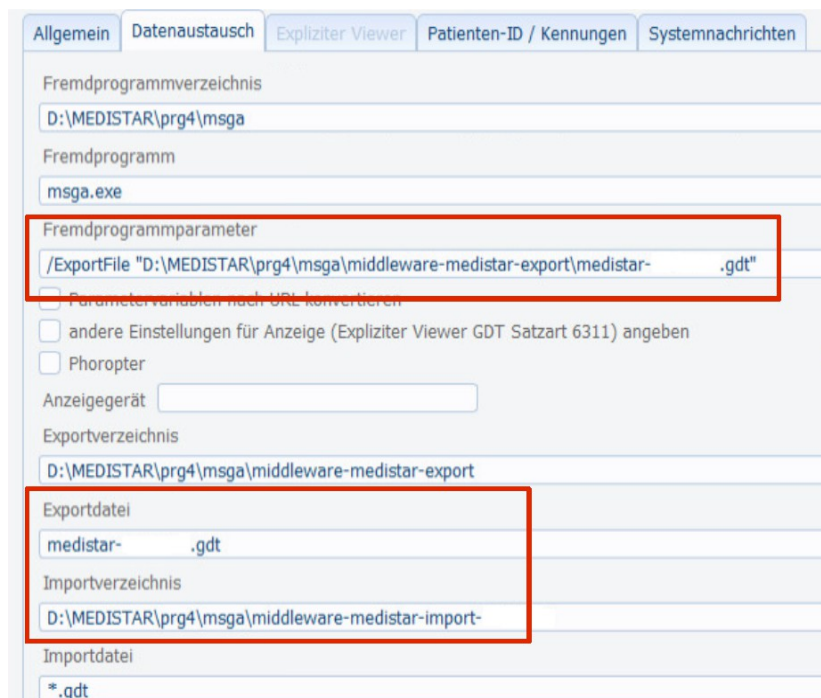

Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **TRK3**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)" konfiguriert ist**, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken
 Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)

Die **GDT-Empfänger-Kennung TRK3** (im markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsarten: REF01, KM01, TM01, PM01 (Refraktometer, Keratometer, Tonometer und Pachymeter)

Für dieses Gerät müssen alle vier Untersuchungsarten erstellt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich nur in der Zuweisung des MD-Eintrags.

Bitte erstellen Sie die Einträge für **V1 = REF01**, **V7 = KM01**, **P = TM01** und **Y = PM01**.

Untersuchungsart	
Export	Import
PM01	PM01
TM01	TM01
KM01	KM01
Standard	Standard
REF01	REF01

[Übersicht](#)

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export | Import | **MD-Eintrag** | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz
☐ Größe/Gewicht exportieren
 Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:'
 Abfrage Abrechnungskennzeichen
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten
 Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Untersuchungsarten

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Setup Gerät Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V1
8432/8439	Verweis Messung	V1
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V1
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
Arztkennzeichen		☐

Setup Gerät Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätenamen in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDatei verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Setup Gerät Untersuchungsart "PM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verkn

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	Y
8432/8439	Verweis Messung	Y
6302-6305	Verweis Link	Y
6205	Diagnose	Y
6220	Befund	Y
6221	Fremdbefund	Y
6227	Kommentar	Y
6228	Ergebnis	Y
8990	Signatur	Y
3622/3623	Grösse/Gewicht	Y
6330-6399	Freie Kategorien	Y
8410-8480	Werte	Y
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät Untersuchungsart "TM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verkn

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	P
8432/8439	Verweis Messung	P
6302-6305	Verweis Link	P
6205	Diagnose	P
6220	Befund	P
6221	Fremdbefund	P
6227	Kommentar	Y
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	P
3622/3623	Grösse/Gewicht	P
6330-6399	Freie Kategorien	P
8410-8480	Werte	P
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät Untersuchungsart "KM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verkn

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V7
8432/8439	Verweis Messung	V7
6302-6305	Verweis Link	V7
6205	Diagnose	V7
6220	Befund	V7
6221	Fremdbefund	V7
6227	Kommentar	V7
6228	Ergebnis	V7
8990	Signatur	V7
3622/3623	Grösse/Gewicht	V7
6330-6399	Freie Kategorien	V7
8410-8480	Werte	V7
	Arztkennzeichen	

Medistar Formular Einrichtung (XDT)




Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
065	Satzart 5	6302	Satzart
066	Ziffer 5		Leistung
067	Parameter 5		Ergänzung
068	Zeilentyp 5		zusätzl. Unters.arten
069	ExportIndex 5	1	
070	Menüpunkt6	***	Menüpunkt6
071	Label 6		Beschriftung
072	Name 6		Geraet
073	Untersart 6		Untersuchungsart
074	Satzart 6		Satzart
075	Ziffer 6		Leistung
076	Parameter 6		Ergänzung
077	Zeilentyp 6		zusätzl. Unters.arten
078	ExportIndex 6	1	
079	Menüpunkt7	***	Menüpunkt7
080	Label 7		Beschriftung

Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: TOPCON TRK-3
Name: TRK3
Untersart: REF01,KM01,TM01,PM01
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.

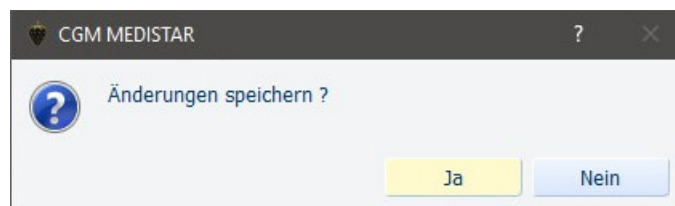

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TRK3**

Untersuchungsart: **REF01,KM01,TM01,PM01**

Middleware Konfiguratio, Schemadatei (XML) und Skripte:

TRK3-REF01,KM01,TM01,PM01.ini

TRK3-REF01-scheme-01.xml

TRK3-KM01-scheme-01.xml

TRK3-TM01-scheme-01.xml

TRK3-PM01-scheme-01.xml

TRK3-KM01-PARSE-DATA.psc

TRK3-PM01-PARSE-DATA.psc

TRK3-REF01-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

TRK3.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).


Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „TRK3-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“ und „TRK3-REF01-scheme-01.xml“ und Skripte (*.psc) in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TRK3-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TRK3.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf


Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

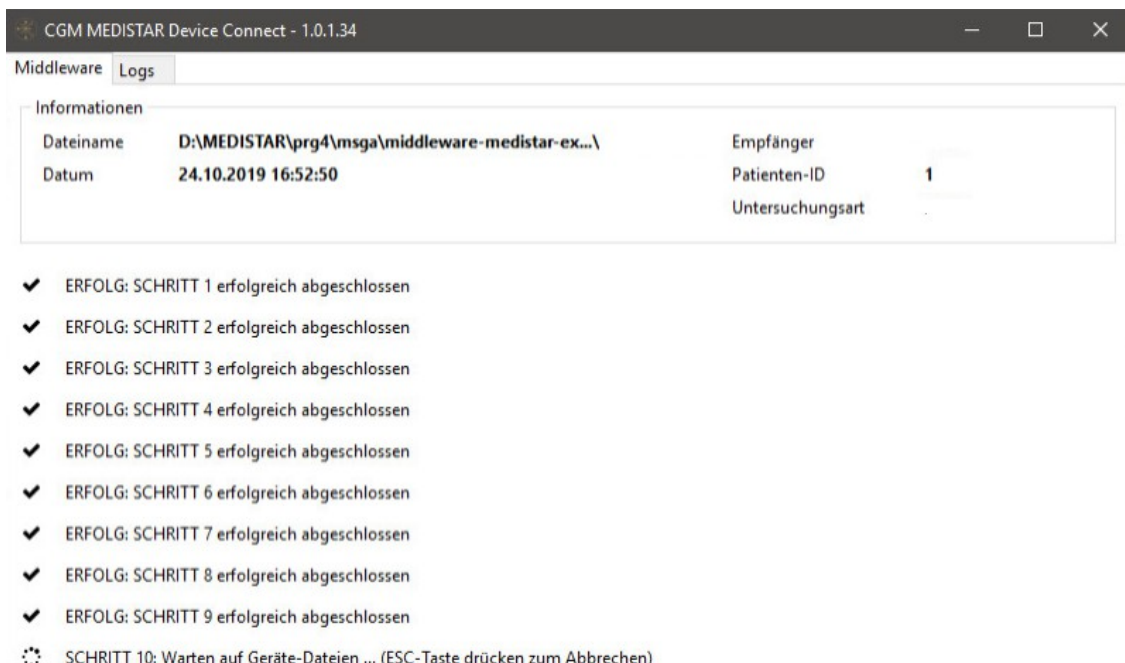

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOPCON TRK-3**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfigurationsdaten dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

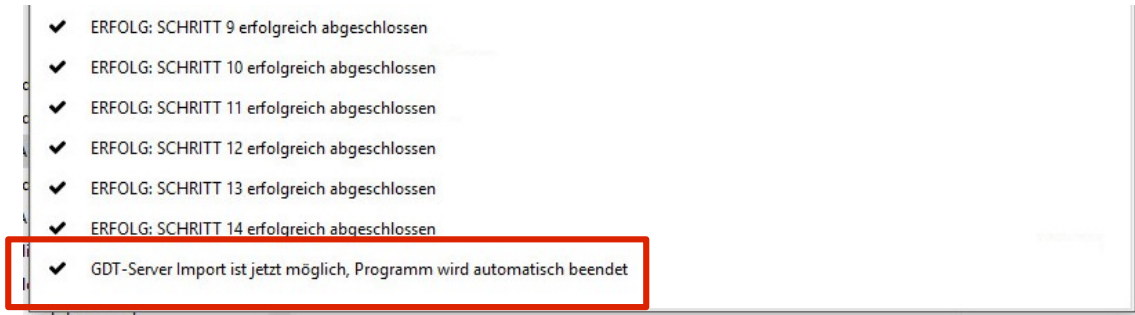

Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 XD:TRK3.REF01
V1 R.:S=+ 1.00 Z=- 0.25*141 PD= 68.0 VD= 13.75
V1 L.:S=+ 1.00 Z=- 0.25*27
V7 XD:TRK3.KM01
V7 R: R1=+ 8.30*168 R2=+ 8.12*78 // L: R1=+ 8.32*11 R2=+ 8.14*101
V7 R: AV=+ 8.21 CYL=- 0.75 // L: AV=+ 8.23 CYL=- 1.00
P XD:TRK3.TM01
Y PR: Gemessen = 13.7 mmHg; Korrigiert = 16.2 mmHg;
Y PR: Param1 = 0.545mm; Param2 = 0.050; CCT = 0.495mm
Y PL: Gemessen = 15.0 mmHg; Korrigiert = 18.0 mmHg;
Y PL: Param1 = 0.545mm; Param2 = 0.050; CCT = 0.485mm
P R = 14.0 13.0 14.0 [13.7] // L = 15.0 15.0 15.0 [15.0] mmHg 09:10
Y XD:TRK3.PM01
Y PR: 0.580 0.580 [0.578] mm
Y LR: 0.570 0.570 [0.572] mm
```

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.