

Visionix VX120

Lensmeter



Dateiversion: 1.9.0.11
Erstellungsdatum: 24.05.2024
Letzte Aktualisierung: 27.05.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

VISIONIX DEUTSCHLAND GMBH

An der Pönt 62

40885 Ratingen

Tel: +49 (0) 2102 / 48 277 0

Email: contact-de@visionix.com

Web: <https://www.visionix.com/de/>

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.


Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am Visionix VX120


Informationen des Herstellers am Ende des Dokuments (englisch).

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

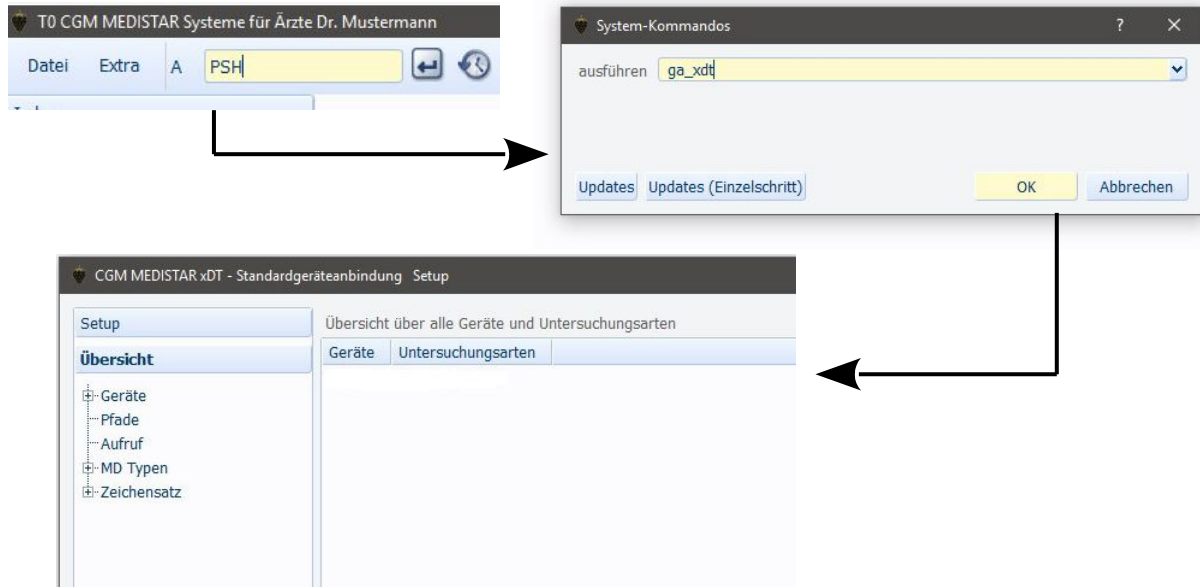

Visionix VX120 → **GDT-ID / Geräte-ID ist VX120**

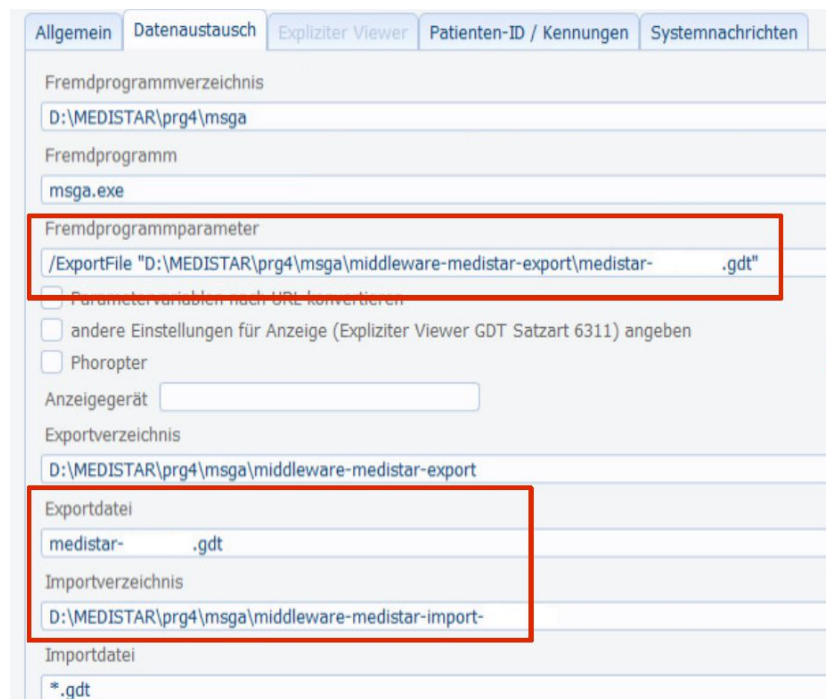

Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **VX120**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)

Die **GDT-Empfänger-Kennung VX120** (im markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Export | Import | MD-Eintrag | **Externe Verknüpfungen** | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz Windows
☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung
 Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | MD-Eintrag | **Externe Verknüpfungen** | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen
 Zeichensatz Windows
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der Middleware übereinstimmen. Wenn der MD Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V0
8432/8439	Verweis Messung	V0
6302-6305	Verweis Link	V0
6205	Diagnose	V0
6220	Befund	V0
6221	Fremdbefund	V0
6227	Kommentar	V0
6228	Ergebnis	V0
8990	Signatur	V0
3622/3623	Grösse/Gewicht	V0
6330-6399	Freie Kategorien	V0
8410-8480	Werte	V0
	Arztkennzeichen	


ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätenamen in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDaten verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPT003** oder alternativ nicht GDT Standard LM01

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

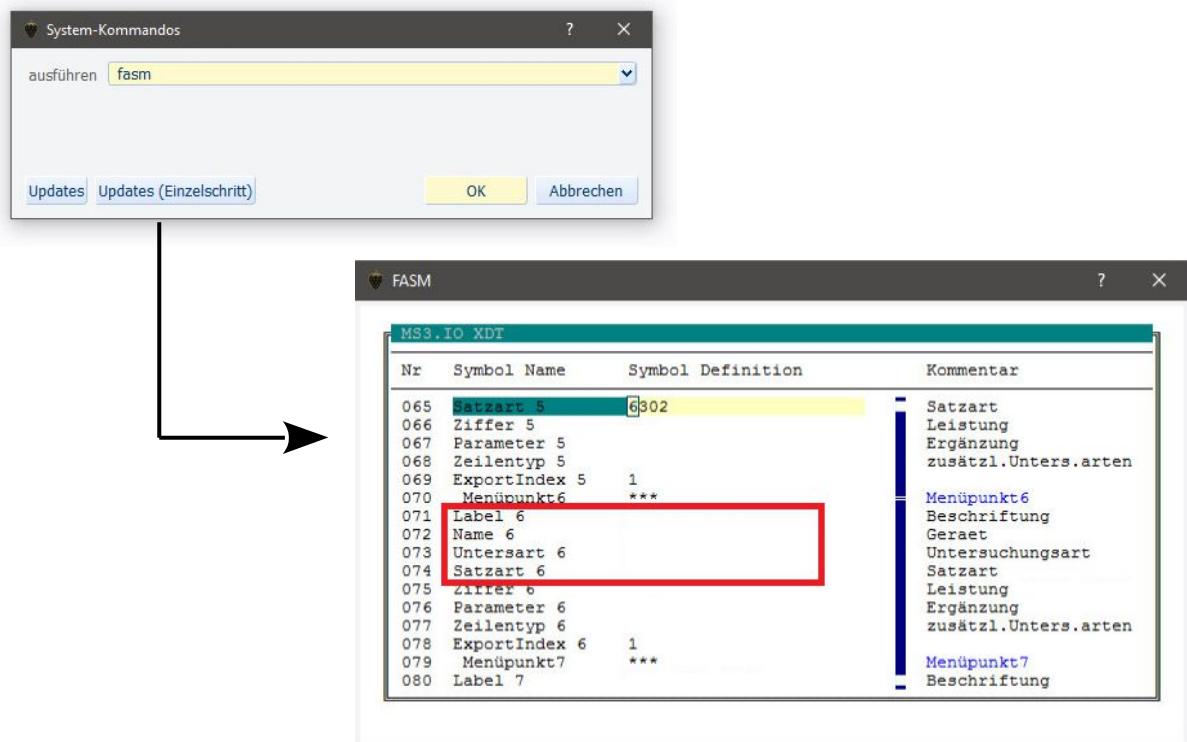

Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: Visionix VX120
Name: VX120
Untersart: OPTO03
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **VX120**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und PascalScript-Datei (PSC):

VX120-OPT003.ini

VX120-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

VX120.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).



Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „VX120-OPT003.ini“ und „VX120-OPT003-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „VX120-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „VX120.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

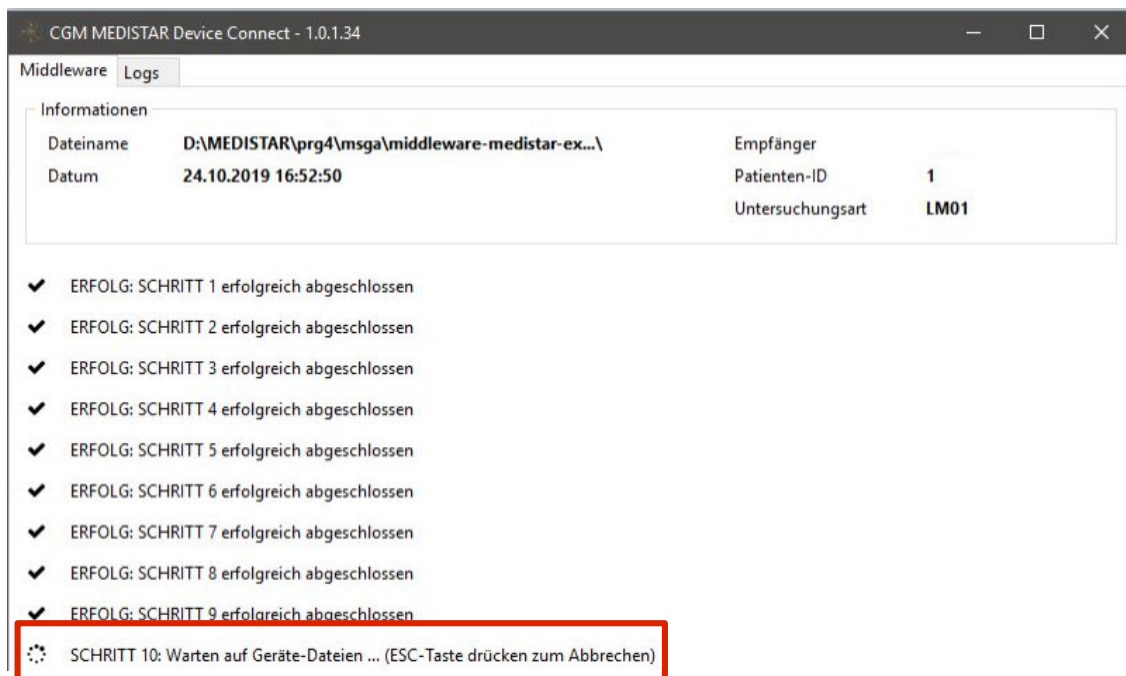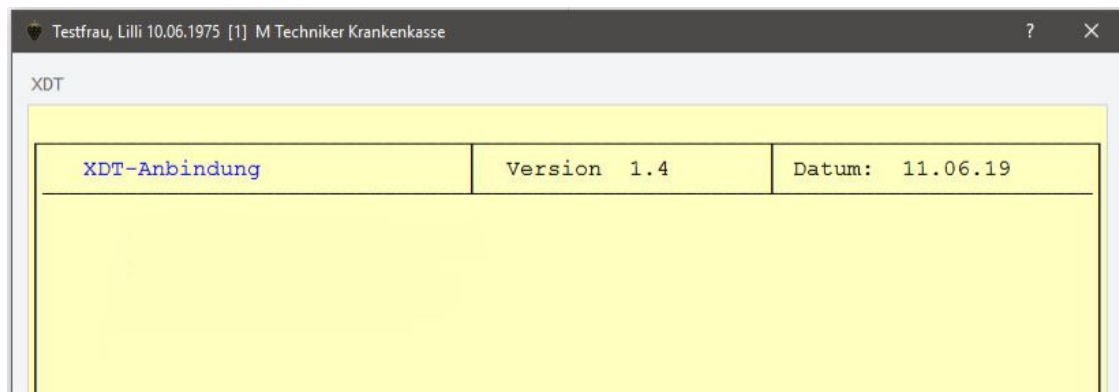

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „Visionix VX120“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die **Messung** des Patienten muss/sollte mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V0 R.:S=+ 0.75 Z=+ 0.00* 0 A=+ 2.50

V0 L.:S=+ 0.75 Z=+ 0.00* 0 A=+ 2.50 P= 1.75 B= 263

Anpassung des MD-Rückeintrages

Verwende "True", damit der A Wert an die V0 Zeile angehängt wird, auch wenn kein Wert in der Messung vorhanden ist
In diesem Fall wird der A Wert mit "A=" eingetragen
benutze "False", damit der A Wert nur dann an die V0 Zeile angehängt wird, wenn auch tatsächlich ein Wert in der messung vorhanden ist
`bolAddAValueToOutputIfEmpty := False;`

Verwende "True", damit jeder GDT Zeile das Prefix aus GDT_LINE_PREFIX vorangestellt wird,
benutze "False", damit das GDT-Zeilen-Prefix ignoriert wird
`bolAddGDTLinePrefix:= False;`

Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,
benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er vom Gerät kommt
`bolAddSign:= True;`

Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus GDT_SIGN_SEPARATOR angefügt wird,
benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert eingefügt wird
`bolAddSignSeparator:= True;`

Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,
benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird
`bolAddAxisSeparator:= True;`

Verwende "True", damit das A-Prefix angefügt wird,
benutze "False", damit das A-Prefix nicht verwendet wird
`bolAddAPrefix:= True;`

Verwende "True", damit das Prisma (P- und B-Werte) angefügt wird,
benutze "False", damit das Prisma (P- und B-Werte) nicht verwendet wird
`bolAddPrism:= True;`

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.