

Visionix VX650



Dateiversion: 1.9.0.12
Erstellungsdatum: 07.02.2023
Letzte Aktualisierung: 07.02.2023
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

VISIONIX DEUTSCHLAND GMBH
An der Pönt 62
40885 Ratingen

Tel: +49 (0) 2102 / 48 277 0
Email: contact-de@visionix.com
Web: <https://www.visionix.com/de/>

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird benötigt.


Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.


Einstellungen am Visionix VX650

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

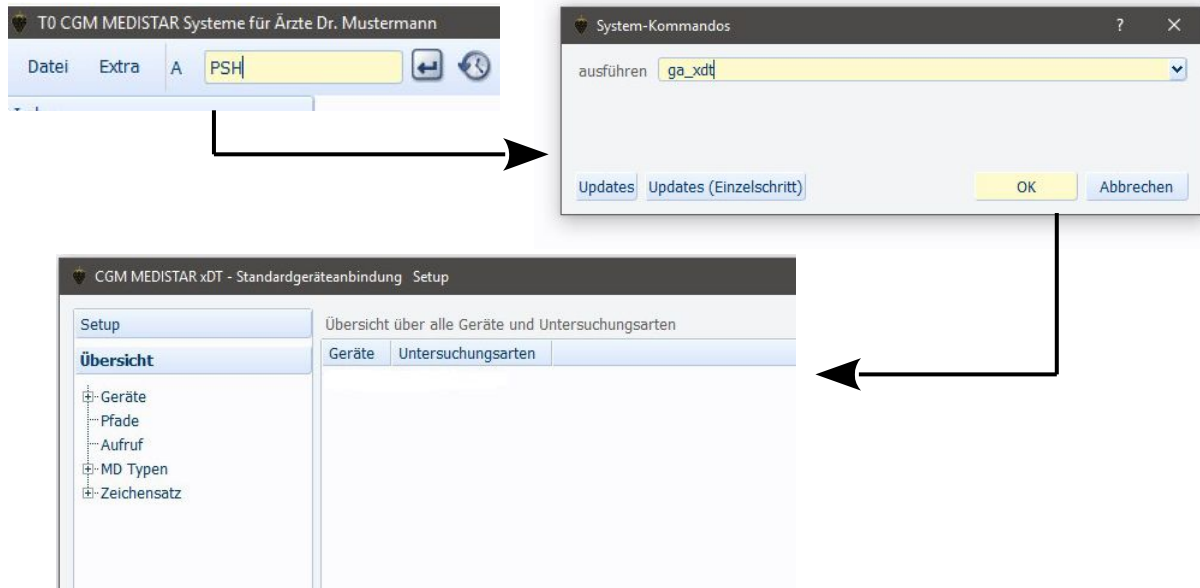

Visionix VX650 → **GDT-ID / Geräte-ID ist VIS650**

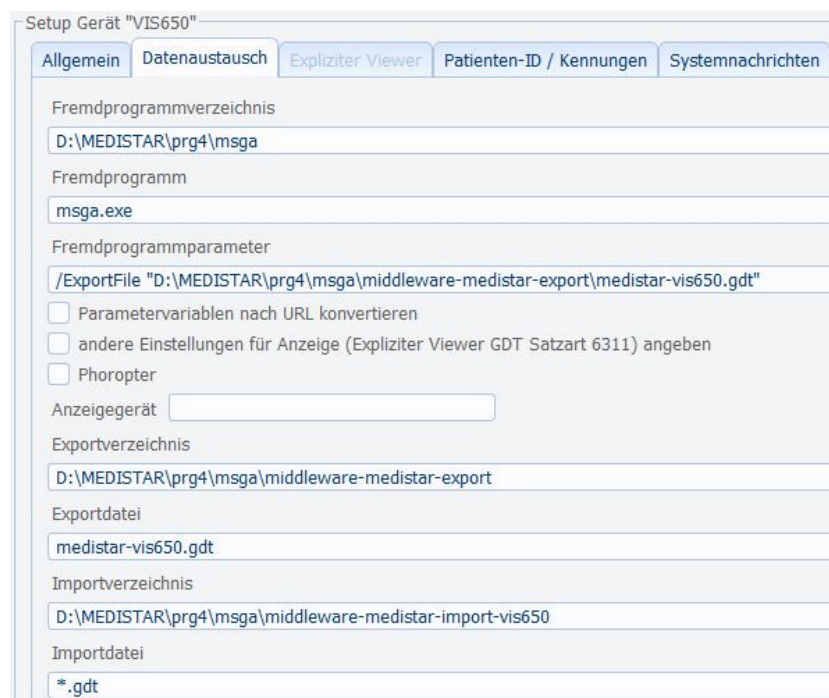

Der Gerätenamen (hier **VIS650**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf ***.*** konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG** Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. **JPG** Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "VIS650"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer **Patienten-ID / Kennungen** Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **VIS650**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Setup Gerät "VIS650" Untersuchungsart "REF01"

Export **Import** MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**
☐ Größe/Gewicht exportieren
 Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' **Behandlung+Messung**
 Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "VIS650" Untersuchungsart "REF01"

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**
 Zeichensatz **Windows**
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der Middleware übereinstimmen. Wenn der MD Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Das Gerät kombiniert verschiedene Messgeräte in einem. Somit muss für jede mögliche Messmöglichkeit eine Untersuchungsart angelegt werden.

Untersuchungsart	
Export	Import
Standard	Standard
REF01	REF01
TM01	TM01

Die Untersuchungsarten unterscheiden sich in der MD-Zeilentypen Zuweisung.

Erstellt werden müssen „**REF01**“ für **Refraktometer** und „**TM01**“ für **Tonometer**. Wird die Geräteanbindung um weitere Messungen erweitert, müssen die jeweiligen Untersuchungsarten hinzugefügt und konfiguriert werden.

Export

Import

MD-Eintrag

Externe Verknüpf

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V5
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
	Arztkennzeichen	

Export

Import


MD-Eintrag

Externe Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätename in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDaten verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.


Medistar Formular Einrichtung (XDT)

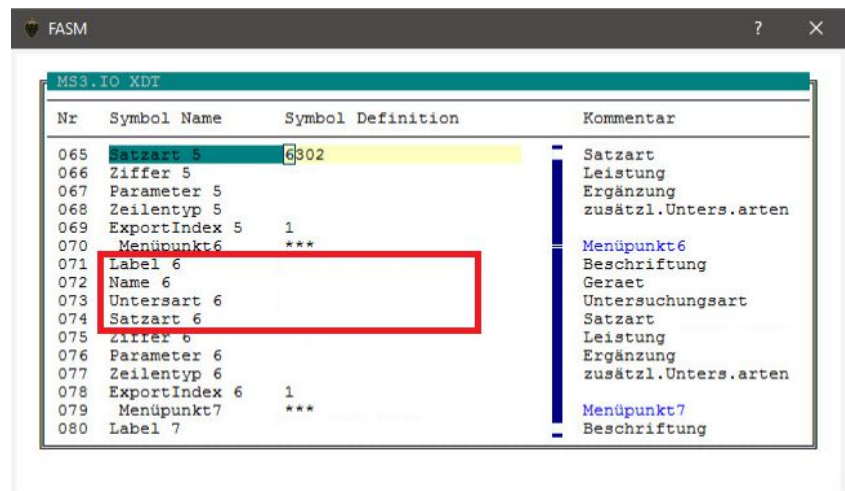

Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: Visionix VX 650
Name: VIS650
Untersart: REF01,TM01
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.

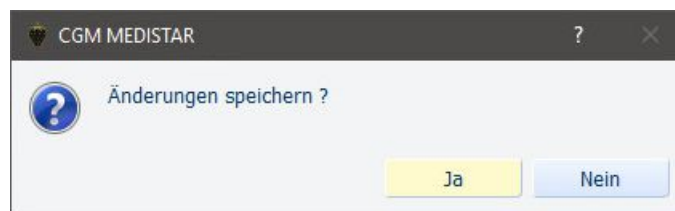

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **VIS650**

Untersuchungsart: **REF01,TM01**

Middleware Konfiguration und PascalScript-Datei (PSC):

VX40-REF01,TM01.ini

VX40-REF01,TM01-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

VIS650.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „VIS650-REF01,TM01.ini“ und „VIS650-REF01,TM01-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „VIS650-REF01,TM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „VIS650.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled "Groth-Tonberg, Dr. Hans - 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there's a section labeled "XDT" with a yellow background. It contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum
	1.4	07.02.23

Below the table, there's a large yellow area with a red box highlighting the text "20 Visionix VX650". At the bottom, there's a label "Auswahl:" followed by a dropdown menu.

At the bottom of the window, there are four buttons: "Eingabe", "Druckauftrag", "Drucken", and "Ende".

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.29.77". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a table with the following data:

Informationen		Empfänger
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medis...\medistar-vis650.gdt	VIS650
Datum	07.02.2023 13:05:39	Patienten-ID
		1
		Untersuchungsart
		REF01,TM01

Below the table, there's a list of seven steps, each marked with a checkmark and the text "ERFOLG: SCHRITT X erfolgreich abgeschlossen":

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „Visionix VX 650“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die **Messung** des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben

werden.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V1 R.:S=+ 0.25 Z=- 1.50* 91 VD= 12.00

V1 L.:S=+ 0.00 Z=- 1.25* 83

P R = 15.0 16.0 14.0 [15.0] // L = 15.0 14.0 15.0 [14.7] mmHg 14:51

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.