

ZEISS IOL Master 700

optische Biometrie



<https://www.zeiss.de>

Dateiversion:	1.9.6.13
Erstellungsdatum:	23.02.2022
Letzte Aktualisierung:	02.03.2022
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

ZEISS Sparte Medical Technology
Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
ZEISS Gruppe
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen, Deutschland

Phone: +49 7364 20 4944

www.zeiss.de/med

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist **nicht** möglich.
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.


Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am ZEISS IOL Master 700


Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

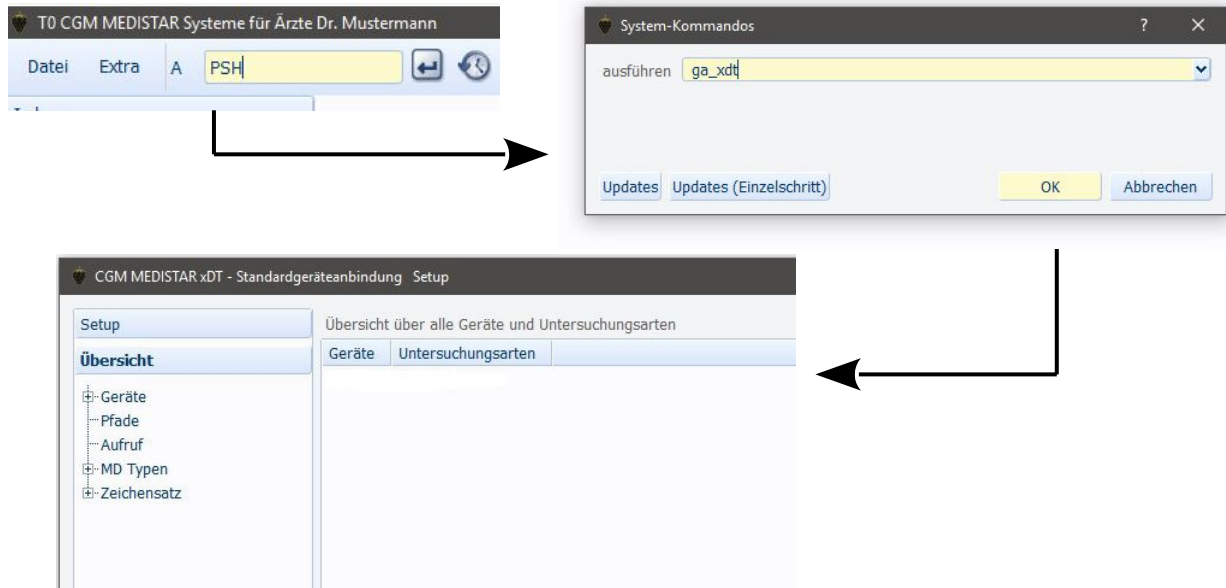

IOLM700 → ZEISS IOL Master 700 → **GDT-ID / Geräte-ID ist IOLM700**

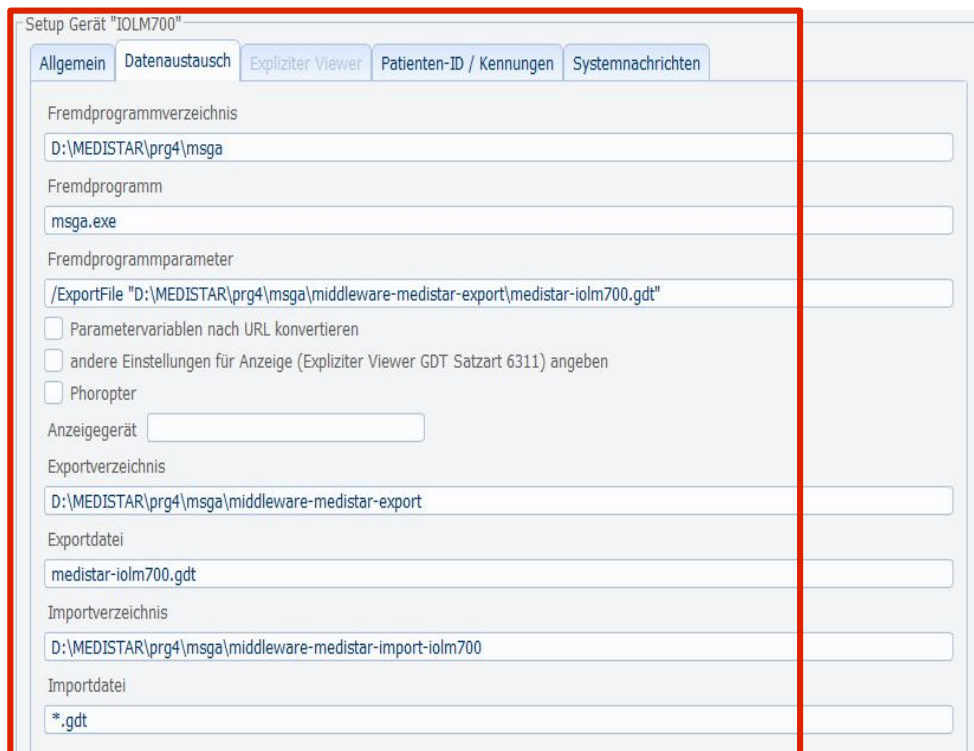

Der Gerätenamen (hier **IOLM700**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch

den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "IOLM700"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **IOLM700**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Neue Untersuchungsart anlegen z.B. Untersuchungsart **OPT000**.

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | **MD-Eintrag** | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag V8 XD:IOLM700.OPT000 nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "IOLM700" Untersuchungsart "OPT000"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	
6220	Befund	V8
6221	Fremdbefund	V8
6227	Kommentar	V8
6228	Ergebnis	V7
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	


Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

☐ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)

- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V7** (Keratometer) und **V8** (Biometrie) eingegeben. Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

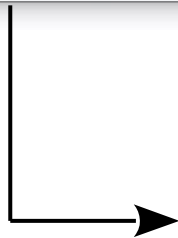

FASM

MS3.IO XDT2

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
142	Menüpunkt14	***	Menüpunkt14
143	Label 14	ZEISS IOL Master 700	Beschriftung
144	Name 14	IOLM700	Geraet
145	Untersart 14	OPT000	Untersuchungsart
146	Satzart 14	6302	Satzart
147	Ziffer 14		Leistung
148	Parameter 14		Ergänzung
149	Zeilentyp 14		zusätzl.Unters.arten
150	ExportIndex 14	1	
151	Menüpunkt15	***	Menüpunkt15
152	Label 15		Beschriftung
153	Name 15		Geraet
154	Untersart 15		Untersuchungsart
155	Satzart 15		Satzart
156	Ziffer 15		Leistung
157	Parameter 15		Ergänzung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **IOLM700**

Untersuchungsart: **OPT000**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

IOLM700-OPT000.ini

IOLM700-OPT000-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

IOLM700.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „IOLM700-OPT000.ini“ und „CEM530-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „IOLM700-OPT000.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „IOLM700.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „Output\“ eine dazugehörige PDF-Datei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „Output\“) und der Pfad zu den **PDF-Dateien** (Verzeichnis „Output\“) hinterlegt werden.

siehe „IOLM700-OPT000.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\IOLM700-OPT000\
ExternalFilePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\IOLM700-
OPT000\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\Output\“

ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis „..\Output\“

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „IOLM700-OPTO00-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

Hinzufügen der externen Dateien

Öffnen Sie die Datei „IOLM700-OPTO00-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **50**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddExternalFilesToGdtFile := False;** durch **bolAddExternalFilesToGdtFile := True;**.

Speichern Sie die Datei unter selben Namen wieder ab.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 23.02.22
---------------	-------------	-----------------

14 ZEISS IOL Master 700

15

16

17

18

19

20

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.25.73

Middleware Logs

Informationen

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-med...\medistar-iolm700.gdt
Datum	23.02.2022 14:40:12

Empfänger	IOLM700
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	OPT000


- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „ZEISS IOL Master 700“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden.

 **Hinweis:** Die Anwendung sollte über das Formular „initial“ einmal gestartet werden, damit alle eventuell fehlenden Verzeichnis angelegt werden können. Weiterhin kann dann am Gerät das Exportverzeichnis direkt auf das


Importverzeichnis der Middleware eingestellt werden.
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

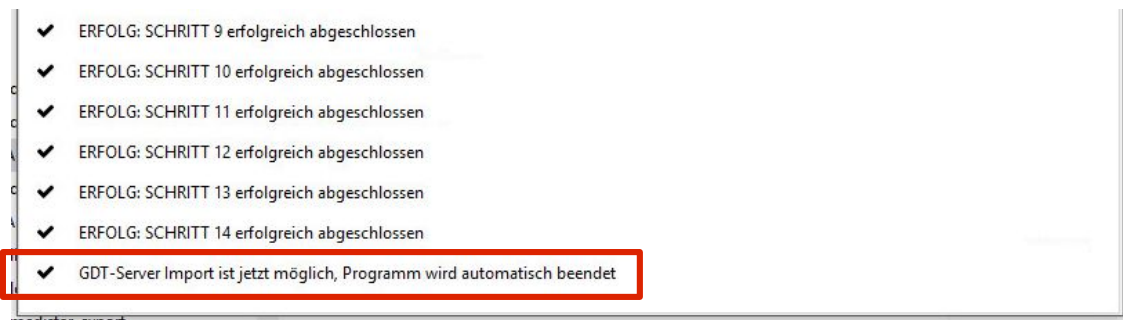

Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

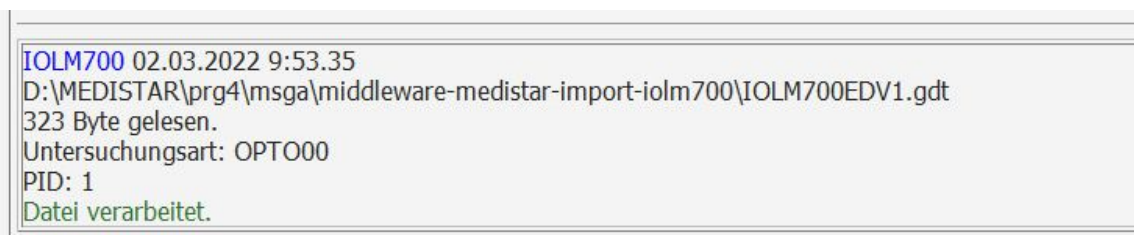

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V8 R: VKT=3.33 AL=24.16 // L: VKT=3.38 AL=24.49

V7 R: R1=+ 7.48*1.69 R2=+ 7.20*91.69 // L: R1=+ 7.58*172.75 R2=+ 7.24*82.75

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.