

ZEISS VISULENS 550

Lensmeter



<https://www.zeiss.de>

Dateiversion: 1.9.6.17
Erstellungsdatum: 16.07.2021
Letzte Aktualisierung: 05.05.2022
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

ZEISS Sparte Medical Technology
Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
ZEISS Gruppe
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen, Deutschland

Phone: +49 7364 20 4944

www.zeiss.de/med

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist **nicht** möglich.
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am ZEISS VISULENS 550

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

The screenshot shows the 'Netzwerkconfiguration' screen with the 'Schnittstelle' (Interface) tab selected. The 'Manuell' (Manual) option is active. The configuration fields are as follows:


Field	Value
IP-Adresse	192.168.70.30
Subnetzmaske	255.255.255.0
DNS-Server	
Gateway	192.168.70.254
Zeitserver	

At the bottom, the 'LAN' option is selected under the 'Schnittstellenaktivierung' (Interface Activation) section.


The screenshot shows the 'Schnittstellenaktivierung' screen with the 'Schnittstelle' (Interface) tab selected. The 'Lokales Netzwerk (LAN)' option is checked. The activation options are as follows:

Option	Status
Drucker (lokal)	☐
Seriell	☐
USB	☐
Lokales Netzwerk (LAN)	☒

Under the 'Lokales Netzwerk (LAN)' section, the 'Ordner' (Folder) option is checked, while 'Drucker', 'Socket', and 'Webservice' are unchecked.

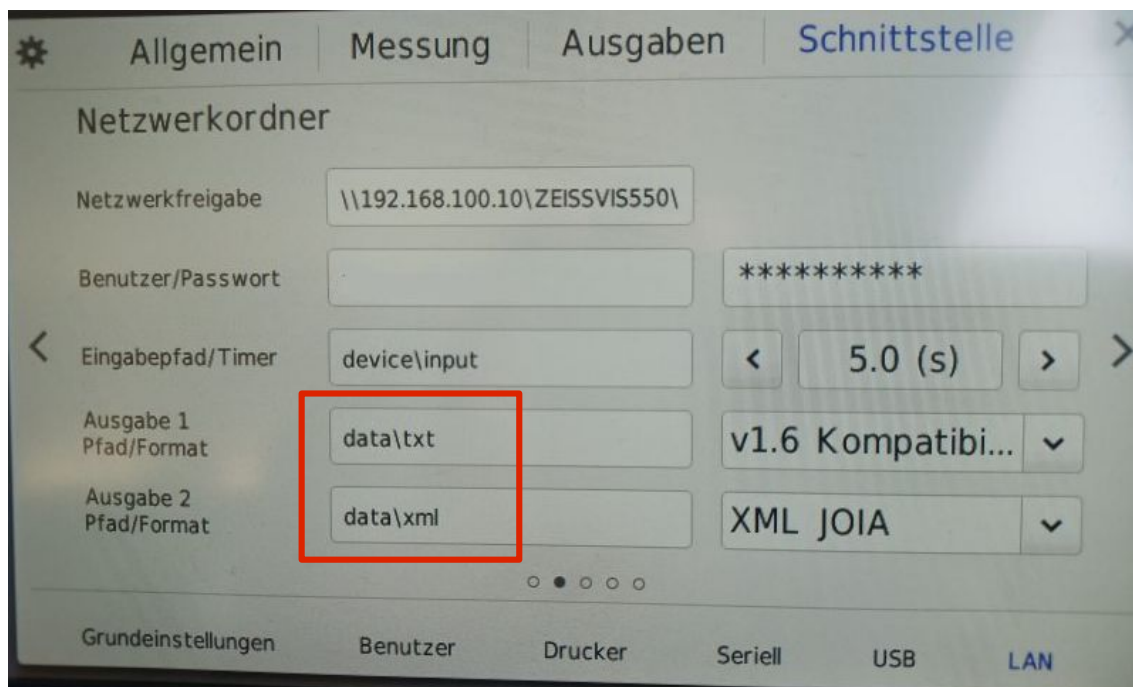


Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass die Unterordner "data\txt" und "data\xml" in der Freigabe (also hier "ZEISSVIS550") initial erstmal händisch angelegt werden müssen (also das Gerät generiert diese nicht von selber sondern erwartet das diese schon da sind; anhand der Fehlermeldung beim Senden ist das nicht ersichtlich).

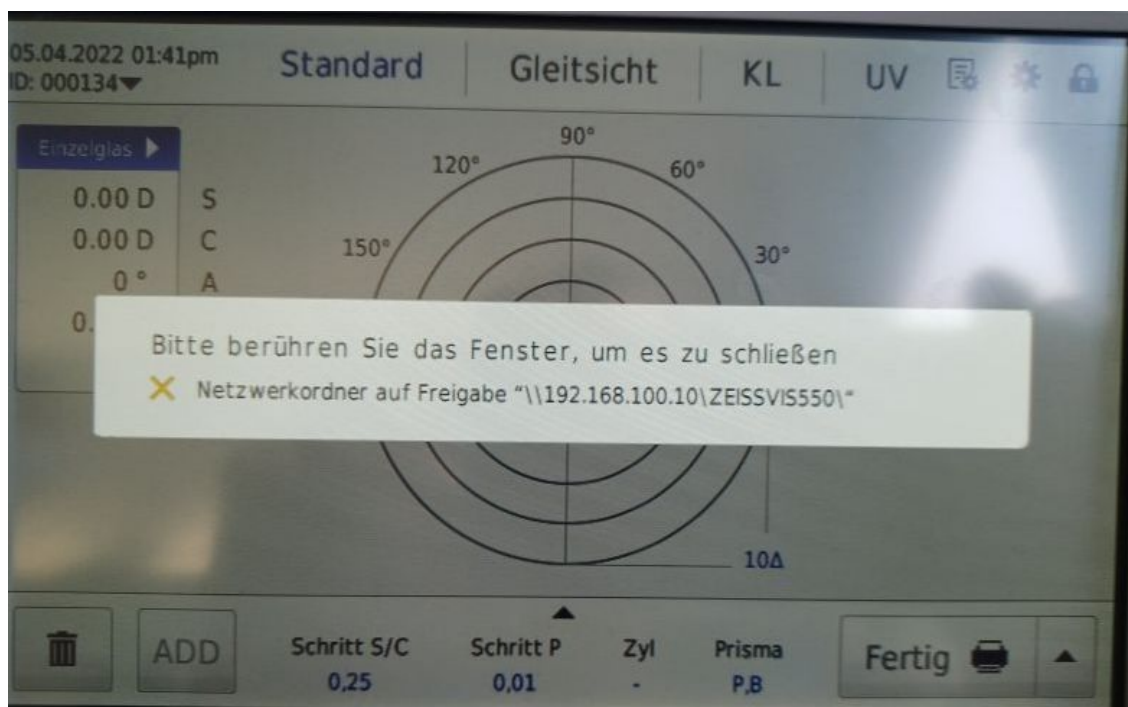


CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

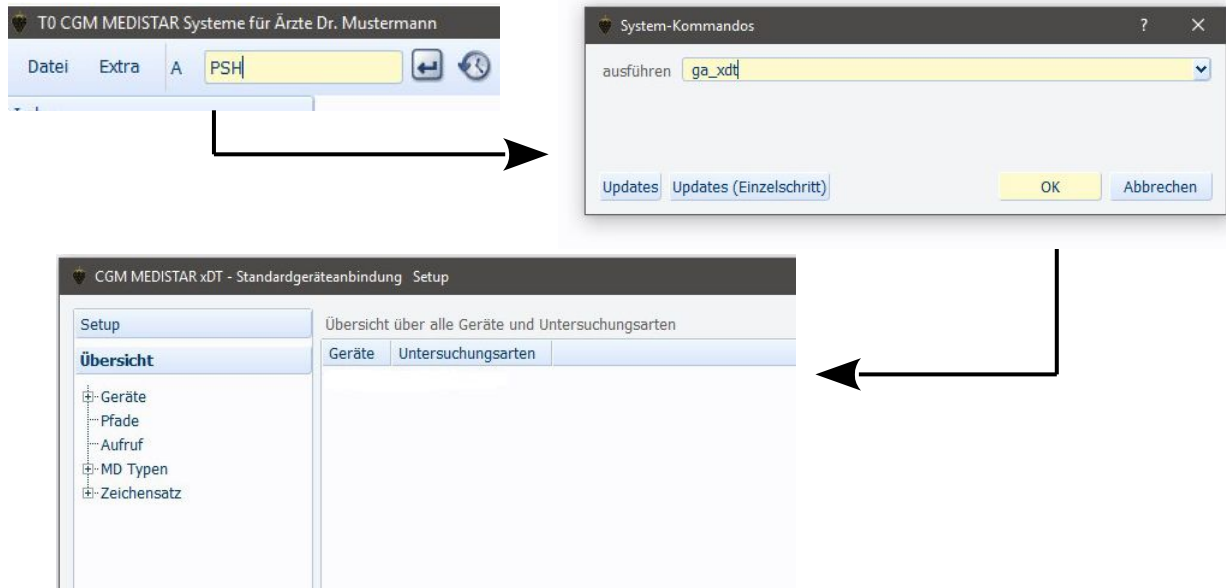

VIS550 → ZEISS VISUTRON 550 → **GDT-ID / Geräte-ID ist VIS550**

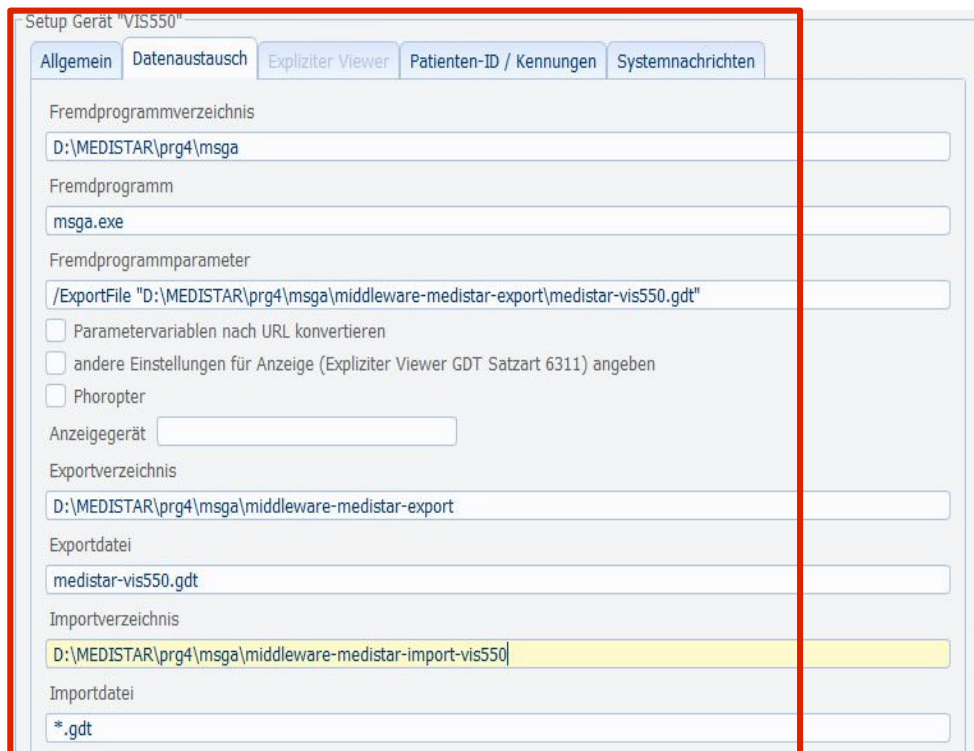

Der Gerätenamen (hier **VIS550**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "VIS550"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | Patienten-ID / Kennungen | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) VIS550

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Neue Untersuchungsarten anlegen z.B. Untersuchungsart **OPT003** → LM Data (Lensmeter).

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz: Windows ▼
☐ Größe/Gewicht exportieren
 Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': Behandlung+Messung ▼
 Abfrage Abrechnungskennzeichen: Nur EBM ▼
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten
 Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen
 Zeitangaben in MD-Verweis: Messung vorziehen ▼
 Zeichensatz: Windows ▼
☐ Doppelte Einträge vermeiden
 Reihenfolge der Einträge

 Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag P XD:VIS550.OPT003 nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
Feldkennung	Art der Daten		
6200/6201	Verweis	V0	
8432/8439	Verweis Messung	V0	
6302-6305	Verweis Link	V0	
6205	Diagnose	V0	
6220	Befund	V0	
6221	Fremdbefund	V0	
6227	Kommentar	V0	
6228	Ergebnis	V0	
8990	Signatur	V0	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V0	
6330-6399	Freie Kategorien	V0	
8410-8480	Werte	V0	
Arztkennzeichen			

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒			Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒			Gerätename in Kommentar
☒			Untersuchungsart in Kommentar
☒			Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒			Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒			Dateien nach PDaten verschieben
☐			Relative Pfadangabe
Kommentar			
Viewer			

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** (Lensmeter) eingegeben. Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT2

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
093	Ziffer 8		Leistung
094	Parameter 8		Ergänzung
095	Zeilentyp 8		zusätzl.Unters.arten
096	ExportIndex 8	1	
097	Menüpunkt9	***	Menüpunkt9
098	Label 9	ZEISS VISUTRON 550	Beschriftung
099	Name 9	VIS550	Geraet
100	Untersart 9	OPT003	Untersuchungsart
101	Satzart 9	6302	Satzart
102	Ziffer 9		Leistung
103	Parameter 9		Ergänzung
104	Zeilentyp 9		zusätzl.Unters.arten
105	ExportIndex 9	1	
106	Menüpunkt10	***	Menüpunkt10
107	Label 10		Beschriftung
108	Name 10		Geraet

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **VIS550**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

VIS550-OPT003.ini

VIS550-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

VIS550.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „VIS550-OPT003.ini“ und „VIS550-OPT003-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „VIS550-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „VIS550.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse

XDT

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 16.07.21
---------------	-------------	-----------------

9 ZEISS VISUTRON 550

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.23.71

Middleware Logs

Informationen

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medis...\medistar-vis550.gdt	Empfänger	VIS550
Datum	16.07.2021 09:58:40	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	OPT003

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „ZEISS VISUTRON 550“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden.

 Hinweis: Die Anwendung sollte über das Formular „initial“ einmal gestartet werden, damit alle eventuell fehlenden Verzeichnis angelegt werden können. Weiterhin kann dann am Gerät das Exportverzeichnis direkt auf das Importverzeichnis der Middleware eingestellt werden.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

```
VIS550 20.07.2021 9:51.58  
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-vis550\VIS550EDV1.gdt  
226 Byte gelesen.  
Untersuchungsart: OPT003  
PID: 1  
Datei verarbeitet.
```

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V0 R.:S=+ 1.57 Z=+ 1.00 * 10 P= 0.03537 I 0.0469 D A=+ 2.00  
V0 R.:S=+ 1.54 Z=+ 1.00 * 80 P= 0.01608 I 0.08249 D
```

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.