


Geräteanbindung iCare Home Tonometer

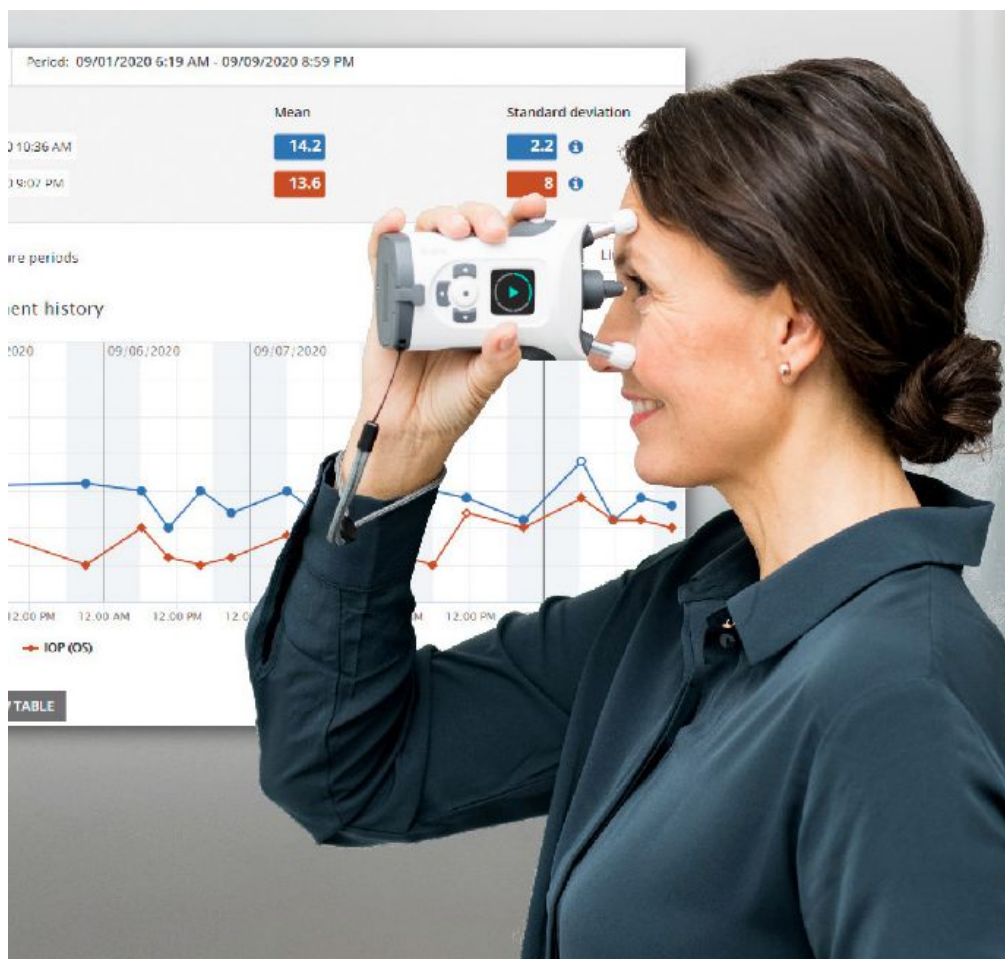

Dateiversion: 1.9.8.10
Erstellungsdatum: 13.05.2024
Letzte Aktualisierung: 13.05.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

bon Optic Vertriebsges. mbH
Stellmacherstraße 14
23556 Lübeck
Deutschland

Telefon: 0451 / 80 9000
Fax: 0451 / 80 900-10
Web: www.bon.de
E-Mail: call@bon.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.


Die Zuweisung der Messung wird anhand der ausgewählten **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

 **Hinweis:** Bitte prüfen Sie das Model, Ic200 und Home2 können via USB-Kabel oder Bluetooth und der Software Icare EXPORT. IC100 hat keine Schnittstelle.


Einstellungen am Gerät

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.

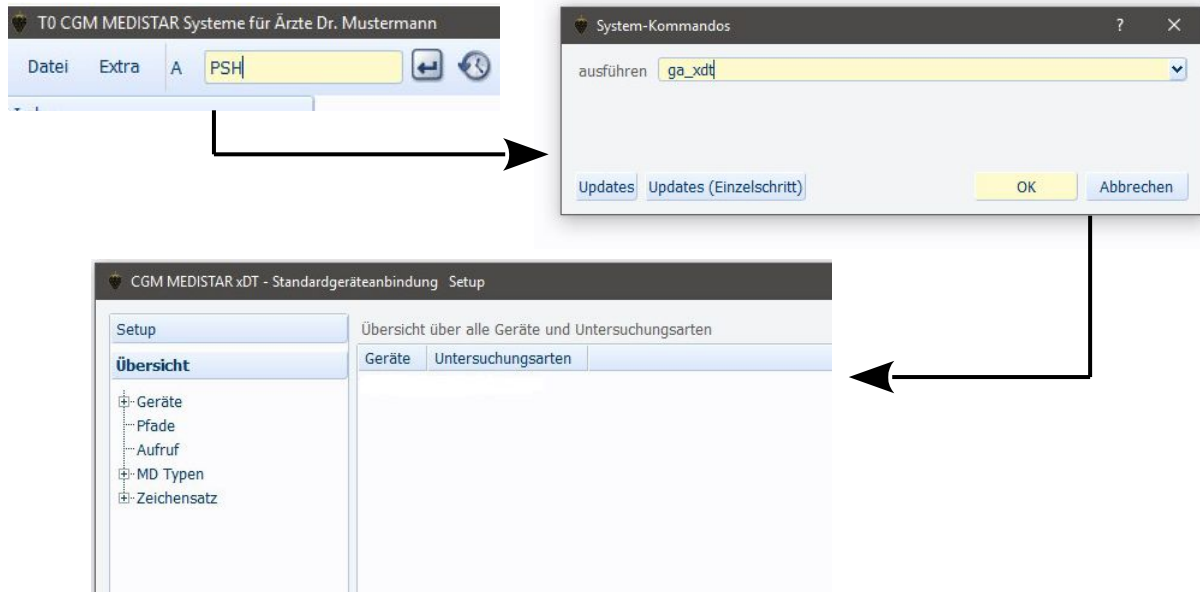

iCare Home Tonometer → **GDT-ID / Geräte-ID ist ICAREH**

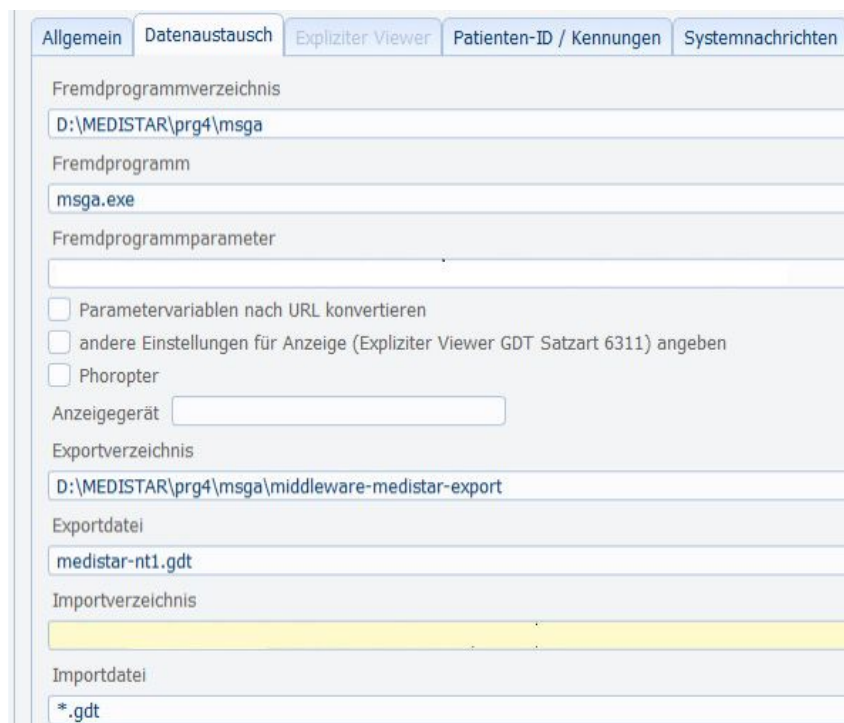

Fremdprogrammparameter:

/ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-icareh.gdt"

Importverzeichnis:

D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-icareh

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)"** konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

The screenshot shows the 'Patienten-ID / Kennungen' tab. The 'Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)' field is highlighted with a red box and contains the value 'EDV1'. Other fields include 'Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)', 'Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)', 'Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218)' with value '02.10', and 'Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316)' with value 'EDV1'.

Die **GDT-Empfänger-Kennung ICAREH** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart: OPT006

Die Einstellungen für „Export“ und „Import“ unterscheiden sich nicht.

The screenshot shows the 'Export' tab. The 'Zeichensatz' dropdown menu is highlighted with a red box and contains the value 'Windows'. Other settings include 'Größe/Gewicht exportieren' (unchecked), 'Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:'' set to 'Behandlung+Messung', 'Abfrage Abrechnungskennzeichen' set to 'Nur EBM', and 'Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten' (unchecked).

The screenshot shows the 'Import' tab. The 'Untersuchungsart eintragen' and 'Untersuchungsdatum eintragen' checkboxes are highlighted with a red box and are checked. The 'Zeichensatz' dropdown menu is also highlighted with a red box and contains the value 'Windows'. Other settings include 'Zeitangaben in MD-Verweis' set to 'Messung vorziehen' and 'Doppelte Einträge vermeiden' (unchecked).

Der Gerätename wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen. Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6228, 6227 und 6302 – 6305** eingetragen werden.


Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	P
6205	Diagnose	P
6220	Befund	N
6221	Fremdbefund	N
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	N
3622/3623	Grösse/Gewicht	P
6330-6399	Freie Kategorien	P
8410-8480	Werte	P
	Arztkennzeichen	

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒			Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒			Gerätename in Kommentar
☒			Untersuchungsart in Kommentar
☒			Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒			Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒			Dateien nach PDaten verschieben
☐			Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **P** (Tonometer) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N (oder alternativ Y)** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

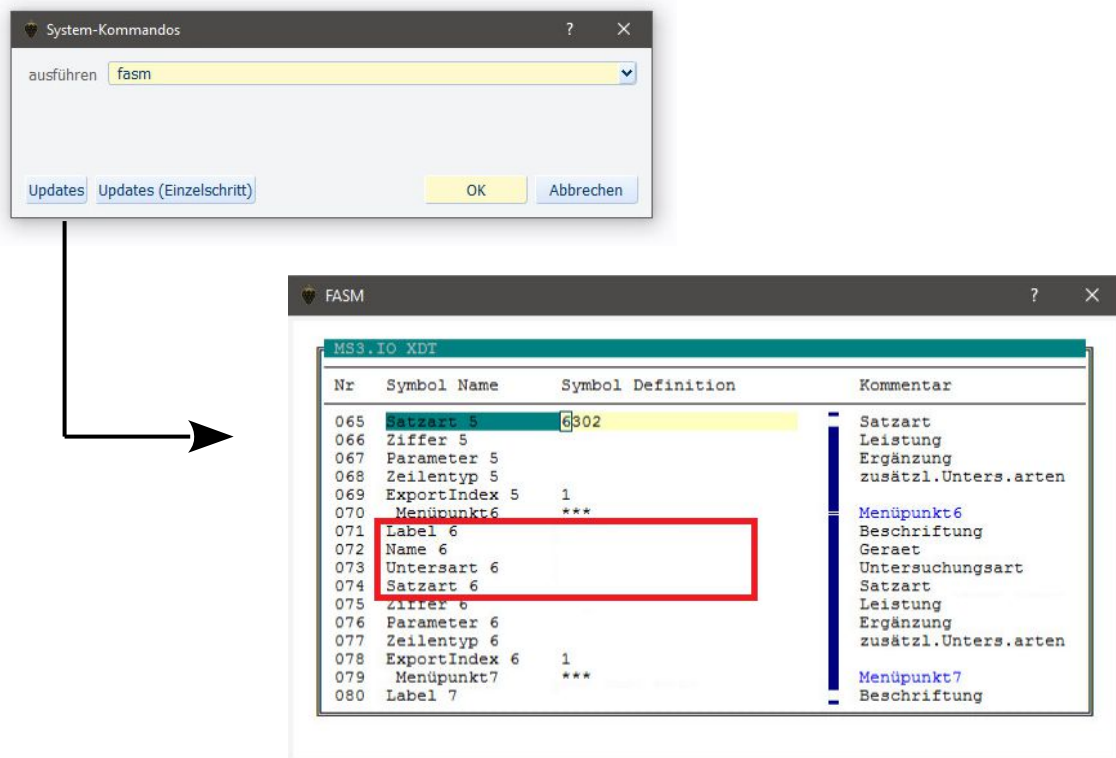

Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: iCare Home Tonometer
Name: ICAREH
Untersart: OPTO06
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **ICAREH**
Untersuchungsart: **OPT006**

Middleware Konfigurationsdateien:

ICAREH-OPT006.ini
ICAREH-OPT006-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

ICAREH.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „ICAREH-OPT006.ini“ und „ICAREH-OPT006-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.


Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „ICAREH-OPT006.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „ICAREH.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

 **Hinweis:** Bitte darauf achten, dass die Pfade mit „\“ (Backslash) abschließen. Die Verzeichnisüberwachung benötigt den „letzten“ Backslash.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

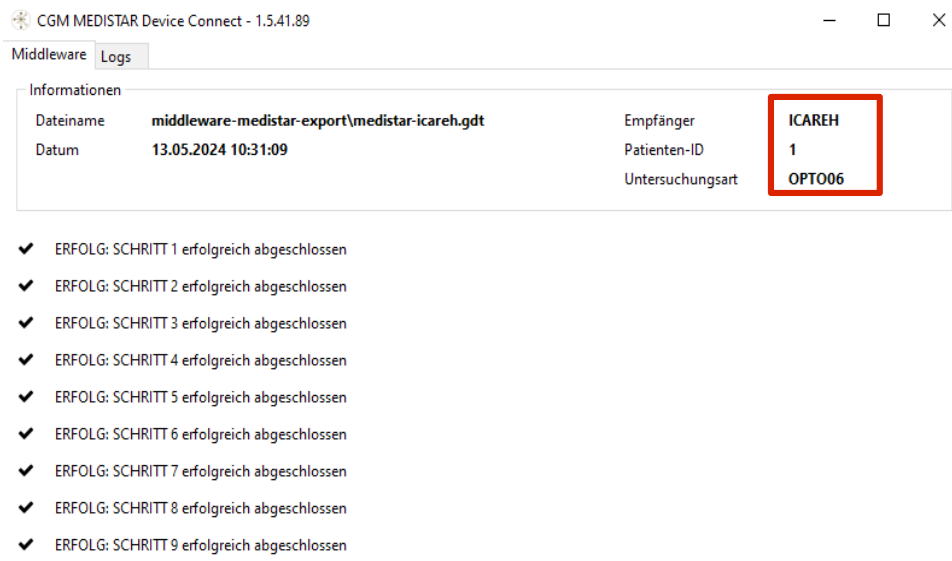

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.41.89

Middleware Logs

Informationen	
Dateiname	middleware-medistar-export\medistar-icareh.gdt
Datum	13.05.2024 10:31:09
Empfänger	ICAREH
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	OPT006

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messungsdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell ausgewählten Patient zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

P R.:IOD: 0 Qualität: UNBEKANNT Messdauer: "07.08.2023 00:10:09"
P L.:IOD: 14 Qualität: EXZELLENT Messdauer: "07.08.2023 00:10:09"

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Verarbeitungsdateien verwendet werden.