

team2work

Geräteanbindung

Röntgen per GDT

Dateiversion: 1.9.8.16
Erstellungsdatum: 22.06.2021
Letzte Aktualisierung: 07.06.2022
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de / jochen.bittmann@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

team2work GmbH
Hildastr. 16
76571 Gaggenau
Telefon: +49 (0) 7225 9181 – 935
Fax: +49 (0) 7225 9181 – 950
E-Mail: info@team2work.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

MEDISTAR Device Connect erstellt für den Import (vom Röntgen Gerät/Software aus) eine GDT Datei mit allen Informationen zum Röntgen Auftrag (Stammdaten, Region usw.). Die Röntgen Software kann z.B. lediglich Patientenstammdaten importieren und Daten einer festgelegte GDT Feldkennung. Um dies manuell abzubilden kann die Erstellung der GDT-Importdatei konfiguriert und an jeden Kunden angepasst werden.


Einstellungen am Gerät

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.


Anpassung des GDT-Importpfades.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.

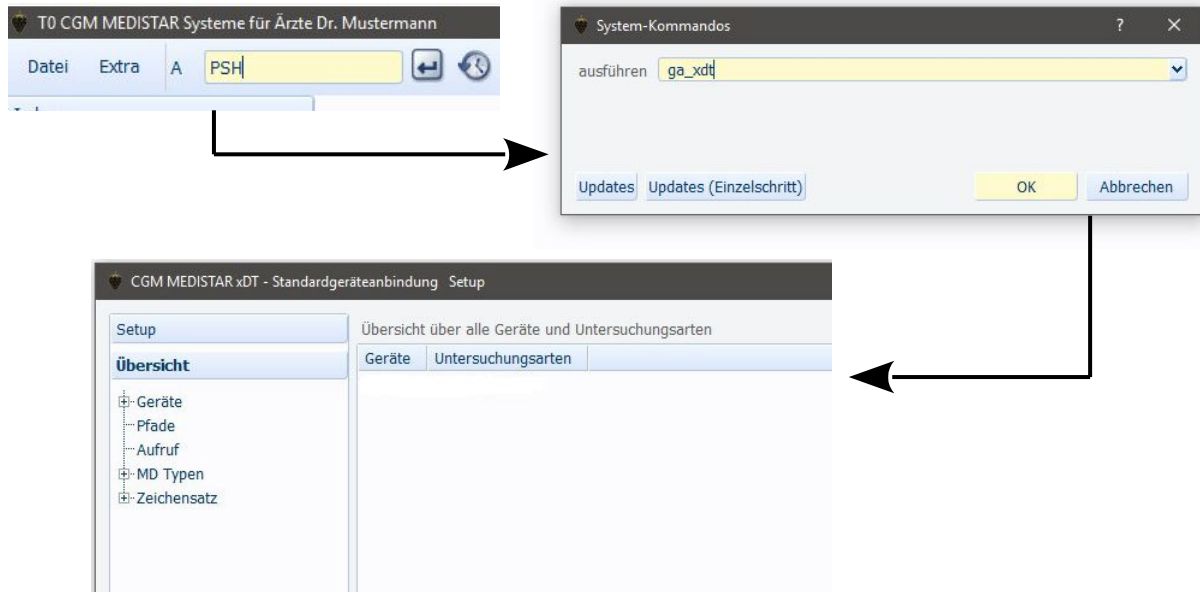

team2work Röntgen Anbindung → **GDT-ID / Geräte-ID ist ROENTGEN**

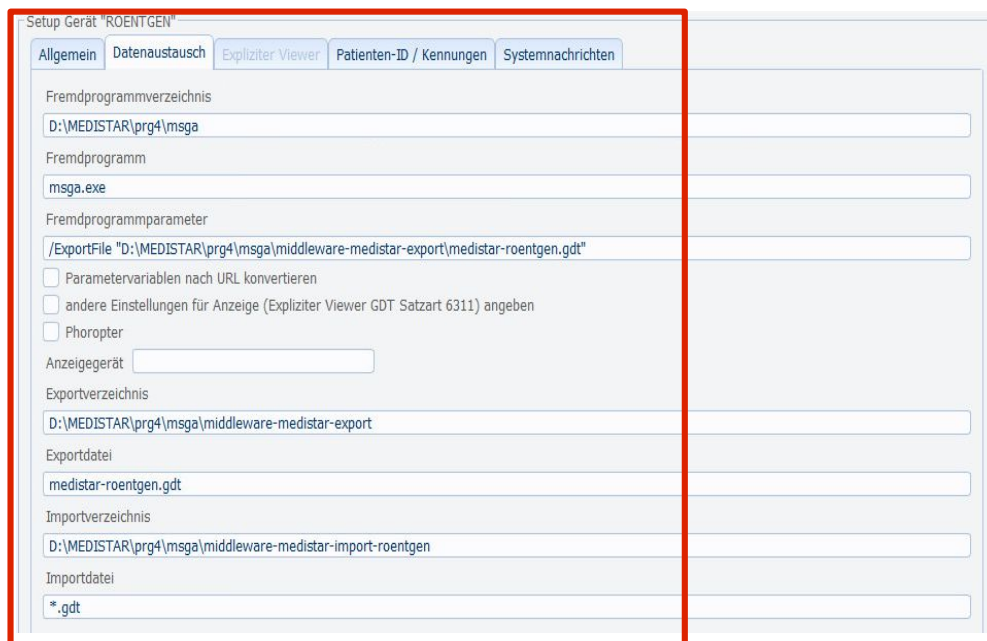

Der Gerätenamen (hier **ROENTGEN**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar



Setup Gerät "ROENTGEN"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) ROENTGEN

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Für die Anbindung muss eine Untersuchungsart angelegt werden. Erstellt werden muss „**ROEN01**“.



Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows


Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

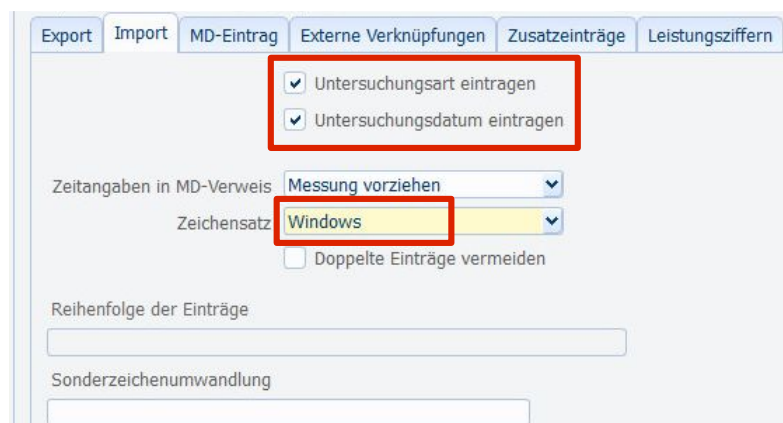

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Untersuchungsart eintragen

Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "ROENTGEN" Untersuchungsart "ROEN01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	N
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät "ROENTGEN" Untersuchungsart "ROEN01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



MS3.IO XDT2

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
085	Parameter 7		Ergänzung
086	Zeilentyp 7		zusätzl.Unters.arten
087	ExportIndex 7	1	
088	Menüpunkt8	***	Menüpunkt8
089	Label 8	ROENTGEN	Beschriftung
090	Name 8	ROENTGEN	Geraet
091	Untersart 8	ROEN01	Untersuchungsart
092	Satzart 8	6302	Satzart
093	Zieler 8		Leistung
094	Parameter 8		Ergänzung
095	Zeilentyp 8		zusätzl.Unters.arten
096	ExportIndex 8		
097	Menüpunkt9		Menüpunkt9
098	Label 9		Beschriftung
099	Name 9		Geraet
100	Untersart 9		Untersuchungsart

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **ROENTGEN**

Untersuchungsart: **ROEN01**

Middleware Konfiguration und PascalScript-Dateien (PSC):

ROENTGEN-ROEN01.ini

ROENTGEN-ROEN01.csv

Middleware Lizenzdatei:

ROENTGEN.crt


Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „ROENTGEN-ROEN01“ und „ROENTGEN-ROEN01.csv“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „ROENTGEN-ROEN01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „ROENTGEN.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Passen Sie weiterhin die Datei „ROENTGEN-ROEN01.csv“ an. In dieser Datei wird der Auswahldialog für die Röntgenbereiche konfiguriert. Der folgende Dialog kann somit manuell pro Kunde auf genau dessen Bedürfnisse angepasst werden.

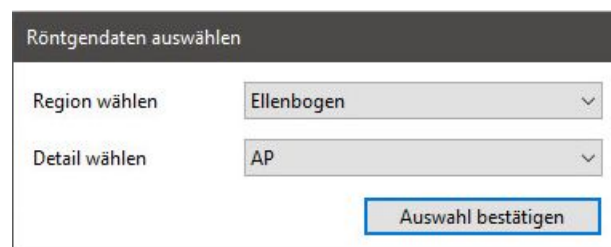

Man kann durch ändern bzw. hinzufügen von Einträgen in der CSV-Datei die Auswahlboxen editieren.

```
Code;CodingScheme;Section;Text;SectionFormat;TextFormat;GDTFID;GDTOutputFormat
24;Default;HAND;AP;Hand;AP;6227;%s, %s
25;Default;HAND;KIND;Hand;Kind;6227;%s, %s
26;Default;HAND;SCHRÄG.;Hand;Schräg.;6227;%s, %s
...
```

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und die Import-Datei wird erstellt.

XDT-Anbindung		
Version 1.4		Datum: 07.06.22
8	ROENTGEN	18
		19
		20

Wählen Sie nun die aus welche Daten als zusätzliche Daten per GDT zum Import bereitgestellt werden sollen. Alle Daten der Auswahlboxen können selbstständig editiert werden (siehe ROENTGEN-ROEN01.csv).

Röntgendaten auswählen

Region wählen: Ellenbogen

Detail wählen: AP

Auswahl bestätigen


Die Anwendung erstellt im zuvor konfigurierten Pfad die GDT-Importdatei mit den ausgewählten Optionen.

Beispielauszug:

0236227ELLENBOGEN, AP

Alle Zusatzdaten, wie GDT-Feldkennung, Bezeichner, Region usw. können manuell angepasst werden. Auch eine grafische Darstellung des Skelettes wäre denkbar.

Die Röntgensoftware muss nun die GDT-Datei aus folgendem Pfad importieren:

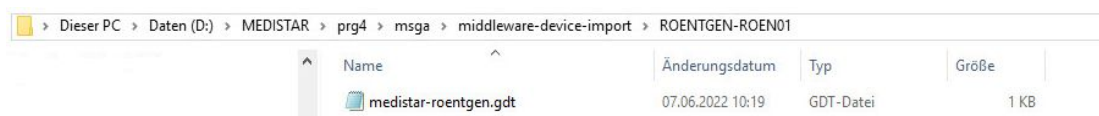

Die Patientendaten und die Zusatzdaten werden nun am Gerät angezeigt.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen PascalScript-Dateien verwendet werden.