


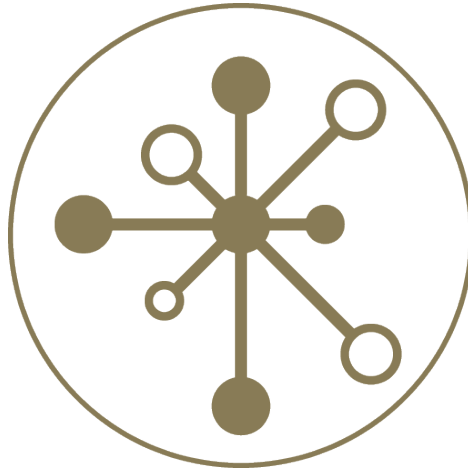

CGM MEDISTAR Device Connect (Middleware)

QuickInstallation Guide Version 1.0

team2work GmbH
Hildastrasse 16
76571 Gaggenau, Germany
Tel.: +49 7225 9181935
e-mail: info@team2work.de
Web: <https://www.team2work.de>

Inhaltsverzeichnis

Installation.....	4
Editieren der Middleware Konfigurationsdatei „msga.ini“.....	4
Einfügen der Lizenzdateien.....	5
Herunterladen der aktuellen Gerätekonfiguration für Ihre Anbindung.....	5
Anpassen der Gerätekonfigurationsdateien.....	6
Einrichtung Gerät im MEDISTAR.....	7
Middleware um ein weiteres Gerät erweitern.....	9
Hinweise.....	10

Installation

Die Software wird über das MEDISTAR Update verteilt, alternativ kann über den Webdownload unter <https://medistar.team2work.de/> immer die aktuelle Version heruntergeladen werden.

Standard Installationspfad der Anwendung ist: **D:\MEDISTAR\prg4\msga**

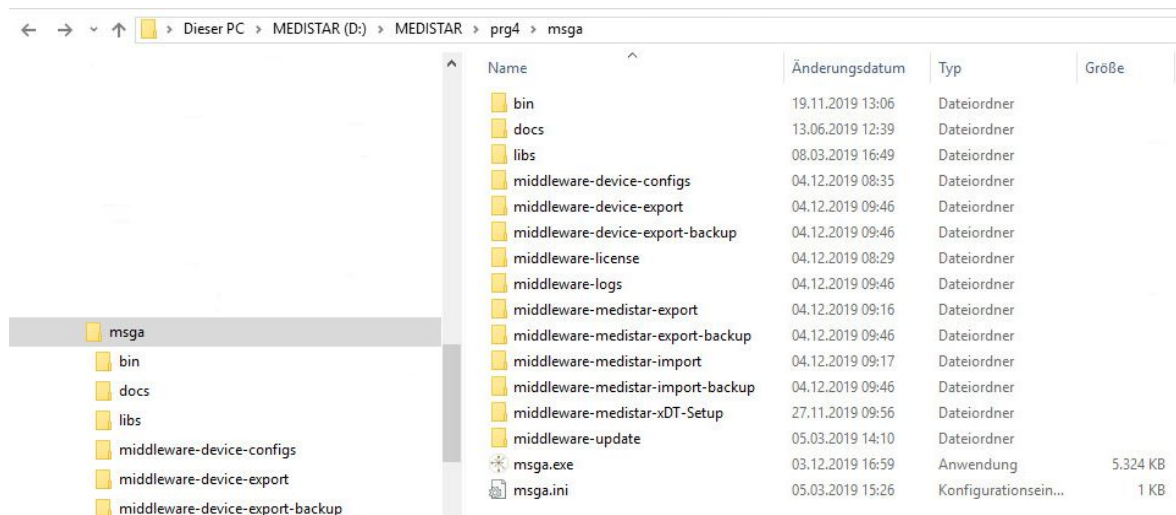


Abbildung 1: Verzeichnisinhalt



Sollten bereits Änderungen an den Konfigurationsdateien vorgenommen worden sein, dann bitte nur die Programmdateien aktualisieren und nicht das gesamte Verzeichnis (bei manuellem Update).

Ist die aktuelle Version vorhanden, kann mit der Einrichtung begonnen werden.

Editieren der Middleware Konfigurationsdatei „msga.ini“

Öffnen Sie die „msga.ini“ mit einem Texteditor. Anpassen des Lizenzdateinamens:

```
[License]
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-license\
FileName=00001.crt
```

Passen Sie den „**Filename=**“ an Ihre Lizenzdatei an. Der Dateiname besteht aus Kundennummer und Dateiendung ***.crt**. Prüfen Sie weiterhin alle Pfade auf Richtigkeit. Hier im Beispiel, Kundennummer **00001**.

Einfügen der Lizenzdateien

Kopieren Sie die erhaltenen Lizenzdateien ins Lizenzverzeichnis (ermittelt aus der „msga.ini“).

Standardverzeichnis ist: **D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-license**



Im **Lizenzverzeichnis** ist die **Anwendungslizenz** enthalten und die Lizenzen pro Geräteanbindung.

Herunterladen der aktuellen Gerätekonfiguration für Ihre Anbindung

Alle aktuellen Anbindungen werden unter <https://medistar.team2work.de> veröffentlicht. Die Geräteanbindungen pro Gerät werden in einzelnen Zip-Archiven veröffentlicht.

Laden Sie das Zip-Archiv für Ihre Anbindung herunter. Siehe <http://medistar.team2work.de/MSGA/Ger%c3%a4te%20Konfigurationen/>

Index of /MSGGA/Geräte Konfigurationen

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	Canon OCT A-1 Xephilo.zip	2019-12-02 10:52	580K	
	Canon TX-20P.zip	2019-12-02 10:52	504K	
	Huvitz HLM-9000.zip	2019-12-02 10:52	475K	
	Luneatech VX40.zip	2019-12-02 10:52	534K	
	NIDEK ARK-1S.zip	2019-12-02 10:52	492K	
	NIDEK LM-7(P).zip	2019-12-02 10:52	525K	
	NIDEK NT-530P.zip	2019-12-02 10:52	722K	

Entpacken Sie das Zip-Archiv und kopieren Sie die Konfigurationsdateien ins Verzeichnis **D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-configs**

Anpassen der Gerätekonfigurationsdateien

Öffnen Sie die Konfigurationsdatei der Anbindung (*.ini) mit Ihrem Texteditor.
Standardpfad ist: **D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-configs**

Prüfen Sie die Lizenzeinstellungen:

```
[License]
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-license\
FileName=TOPCT800A.crt
```

Prüfen Sie weiterhin alle Pfade auf Richtigkeit. Achten Sie darauf, dass die konfigurierte Untersuchungsart in der MEDISTAR Konfiguration mit den Daten in der Konfiguration der Middleware übereinstimmt.

```
[XML-OPT006]
NodeName=<nsTM:Measure type="TM">
SchemeFileName=TOPCT800A-OPT006-scheme-01.xml
TransformedFileName=TOPCT800A-OPT006-transformed.xml
Description=
```

Hier im Beispiel ist die Untersuchungsart als „OPT006“ angegeben. Wird diese Untersuchungsart geändert, müssen die Werte hier angepasst werden und die Dateinamen der Konfigurationsdatei und der Schemadatei müssen editiert werden.

Achten Sie auf die Schreibweise der Geräte-ID (GDTID) und der Untersuchungsart. Der Konfigurationsdateinamen und der Schemadateinamen besteht immer aus der Geräte-ID und der Untersuchungsart.

Der Gerätenamen innerhalb der Medistar Anwendung kann „selbst“ vergeben werden. Für die Anbindung, die Lizenz und die Konfiguration der Middleware muss die offizielle Geräte-ID (GDT-ID) verwendet werden.




Bitte achten Sie darauf, immer die aktuellen Konfigurationsdateien der Geräte zu verwenden. Prüfen Sie hierbei immer Online ob eine neue Version der Konfiguration verfügbar ist.

Einrichtung Gerät im MEDISTAR


Jeder Geräteanbindung liegt eine „xDT.Setup“ Datei bei. Hier als Beispiel die Datei „TOPCT800A.xDT.Setup.xDT.Setup.xDT.Setup“.

Importieren Sie die „xDT.Setup“ Datei über „ga_xdt“.

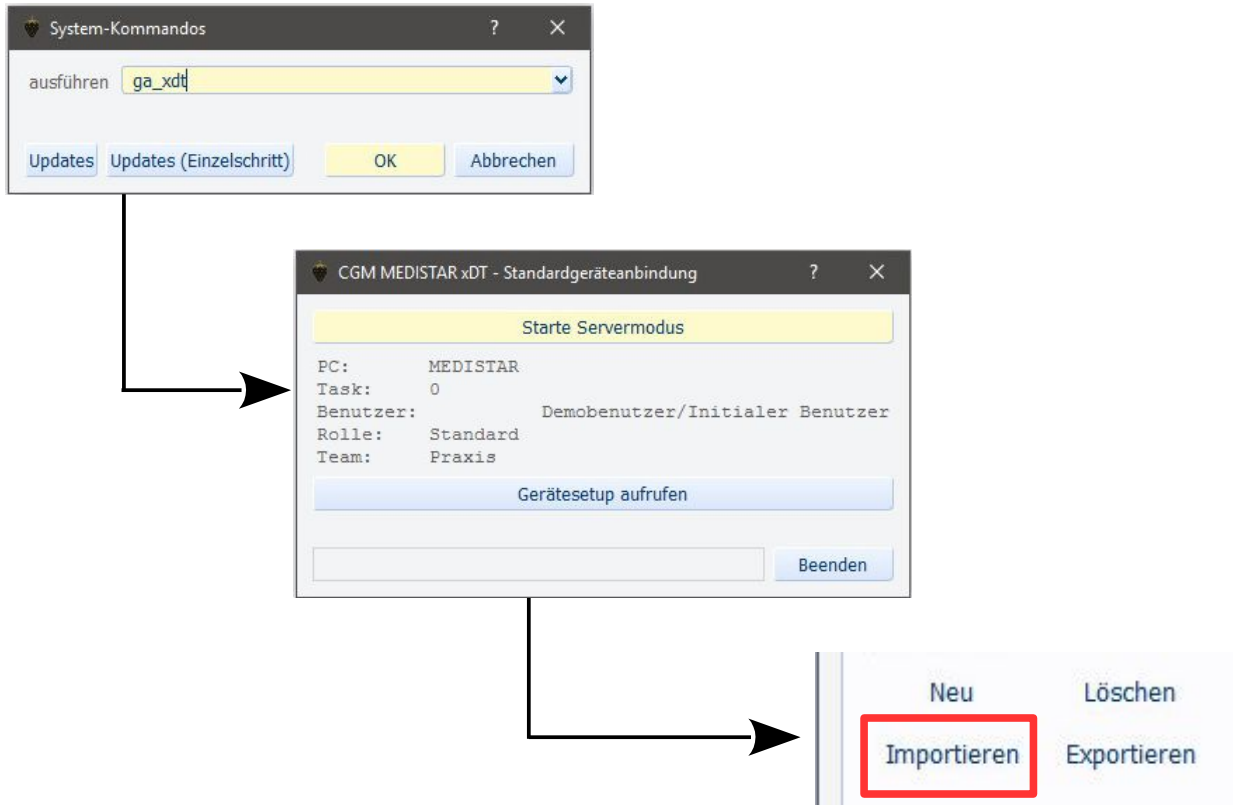

Prüfen Sie die Einstellungen und vergleichen Sie die Pfade mit Ihrer lokalen Installation. Stellen Sie sicher, dass für die Untersuchungsart die korrekten MD Zeilentypen ausgewählt worden sind.

Erstellen Sie ein neues Formular oder einen neuen Eintrag für die neue Geräteanbindung.

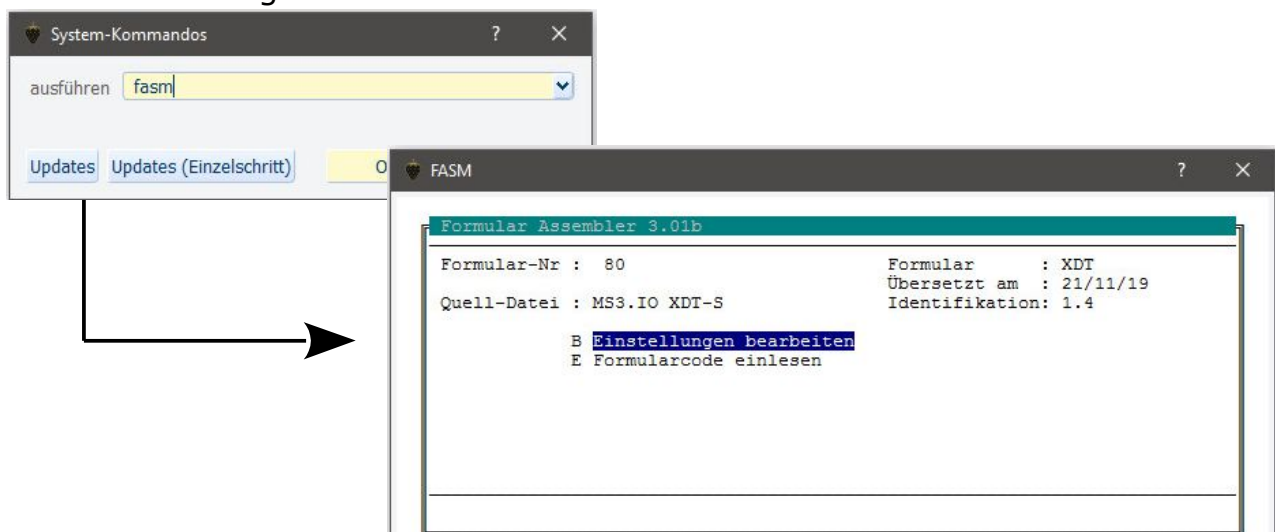

MS3.IO XDT			
Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
017	MD ExportIndex	1	für MD Zugriff
018		***	
019	Export	***	Export
020	Gewicht	Gewicht:	Label MD-Suche
021	Grösse	Größe:	Label MD-Suche
022	Zeilentyp GG	B	Gewicht / Grösse
023		***	
024	Menüpunkte	***	Menüpunkte
025	Menüpunkt1	***	Menüpunkt1
026	Label 1	TOPCON CT-800A	Beschriftung
027	Name 1	TOPCT800A	Geraet
028	Untersart 1	OPT006	Untersuchungsart
029	Satzart 1	6302	Satzart
030	Ziffer 1		Leistung
031	Parameter 1		Ergänzung
032	Zeilentyp 1		zusätzl.Unters.arten

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse

XDT

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 04.02.19
---------------	-------------	-----------------

1 TOPCON CT-800A TM

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.3.40

MEDISTAR Export-Informationen

Dateiname: medistar.gdt
 Datum: 04.12.2019 10:31:37
 Empfänger: TOPCT800A
 Patienten-ID: 1
 Untersuchungsart: OPT006

Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Middleware um ein weiteres Gerät erweitern

Die **vorhandene** Installation der **Middleware** kann wie folgt um ein neues Gerät **erweitert** werden.

Für die Erweiterung wird benötigt:

- gültige Lizenzdatei
- Zip-Archiv der Gerätekonfigurationsdateien

Kopieren der neuen Lizenzdatei in den Ordner z.B. „..\middleware-license\". Entnehmen Sie den Ordernamen aus der „msga.ini“.

Entpacken des Zip-Archivs z.B. „Canon TX-20P.zip“. Das Archiv enthält die aktuelle Dokumentation, die Konfigurationsdatei (*.ini) und die dazugehörige Schemadatei (*.xml).

Die Dateien *.ini und *.xml kopieren ins Verzeichnis „..\middleware-device-configs\".

Hinweise

Die Middleware setzt für „externe“ Skripte folgende Komponente ein:

RemObjects Pascal Script

Created By Carlo Kok ck@remobjects.com

Copyright (C) 2000-2014 by Carlo Kok and RemObjects Software, LLC

This software is provided 'as-is', without any expressed or implied warranty. In no event will the author be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any kind of application, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

The origin of this software must not be misrepresented, you must not claim that you wrote the original software.

Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

You must have a visible line in your programs aboutbox or documentation that it is made using RemObjects Pascal Script and where RemObjects Pascal Script can be found.

This notice may not be removed or altered from any source distribution.

If you have any questions concerning this license contact info@remobjects.com

Carlo Kok, RemObjects Software

Bezugsquelle: <https://github.com/remobjects/pascalscript>

Die Middleware setzt für die serielle Kommunikation folgende Komponente ein:

Synapse TCP/IP and serial library

<https://www.ararat.cz/synapse/doku.php/start>

This project is freeware and open source under [modified BSD style license](#)!

License

Each source file, what is protected by this license, have license text on the begin of file. Used license is very free for you. You can use it in any your application, include commercial. However follow next license statement, please!

! International copyright law allows me to license you to use the Synapse code on these terms and conditions - if you do not comply with these terms and conditions then you cannot use the Synapse code!

If you use my libraries in commercial project, I will be very happy if you send me a some [donation](#).

Thank you very much!

BDS style license

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Lukas Gebauer nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.