

Geräteanbindung

Canon OCT A-1 Xephilo

Optical Coherence Tomography



<https://eu.medical.canon>

Dateiversion:	1.9.1.16
Erstellungsdatum:	18.11.2019
Letzte Aktualisierung:	10.05.2022
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Haag-Streit Deutschland
Rosengarten 10
22880 Wedel

Tel: 04103 - 709 02
Fax: 04103 - 709 370
E-Mail: info@haag-streit.de

Allgemeines

Das **OCT A-1** ehemals HS100 OCT wird über das Programm RX (RX Capture for OCT-A1) gesteuert und die Ergebnisse lassen sich als „Report JPG“ ausgeben aber meist wird eine Viewer Software installiert um den vollen Umfang der Untersuchung betrachten zu können. Die Geräteanbindung unterstützt nur die Anbindung über eine Viewer Software.

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk, bzw. Canon Software) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten

Übertragung zum Gerät per Programmaufruf. Alle notwendigen Daten werden durch GDT 2.1 (6302) an das Gerät übermittelt. Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.



Abbildung 1: Copyright by Canon INC. 2012-2020

Einstellungen am Canon OCT A-1 Xephilo

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

Die Canon Software **RX Capture for OCT-A1** muss auf dem PC installiert sein.


The screenshot displays the Canon OCT A-1 Xephilo software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Patient', 'OCT Capture', and 'Report'. The 'Patient' tab is active. Below the navigation bar, there are several input fields for patient information: Patient ID (1), Birth Date (10/06/1975), Accession No., Sex (M, F, O), Disease, Name (Lilli Testfrau), Ethnic Group, and Comment. There are also buttons for 'Add', 'Clear', 'Import', 'CSV', and 'Update'. Below the input fields, there is a table titled 'Patient List' with columns for Patient ID, Patient Name, Birth Date, Sex, Ethnic Group, Disease, and Comment. The table contains one entry with Patient ID 1, Patient Name Lilli Testfrau, Birth Date 10/06/1975, and Sex F. To the right of the table, there is a section titled 'Examination List' with a 'Total: 0' indicator.

Patient ID	Patient Name	Birth Date	Sex	Ethnic Group	Disease	Comment
1	Lilli Testfrau	10/06/1975	F			


Abbildung 2: Copyright by Canon INC. 2012-2020

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

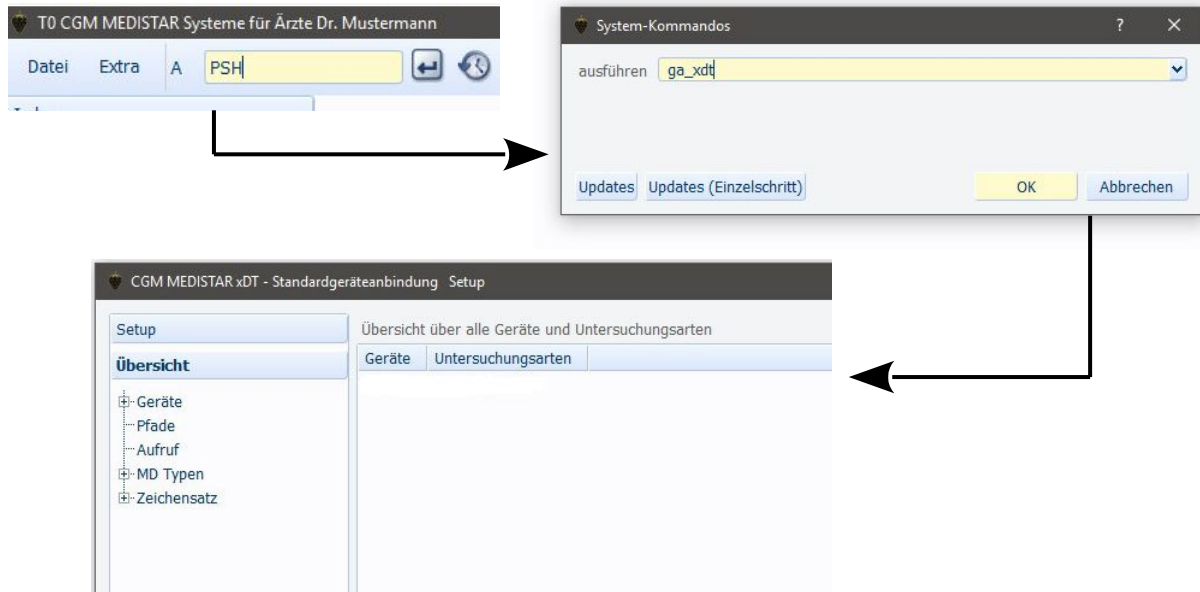

CANOCT1 → Canon OCT A-1 Xephilo → **GDT-ID / Geräte-ID ist CANOCT1**

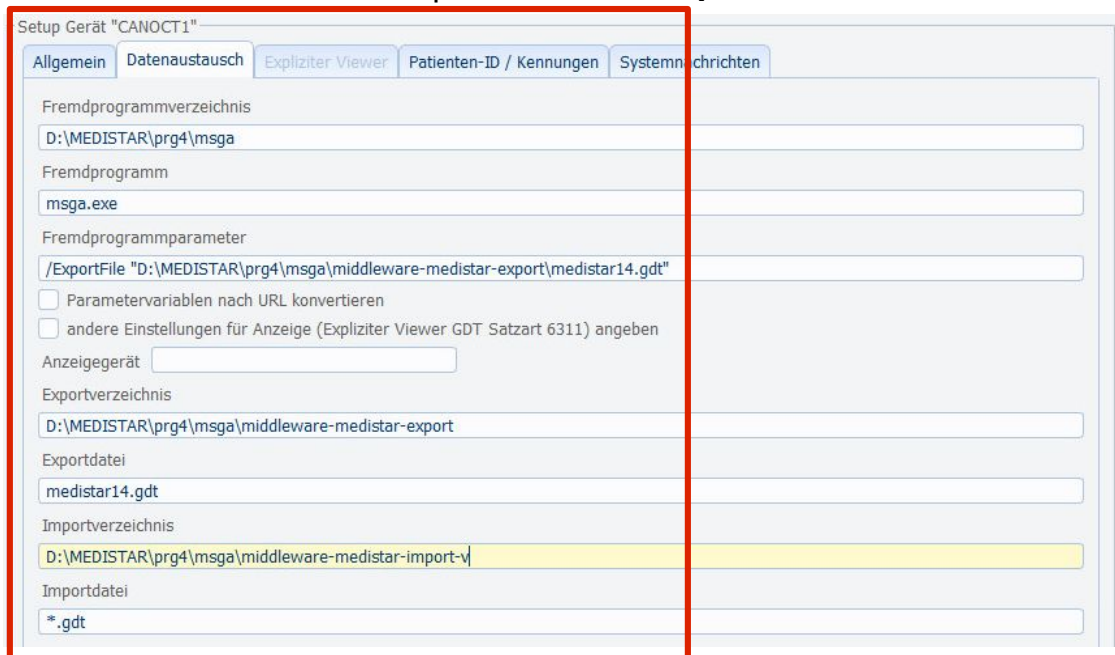

Der Gerätenamen (hier **CANOCT1**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. BMP Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. BMP Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.**

Setup Gerät "CANOCT1"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | Patienten-ID / Kennungen | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) CANOCT1

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Setup Gerät "CANOCT1" Untersuchungsart "OPTO14"

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz Windows ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "CANOCT1" Untersuchungsart "OPTO14"

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen ▼

Zeichensatz Windows ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Setup Gerät "CANOCT1" Untersuchungsart "OPTO14"

Export

Import

MD-Eintrag

Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V9
8432/8439	Verweis Messung	V9
6302-6305	Verweis Link	V9
6205	Diagnose	V9
6220	Befund	V9
6221	Fremdbefund	V9
6227	Kommentar	V9
6228	Ergebnis	V9
8990	Signatur	V9
3622/3623	Grösse/Gewicht	V9
6330-6399	Freie Kategorien	V9
8410-8480	Werte	V9

Setup Gerät "CANOCT1" Untersuchungsart "OPTO14"

Export

Import

MD-Eintrag

Externe Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätename in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDaten verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird z.B. als **V9** eingegeben. Als Untersuchungsart wird **OPTO14** (generische Bilddaten) für die Messung verwendet.


Die Untersuchungsart **OPTO14** ruft über die „Canon Software“ den Modus zur Messung auf (OCT), als Untersuchungsart zur Betrachtung (PATIENT) kann **OPTO00** verwendet werden.

Untersuchungsart	
Export	Import
Standard	Standard
OPTO00	OPTO00
OPTO14	OPTO14

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

Untersuchungsart **OPT014** steuert die Canon Software und öffnet den Modus „OCT“. Nach dem Login wechselt die Canon Software in den Aufnahmemodus

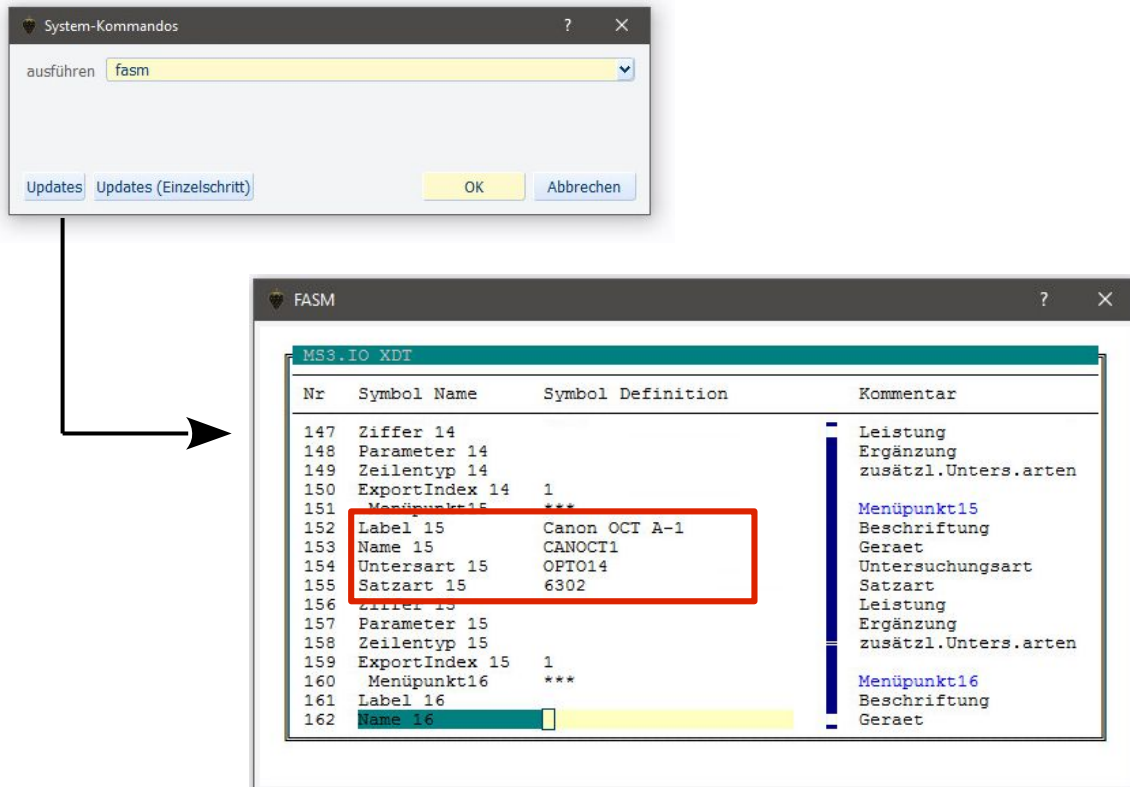

oder zusätzlich als Betrachtungsmodus (PATIENT) **OPT000**. Label Bezeichner anpassen.

151	Menüpunkt15	***	Menüpunkt15
152	Label 15	Canon OCT A-1	Beschriftung
153	Name 15	CANOCT1	Geraet
154	Untersart 15	OPT000	Untersuchungsart
155	Satzart 15	6302	Satzart
156	Ziffer 15		Leistung
157	Parameter 15		Ergänzung
158	Zeilentyp 15		zusätzl.Unters.arten

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **CANOCT1**

Untersuchungsarten: **OPTO14 und OPTO00**

Middleware Konfigurationen:

CANOCT1-OPTO14.ini

CANOCT1-OPTO00.ini

Middleware Lizenzdatei:

CANOCT1.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdateien** „CANOCT1-OPTO14.ini“ und „CANOCT1-OPTO00.ini“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdateien „CANOCT1-OPTO14.ini“ und „CANOCT1-OPTO00.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „CANOCT1.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Kopieren und editieren Sie die zusätzliche Konfigurationsdatei „CANOCT1-OPTO14-gdt-data.txt“. Über diese Datei kann der Standardtext geändert werden, welcher automatisch nach dem Starten einer Messung importiert wird.

Soll kein MD Eintrag generiert werden, bitte folgende Anpassung vornehmen:

1. Öffnen der Datei „CANOCT1-OPTO14.ini“
2. Editieren der Sektion

```
[Format]  
Import=NDD  
Export=GDT
```

Entfernen des „GDT“ Wertes.

3. Speichern der Datei



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass der Common Block der Geräte-INI-Datei unverändert bleibt. Bezeichner der Parameter „Name“ und „Model“ sind für die Art der Anbindung wichtig.


[Common]

Name=Canon

Model=OCT-A1

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, für den gewählten Patient wird die Canon Software gestartet und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

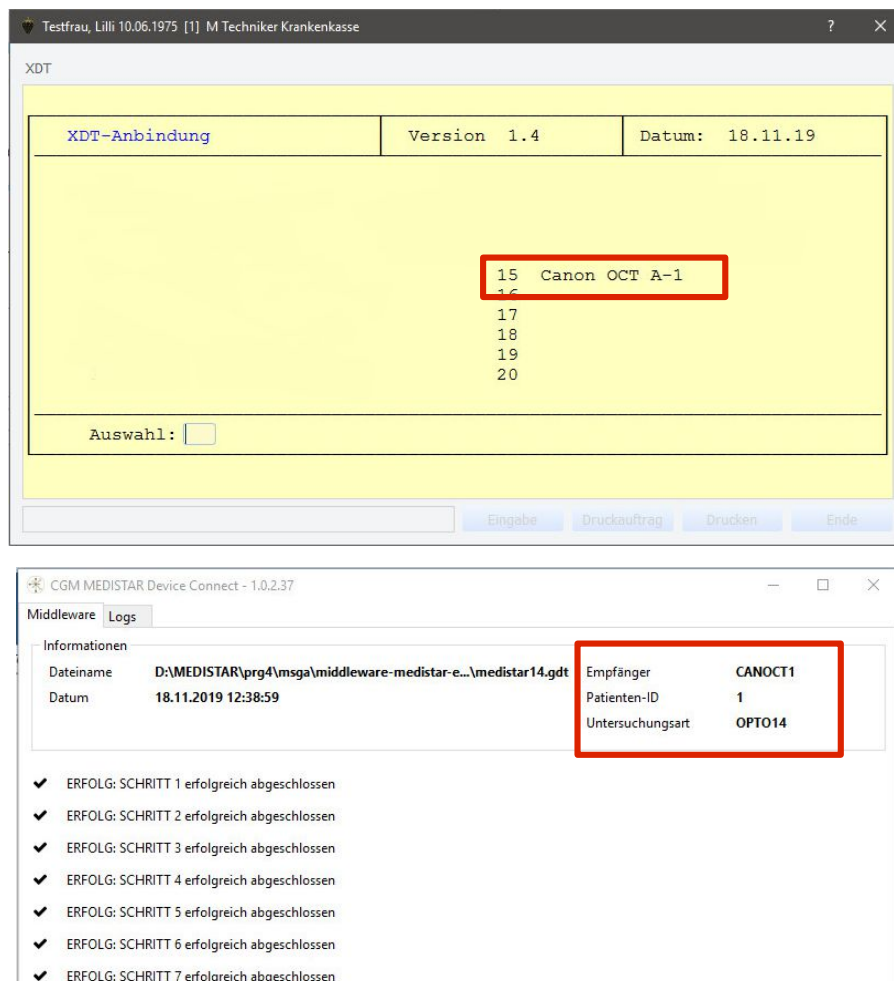

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung / Daten des „**Canon OCT A-1 Xephilo**“ warten. Die Canon Software ist währenddessen im OCT Modus gestartet.



Die **Messung** des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung wird diese Patienten ID inkl. der Patientendaten per GDT an die Canon Software übergeben.

Wird eine gültige Messdatei oder eine gültige Rückgabedatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten nun erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig. Der **GDT-Server** kann nun automatisch (sofern gestartet) die GDT-Importdatei einlesen und verarbeiten.



Der **GDT-Server** importiert die GDT „Exportdatei“ der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V9 XD:CANONCT1.OPT014

V9 Aufnahme Canon OCT-A1




Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.


zusätzliche Informationen

Für das OCT sind die Informationen über die ethnische Gruppe des Patienten verpflichtend. Da per GDT diese Informationen nicht zu Verfügung stehen, müsste nach dem Export der Patientendaten die ethnische Gruppe selbst ausgewählt werden.

Folgende Meldung wird, wenn die Standardeinstellungen verwendet werden, angezeigt:

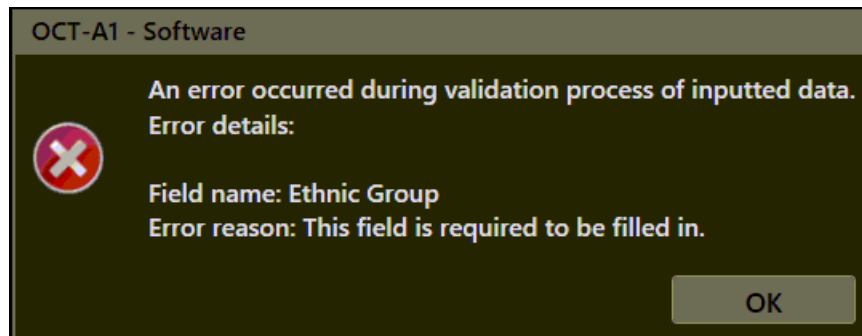

Die Einstellungen, welche Felder verpflichtend sind, können über die Software verändert werden. Es müssen die „Initial Settings“ aufgerufen werden.

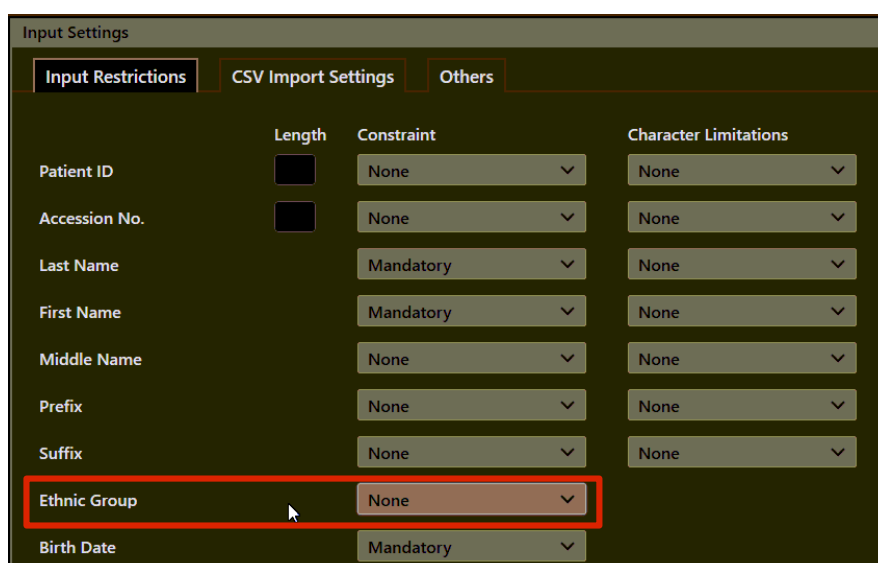

Die Einstellung für „**Ethnic Group**“ von **Mandatory** auf **None** stellen. Damit der Ablauf besser ist, sollte der Aufruf der Geräte Software nicht auf **OCT** eingestellt sein, sondern besser auf **PATIENT**.

Dies ändern in der „**CANOCT1-OPTO14.ini**“:

```
ExecutableParams=/UserID: "canon" /Password: "canon" /Command:  
"OCT"
```

Ändern in ... /Command: "PATIENT". Somit wird der Patient aufgerufen, die Patientendaten werden an die CANON Software übergeben und es kann als erster Schritt vor der Messung die ethnische Gruppe ausgewählt werden.

Betrachtung am Nebenplatz

Die Betrachtungssoftware kann verwendet werden, damit ein Patient direkt geöffnet werden kann.

Hierzu im MEDISTAR Formular (**fasm**) einen weiteren Eintrag für das Gerät zur Betrachtung anlegen.

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
156	Ziffer 15		Leistung
157	Parameter 15		Ergänzung
158	Zeilentyp 15		zusätzl. Unters.arten
159	ExportIndex 15	1	
160	Menüpunkt16	***	Menüpunkt16
161	Label 16	Canon OCT Betrachtung	Beschriftung
162	Name 16	CANOCT1	Geraet
163	Untersart 16	OPT000	Untersuchungsart
164	Satzart 16	6302	Satzart
165	Ziffer 16		Leistung
166	Parameter 16		Ergänzung
167	Zeilentyp 16		zusätzl. Unters.arten
168	ExportIndex 16	1	
169	Menüpunkt17	***	Menüpunkt17
170	Label 17		Beschriftung
171	Name 17		Geraet

In der Konfigurationsdatei „CANOCT1-OPT000.ini“ muss geprüft werden, ob der Pfad zur Betrachtungssoftware korrekt ist.

ExecutablePath=C:\Program Files\Canon\OCT-A1\

Den Pfad zur Anwendung editieren und Konfigurationsdatei speichern.