

Anbindung an Fertilly Webportal



<https://fertilly.com/de/>

Dateiversion:	1.9.0.14
Erstellungsdatum:	11.04.2023
Letzte Aktualisierung:	24.05.2023
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Fertilly GmbH
Schönhauser Allee 12
10119 Berlin

Tel: +49 (0)30 403 6355 92
Web: <https://fertilly.com/de>
Email: info@fertilly.de

Allgemeines

Fertilly bietet eine Software Webportallösung für Kliniken/Kinderwunschzentren und deren Kunden an. Der Kunde kann mittels Weblogin auf ein Portal zugreifen und fügt seine Stammdaten, Anamnesebögen usw. per Webformular(e) seinem Konto hinzu. Unterlagen für die z.B. IVF Klinik können hier ebenfalls hochgeladen und seinem Konto zugeordnet werden.


Der Arzt/Klinik, welcher Daten von Fertilly für seine Patienten abfragen möchte, benötigt einen eigenen Login auf dem Webportal. Dieser Login beinhaltet z.B. eine eindeutige Arztkennung (ID) und einen eindeutigen Token. Weiterhin erhält der Arzt/Klinik mit diesem Token auch zugriff auf eine REST-API (Nachfolgend auch WebAPI genannt). Daten können dann per REST-API Aufrufe gesichert abgefragt werden.

Datenaustausch wird über die **LAN/WEB Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

 **Hinweis:** Damit die Anbindung genutzt werden kann, benötigt der Arzt/Klinik die WebAPI Zugangsdaten (Benutzername & Passwort) von Fertilly.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **PSH** → **ga_xdt**.

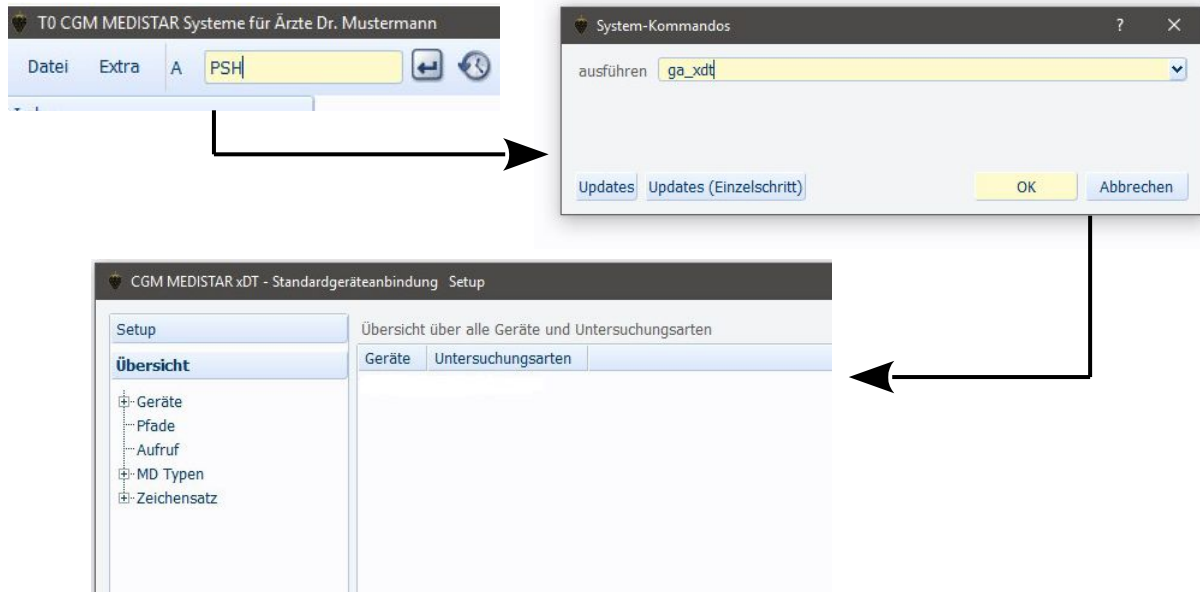

GDT-ID / Geräte-ID ist FERTILLY

The screenshot shows the configuration for a device named **FERTILLY**. The **Allgemein** (General) tab is selected. The configuration details are as follows:

- Fremdprogrammverzeichnis:** D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm:** msga.exe
- Fremdprogrammparameter:** /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-FERTILLY.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- ☒ Phoropter
- Anzeigegerät:** (empty field)
- Exportverzeichnis:** D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei:** medistar-FERTILLY.gdt
- Importverzeichnis:** D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-FERTILLY
- Importdatei:** *.gdt

Der Gerätenamen (hier **FERTILLY**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt.

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. BMP Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. BMP Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.



Setup Gerät "FERTILLY"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) FERTILLY

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.



Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten



Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen ▼

Zeichensatz Windows ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	
6220	Befund	N
6221	Fremdbefund	N
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	N
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	N
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	


ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätenamen in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDatei verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird z.B. als **N** eingegeben. Als Untersuchungsart wird **ALG00** für die Messung verwendet. Der MD-Zeilentyp kann pro Installation angepasst werden.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

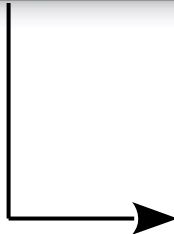

FASM

MS3.IO XDT3

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
039	Ziffer 2		Leistung
040	Parameter 2		Ergänzung
041	Zeilentyp 2		zusätzl.Unters.arten
042	ExportIndex 2	2	
043	Menüpunkt3	***	Menüpunkt3
044	Label 3	FERTILLY	Beschriftung
045	Name 3	FERTILLY	Geraet
046	Untersart 3	ALG00	Untersuchungsart
047	Satzart 3	6302	Satzart
048	Ziffer 3		Leistung
049	Parameter 3		Ergänzung
050	Zeilentyp 3		zusätzl.Unters.arten
051	ExportIndex 3	3	
052	Menüpunkt4	***	Menüpunkt4
053	Label 4		Beschriftung
054	Name 4		Geraet

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **FERTILLY**
Untersuchungsarten: **ALG00**

Middleware Konfigurationen:

FERTILLY-ALG00.ini
FERTILLY-*.*

Middleware Lizenzdatei:

FERTILLY.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdateien** „FERTILLY-ALG00.ini“ und die **Skriptdateien inkl. Sprachdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „FERTILLY-ALG00.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „FERTILLY.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Die WebAPI Anmeldeinformationen können gespeichert werden. Sollen die Daten erneut abgefragt werden, wenn sich z.B. die Anmeldeinformationen verändert haben, dann editieren Sie bitte folgende Parameter:

```
[WEB-API-ALG00]
AskForCredentials=1
CredentialType=0
APIUserName=
APIPassword=
```

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, für den gewählten Patient werden die Daten per Webaufruf abgerufen und verarbeitet.

The image shows two software windows. The top window, titled 'Mustermann, Üli 11.11.1911 [2] MBA Fam. u. zivilg. Aufg', contains an 'XDT' form. The form has a header with 'XDT-Anbindung', 'Version 1.4', and 'Datum: 03.04.23'. Below this is a list of numbers 1 through 10. The number '3' is highlighted with a red box, and the word 'FERTILLY' is entered next to it. At the bottom of the form is a label 'Auswahl:' followed by a small input field. The bottom window, titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.34.82', has tabs for 'Middleware' and 'Logs'. The 'Middleware' tab is active, showing 'Informationen'. It displays 'Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar.gdt' and 'Datum: 13.02.2023 12:00:12'. To the right, a table shows 'Empfänger: Fertilly', 'Patienten-ID: 1', and 'Untersuchungsart: ALG00', with the entire table highlighted by a red box. Below the information, a list of seven status messages is shown, all starting with 'ERFOLG: SCHRITT' followed by a number and 'erfolgreich abgeschlossen'.

Empfänger	Patienten-ID	Untersuchungsart
Fertilly	1	ALG00

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** Daten für die konfigurierte Arztkennung abrufen.

Wurde der Abruf zum ersten Mal gestartet, müssen die Web API Zugangsdaten einmalig eingegeben werden, sofern die Daten gespeichert werden sollen.

The image shows a small dialog box titled 'WebAPI Anmeldedaten eingeben'. It contains two input fields: 'Benutzername' and 'Passwort'. Below these fields is a checkbox labeled 'Benutzerdaten speichern'. At the bottom right of the dialog is a button labeled 'Weiter'.

Abbildung 1:Anmeldeinformationen

Werden gültige Daten gefunden, werden diese abgerufen und verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Daten werden dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

Müller, Jana

F GSA Köln Nichtsesshaften *04.05.1985 (38J 0M) ♀

Basismed.DatenRechnungen/Termine

Zeilentypen+*!..I

Arztkennungen

Inhalte

Dau

10.05.2023	
10.05.2023	N Fertilly
	N Kinderwunsch: ja
	N Kinderwunsch seit (Jahr): 2003
	N Kinderwunsch seit (Monat): 02
	N Verheiratet: ja
	N Zyklusdauer: 28
	N Blutungsdauer: 5
	N Letzte Blutung: 27.03.2023
	N Körpergewicht: 50
	N Körpergröße: 150
	N Alkoholkonsum: täglich intensiv
	N Zigarettenkonsum: 5-10 Zigaretten/Tag
	N Drogenkonsum: Kokain
	N Vorherige Schwangerschaft: ja
	N Jahr der Feststellung: 2003
	N Ausgang: Termingerechte Geburt (Vitalzeichen ab 38. SSW)
	N Bauch-/Unterleibsoperationen: ja
	N Welche Bauch-/Unterleibsoperation: Magenband
	N Wann: 01.11.2022
	N Vorerkrankungen: Diabetes, Konvulsionen /

Abbildung 2: Beispielauszug

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.

Troubleshooting